


FOLLO DIEM MODULE



FOLLO FUTURA AS

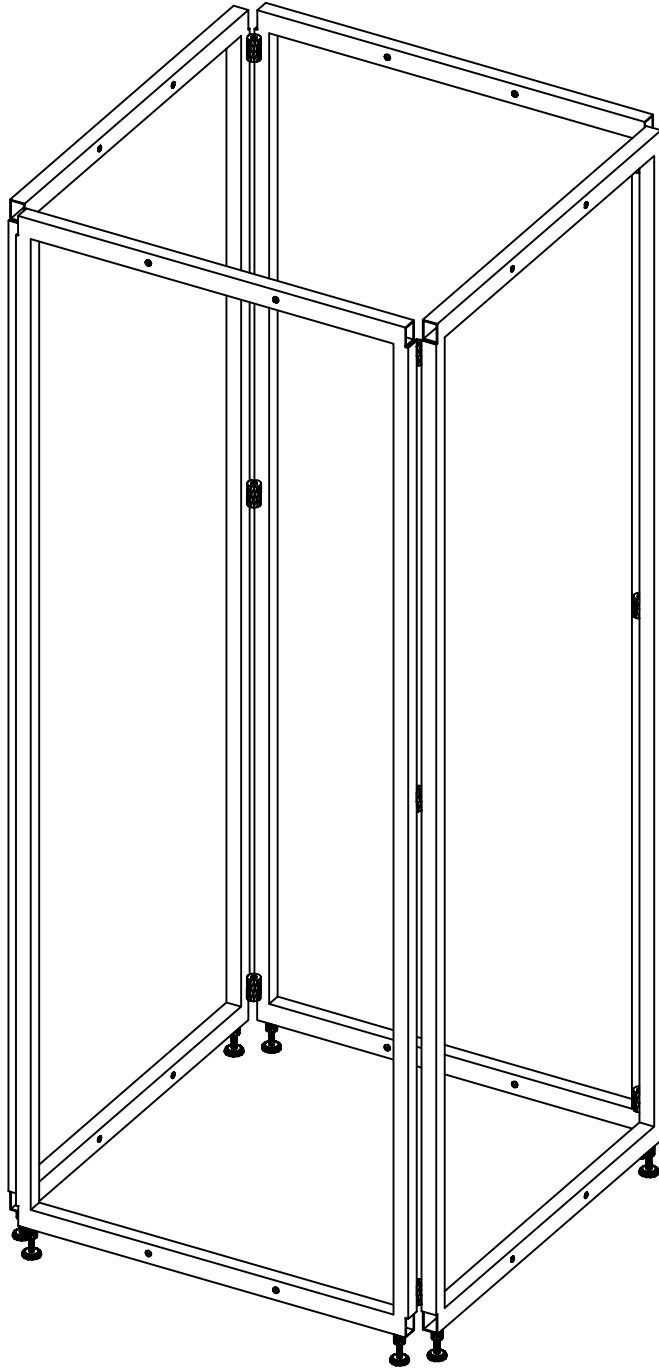

Quality system certificate

N FOLLO DIEM MODULE

Gratulerer med valget av et Follo Diem produkt. Vi har utarbeidet bruksanvisningen for at du som kunde skal få full utnyttelse av produktet. Les instruksjon nøye før produktet tas i bruk.

Heftet inneholder:

- ✓ Utpakking/installering
- ✓ Sikkerhetsinformasjon
- ✓ Betjeningsveiledning
- ✓ Vedlikehold/ettersyn
- ✓ Reservedelsliste
- ✓ Tekniske spesifikasjoner

UTPAKKING/INSTALLERING

- Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal **IKKE** brukes da det kan skade produktet.
- Sjekk at produktet ikke har transportskader.
- Sett **ALLE** modulene (1,2,9) sammen i ønsket fasong med vedlagte skruer, før skruene trekkes til.
- Juster stillben (3) ut/inn slik at monteringen står støtt. **VIKTIG!** Gulv til hull 80mm.
- Ved bruk av veggmonteringsbraketter (12), påse at brakettene blir festet på spikerslag (c/c 60cm).

SIKKERHETSINFORMASJON

- Dersom det er skader eller mangler på produktet skal det **IKKE BENYTTES** før disse er utbedret.
- Hvis monteringen blir flyttet, sjekk at den står stødig. Juster evt. stillbenene.

VEDLIKEHOLD/ETTERSYN

Hver tredje måned sjekkes følgende:

- Sjekk alle skrueforbindelser.
- Sjekk at monteringen står stødig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modul	Bred	Smal	Ribbe
Høyde	212cm	212cm	230cm
Bredde:	80cm	50cm	80cm
Vekt:	11kg	10,5kg	17kg

S FOLLO DIEM MODULE

Gratulerer till köpet av en Follo Diem produkt. Läs noga igenom instruktionen innan apparaten tas i bruk eller monteras, allt i syfte att få största möjliga utbyte av produkten.

Häftet innehåller:

- ✓ Uppackning/installation
- ✓ Säkerhetsinformation
- ✓ Användning
- ✓ Underhåll/ efterkontroll
- ✓ Reservdelslista
- ✓ Teknisk specifikation

UPPACKNING/INSTALLATION

- Var försiktig när öppnas. Använd **INTE** kniv eller andra vassa föremål at skära upp kartongen. Man skadar lätt produkten.
- Kontrollera att det inte finns transportskador. Meddela i så fall transportören inom 7 dagar.
- Montera löst alla sidorna till önskat utseende och funktion.
- Justera foten (3) så att Modulen står stadigt och i våg. **VIKTIG!** Avstånd golv-hål 80mm.
- Väggmontering av modul kräver extra beslag (12). Monteras i reglarna i väggen (c/c 60cm).

SÄKERHETSINFORMATION

- Är produkten trasig eller sanknar någon del skall produkten **INTE ANVÄNDAS** innan felet åtgärdats.
- Om Modulen flyttas, kontrollera att den står stadigt, justera stödbenen vid behov.

UNDERHÅLL/EFTERKONTROLL

Kontrollera med jämna mellanrum (var tredje månad):

- Att alla skruvar är åtdragna och sitter stadigt.
- Kontrollera att Modulen står stadigt på golvet.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modul	Bred	Smal	Ribbe
Höjd	212cm	212cm	230cm
Standardbredd	80cm	50cm	80cm
Vikt:	11kg	10,5kg	17kg

GB FOLLO DIEM MODULE

We congratulate you on choosing a Follo Diem product. This manual enables you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use. Contents:

- ✓ Unpacking/installation
- ✓ Safety information
- ✓ How to use
- ✓ Maintenance instructions
- ✓ Technical specifications
- ✓ Spare parts list

UNPACKING/INSTALLATION

1. Take care when removing packing materials. **DO NOT** use a knife or other sharp instrument to avoid damaging the contents.
2. Inspect the product for transport damage.
3. Mount **ALL** modules (1,2,9) together with the enclosed screws, before the screw joints are tightened.
4. Adjust the adjusting leg (3) in/out so that the box frame stands properly. **IMPORTANT!** Floor to hole 80mm.
5. In use of wall mounting brackets (12), make sure that the brackets are mounted on the studding (c/c 60cm).

SAFETY INSTRUCTIONS

1. If the product is damaged or defective in any way, it **MUST NOT BE USED** until repairs have been carried out.
2. If the box frame has been moved, control that it is standing properly. If not, adjust the adjusting legs.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Check the following at regular intervals (every third month):

1. Check screw joints.
2. Check that the box frame stands properly.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Module	Wide	Small	Wall Bar
Height	212cm	212cm	230cm
Width	80cm	50cm	80cm
Weight:	11kg	10,5kg	17kg

D FOLLO DIEM MODULE

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines Follo Diem Liege. Dieses Instruktionshft wurde ausgearbeitet, um Ihnen als Benutzer den vollen Nutzen des Produkts zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, ehe Sie die Liege montieren oder in Benutzung nehmen. Inhalt dieses Heftes:

- ✓ Auspacken/Installieren
- ✓ Sicherheitsinformation
- ✓ Bedienung
- ✓ Pflege/Instandhaltung
- ✓ Technische Spezifikationen
- ✓ Ersatzteilliste

AUSPACKEN/INSTALLIEREN

1. Vorsicht beim Öffnen der Verpackung. **BITTE VERPACKUNG NICHT MIT MESSER** o.ä. aufschneiden. Der Inhalt könnte beschädigt werden.
2. Liege auf eventuelle Transportschäden prüfen.
3. **ALLE** Moduln (1,2,9) mit den beiliegenden Schrauben in der gewünschten Form zusammensetzen, ehe die Schrauben angezogen werden.
4. Standbein (3) so nach außen/innen verstellen, dass der Kasten fest steht. **WICHTIG:** Abstand vom Boden zum Loch 80mm.
5. Bei Benutzung von Wandmontagehalterung (12), darauf, dass die Halterung am Nagelholz (o/o 60cm) befestigt wird.

SICHERHEITSINFORMATION

1. Falls der Produkt Schaden oder Mängel hat, ihn **BITTE NICHT BENUTZEN**, ehe sie ausgebessert sind.
2. Falls der Kasten versetzt wird, ist seine Standfestigkeit zu überprüfen, ggf. die Standbeine justieren.

INSTANDHALTUNG/INSPEKTION




Folgende Punkte regelmässig (vierteljährlich) kontrollieren:

1. Alle Schraubverbindungen nachprüfen.
2. Kasten auf Standfestigkeit überprüfen.







TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modul	Breit	Schmal	Rippen
Höhe	212cm	212cm	230cm
Breite	80cm	50cm	80cm
Gewicht	11kg	10,5kg	17kg


MOUNTING EXAMPLE
MONTERINGSEKSEMPLER

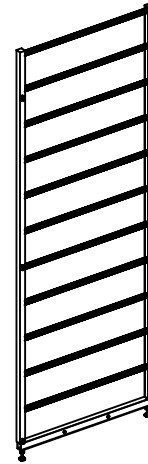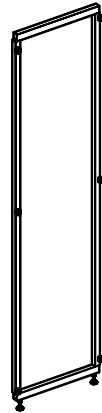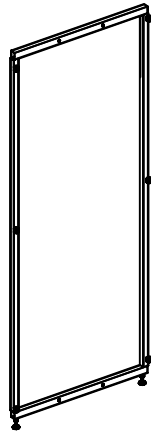








WALL MOUNTING
BRACKET

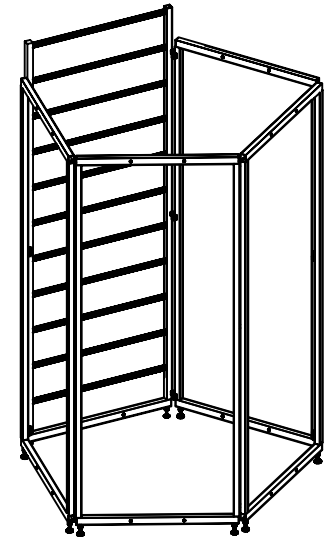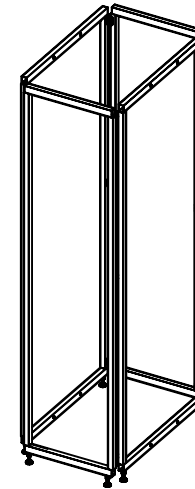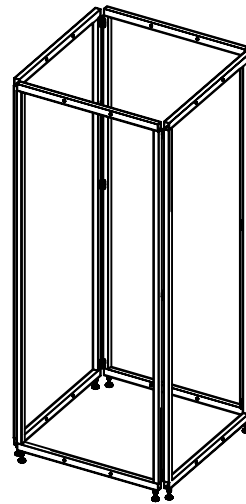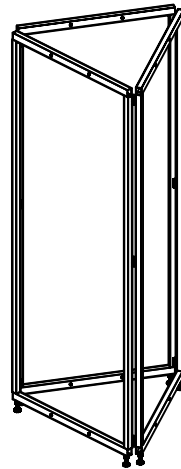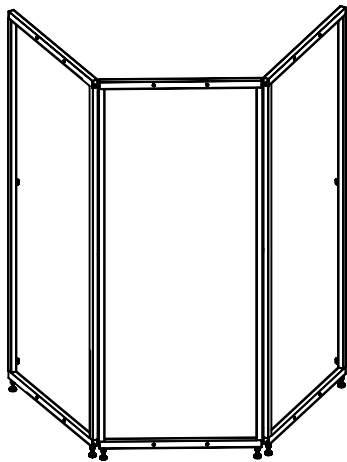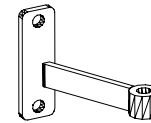


FOLLO DIEM MODULE MOUNTING EXAMPLES

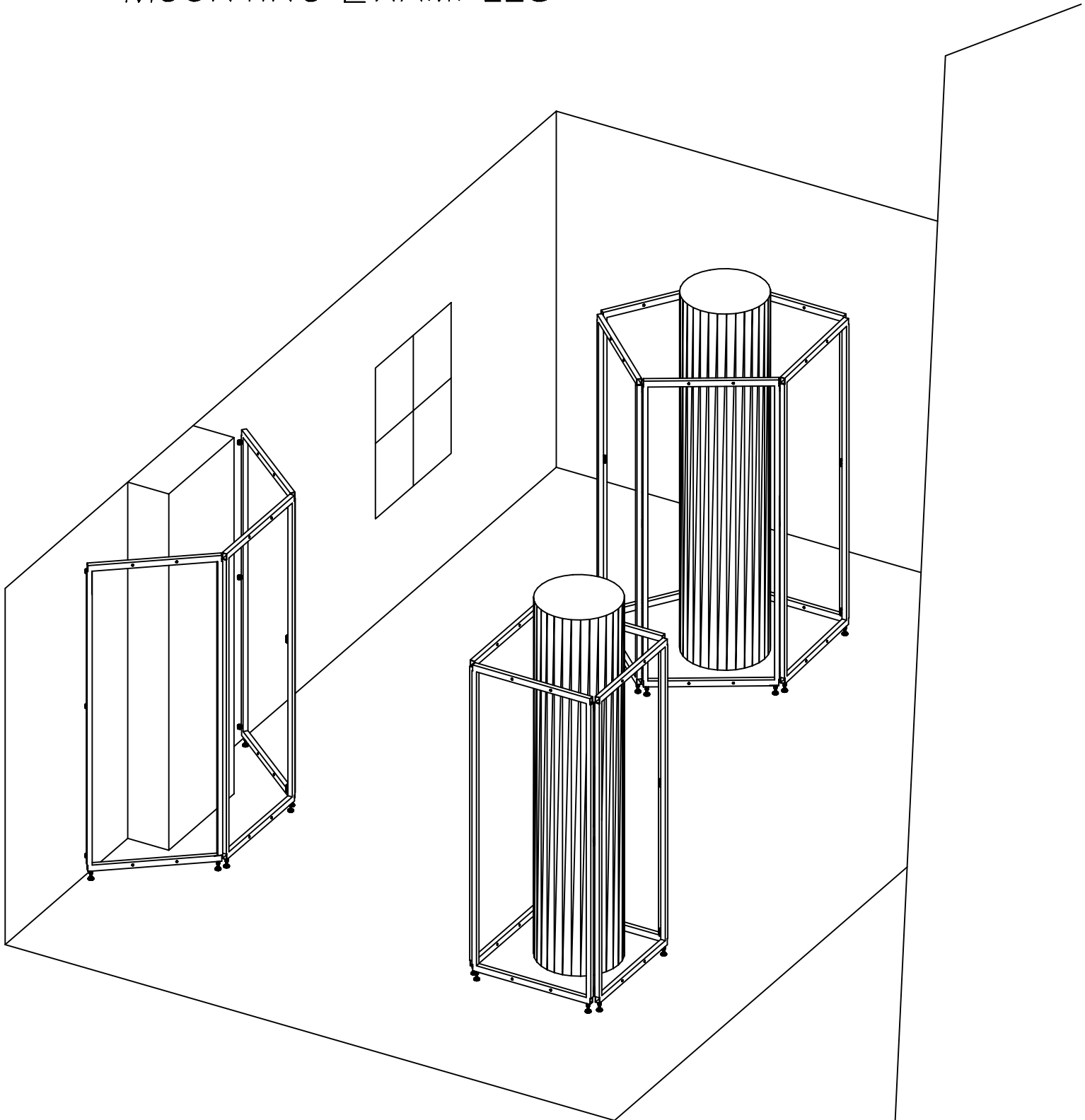



MOUNTING MONTERING

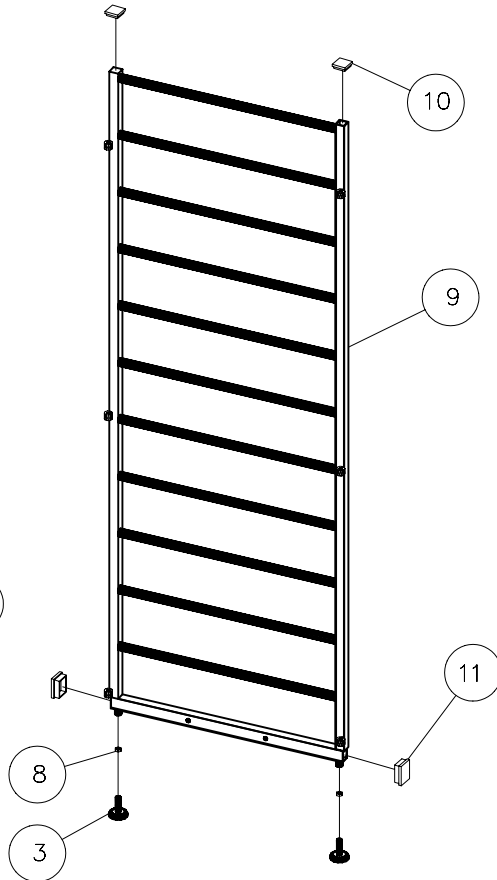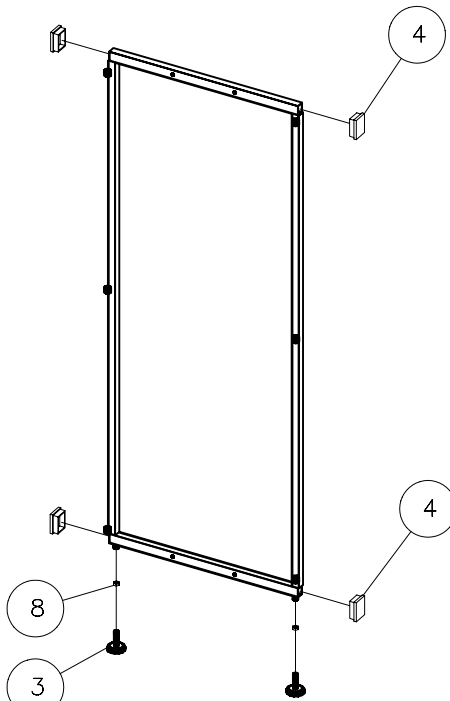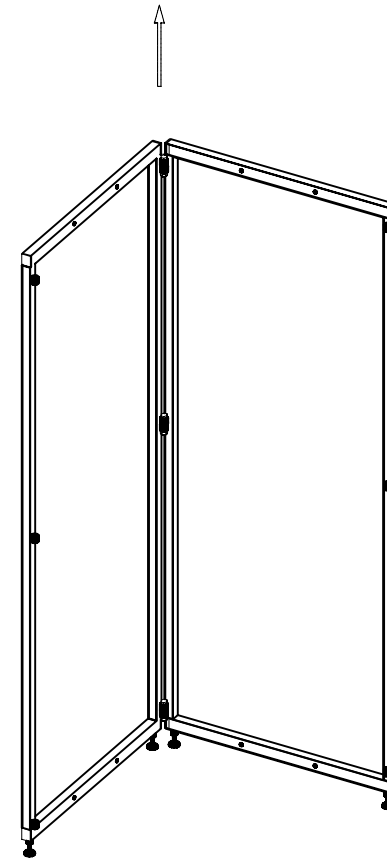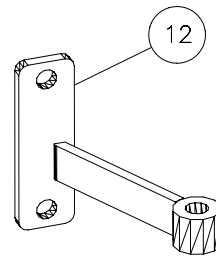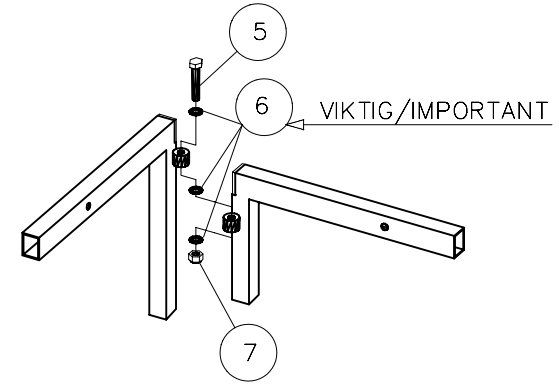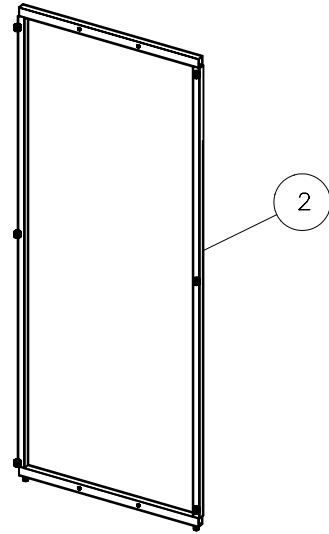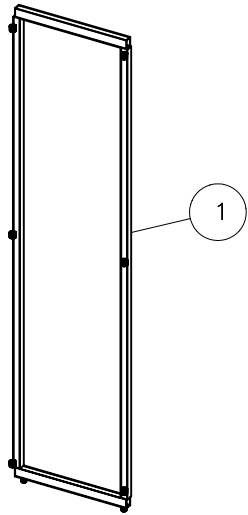


VIKTIG/IMPORTANT

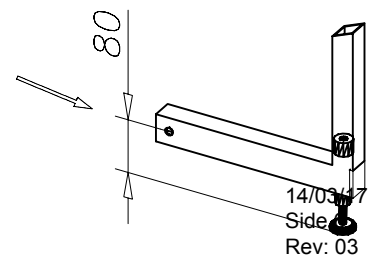

FOLLO DIEM MODULE WALL BAR

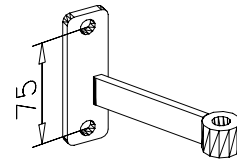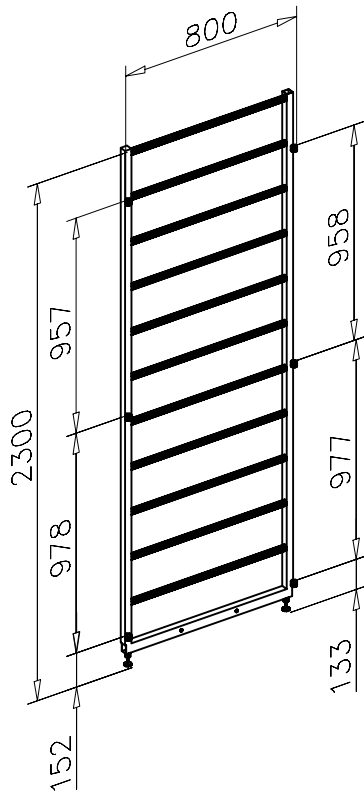

WALL MOUNTING
BRACKET

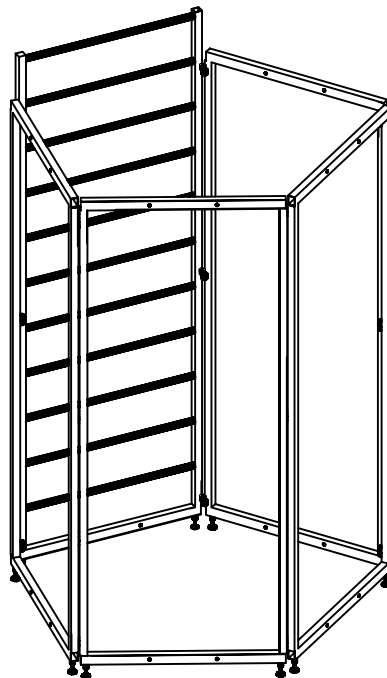

Follo Diem Module 142-01290x

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	217-02		SMALMODUL	SLIM MODULE
2	1	217-01		BRED MODUL	WIDE MODULE
3	2	591-002054	M10x55	STILLSKRUE	ADJUSTING SCREW
4	4	591-001995	F40X30	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
5	3	560-003924	M8x55	INNV 6-KT SKRUE	SCREW
6	9	572-001999	Ø8	SKJÆRMSKIVE	WASHER
7	3	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCKNUT
8	2	562-002002	M10	MUTTER	NUT
9	1	219-01		RIBBEVEGG MODUL	WALL BAR MODULE
10	2	591-001969	E30x30	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
11	2	591-001995	F40x30	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
12	6	142-012904		VEGGMONTERINGSBRAKETT	WALL MOUNTING BRACKET

