

A new generation of functional shoulder bracing

Shoulder Brace

erixone

BY MEDIROYAL

Shoulder Brace

erixtwo

BY MEDIROYAL



Mer information finns på
www.mediroyal.se/erixone
eller använd QR-koden

 DeRoyal®

Shoulder Brace

erixone

BY MEDIROYAL

Axelleden är en kroppens mest avancerade leder med stort rörelseomfång, men med förhållandevis få muskler och ligament. Muskulär stabilitet och god proprioception är viktiga faktorer för en funktionell axelled.

MediRoyal ErixOne är en patentsökt axelortos som utvecklats för att kunna ge axelleden olika typer av stabilitet. Från ökad proprioception och bio-feedback till mekanisk stabilitet och abduktions- och rotationskontroll. ErixOne är ett modult system som består av en axelortos som kan kombineras med ett bröstbälte, stabiliseringsband och pelotter. Detta ger möjligheter att stabilisera axelleden individuellt.

ErixOne har designats med en kombination av elastiska och oelastiska material samt silikonband på insidan. Dessa samverkar för att ge axelleden mekaniskt stöd och rörelsekontroll upp till 70 grader abduktion. Stängningssystemet samverkar med axelortosens design för att lyfta axeln och ge en förkomprimering av ortosens baksida. Detta ger en effektiv upphängning och positionering av axelleden.

ErixOne är tillverkad av NeoTex som isolerar kroppsvärmen. Utsidan av ortosen har samma funktion som mjuk kardborre. Med hjälp av det semi-elastiska stabiliseringsbandet kan man applicera kompression över utvalda delar av ortosen. Stabiliseringsbandet har kardborrefunktion och fäster över ortosens yta. Det gör att man också kan överföra kraft från ortosens utsida för att på det sättet öka proprioception från leden och bio-feedback effekten.

Abduktions- och rotationskontroll uppnår man bäst genom att komplettera axelortosen med ett bröstbälte och extra stabiliseringsband. Banden har två olika bredder och kan användas dels enbart för abduktionskontroll eller kombinerat för abduktions- och rotationskontroll.

ErixOne fungerar utmärkt för mjukdelsskador i axelleden. Flexibiliteten att kunna bygga ut ortosens stabilitet vid behov gör den till unik på marknaden. Ortosen fungerar också för axelskador där patienten behöver en lyftande suspensionseffekt för att avlasta axelleden och muskulaturen.

Indikationer: Efter axelluxationer, skador på rotatorkuffen, A/C-ledsinstabilitet, mjukdelsskador och generell axelinstabilitet.



ARTIKLAR

MR990

ErixOne Axelortos komplett
med alla tillbehör
XS-XL · Vänster/Höger



MR980

ErixOne enbart axelortos
XS-XL · Vänster/Höger

MR981

Brösthäls för ErixOne/ErixTwo · S-L

MR982

Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 mm
och 30 mm samt överdrag

MR983

Pelletter för stöd. Halvmåneformad Höger och
Vänster samt en cirkulär pellett.

Appliceringsalternativ


- 1 Generell axelinstabilitet
- 2 Abduktionskontroll med bröstbälte och brett stabiliseringsband
- 3 Abduktionskontroll med bröstbälte med smalt stabiliseringsband i kryss
- 4 Extern kompression/stöd med hjälp av stabiliseringsband på ortosen
- 5 Kompression och stöd med hjälp av pelletter

STORLEKSTABELL

☐ Vänster ☐ Höger

Size	☐ XS	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL
cm	24-28	28-32	32-35	35-38	38-41

Måttet tas runt överarmen/biceps och är endast en indikation.
Individuell utprovning rekommenderas.
Vid beställning, specificera vänster eller höger.

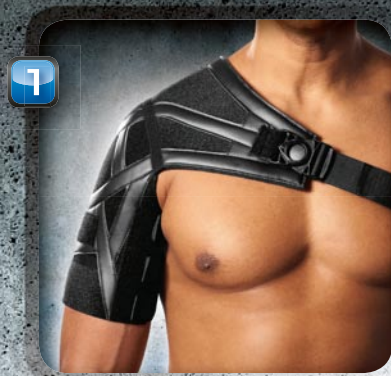

Shoulder Brace

erixtwo

BY MEDIROYAL



ErixTwo är en enklare version av den avancerade modellen ErixOne. ErixTwo är patentsökt och har fått en enklare konstruktion med större yta för infästning av band. Framtill och baktill finns två semi-elastiska kardborrband som ger individuellt stöd anteriort/posteriort. Upptill på axeln finns ett smalare semi-elastiskt kardborrband som används för att lyfta axeln. Kombinationen av dessa band och den enklare konstruktionen gör den mer lämpad för axlar som behöver mer rörlighet och stöd än rörelsekontroll. ErixTwo kan ge viss abduktionskontroll men framförallt anteriort/posteriort stöd upp till 90 graders abduktion.

ErixTwo är tillverkad av NeoTex för att ge värme och stöd. Insidan har silikonband för att kunna överföra stöd från ortosen till huden för ökad proprioception och bio-feedback. Insidan av ortosen har också kardborrefunktion vilket gör att man enkelt kan applicera pelotter för ytterligare stöd eller tryck vid behov.

ErixTwo är också modul vilket gör att det går utmärkt att komplettera ortosens funktion med tillbehören från ErixOne för abduktionskontroll eller extra stöd.

ErixTwo fungerar utmärkt för axlar som behöver rörlighet kombinerat med anteriort/posteriort stöd utan abduktionsbegränsning. Flexibiliteten gör dock att den enkelt kan byggas ut med hjälp av tillbehören framtagna för ErixOne.

Indikationer: Efter axelluxationer, skador på rotatorkuffen, A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och generell axelinstabilitet.

ARTIKLAR

MR960 · ErixTwo Axelortos · XS-XL · Vänster/Höger

MR981 · Bröstsålte för ErixOne/ErixTwo · S-L

MR982 · Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 mm och 30 mm samt överdrag

MR983 · Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och Vänster samt en cirkulär pelott.



www.vajer.se · 24031DR · SE

STORLEKSTABELL

☐ Vänster

☐ Höger

Size	☐ XS	☐ S	☐ M	☐ L	☐ XL
cm	24-28	28-32	32-35	35-38	38-42



Måttet tas runt överarmen/biceps och är endast en indikation. Individuell utprovning rekommenderas. Vid beställning, specificera vänster eller höger.

 DeRoyal®

MediRoyal Nordic AB
Box 7052 · S-192 07 Sollentuna · Sweden
+46 8 506 766 00 · www.mediroyal.se