


HJÄLP FÖR HAND & HANDLED



mediroyal.se

MATERIAL I VÅRA

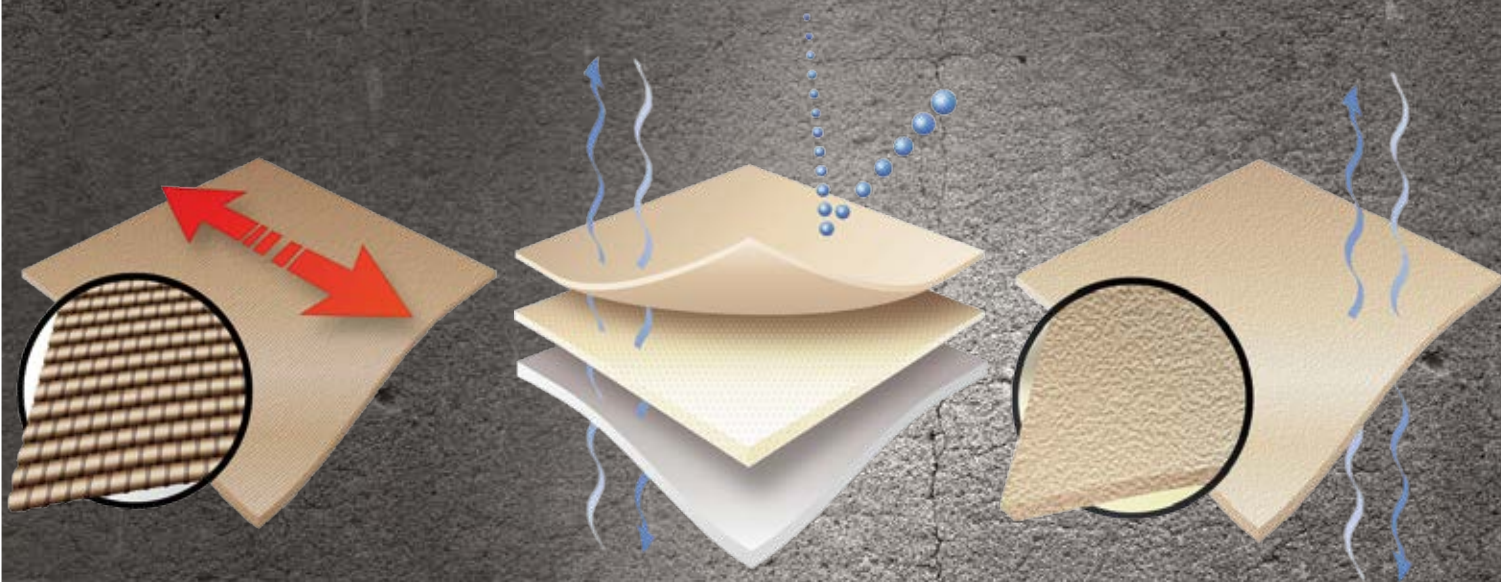

BASETEX

BASETEX PLUS

Ett stabilt material utvecklat speciellt för handledsortoser. Ger bra kompression och stöd. BaseTex Plus har högre kompression än BaseTex.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex basic kort EU2010,
Manex basic stabil EU2011,
Manex basic pollus CMC EU2012,
Manex basic kort C EU2013,
Manex optima kort EU2040,
Manex optima lång EU2041,
Manex Optima Kort EU2042 samt
Manex Optima Lång EU2043.

SOFTTEX

Är ett andningsaktivt material som transporterar bort fukt från huden. Microfleece på insidan gör materialet särskilt lämpat för patienter med känslig hud.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex rheuma kort EU2020,
Manex Rheuma Lång EU2021,
Manex rheuma pollus EU2022,
Menex rheuma pollus EU2025,
Manex rheuma kort EU2023,
Manex rheuma lång EU2024,
Manex rheuma pollus MR2027,
Manex lace-up EU2028,
Manex lace-up EU2029 samt
Manex rheuma barn MR2920.


SENSITEX

Är ett slitstarkt syntetiskt textilmaterial med läderkänsla. Materialet har mikroporer som tillåter fukt passera lätt och huden att andas.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex senseIT EU2060.

PRODUKTER

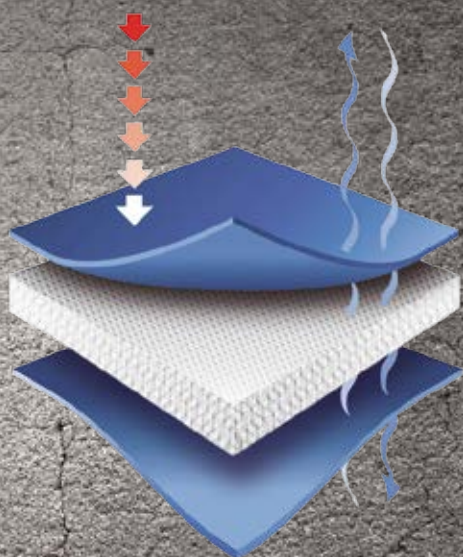


TRITEX

En unik, tredimensionell, väv som är lätt, elastisk och tryckupptagande. Materialet ger en bra kompression och ventilerar huden effektivt.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex atmosT3 EU2180.

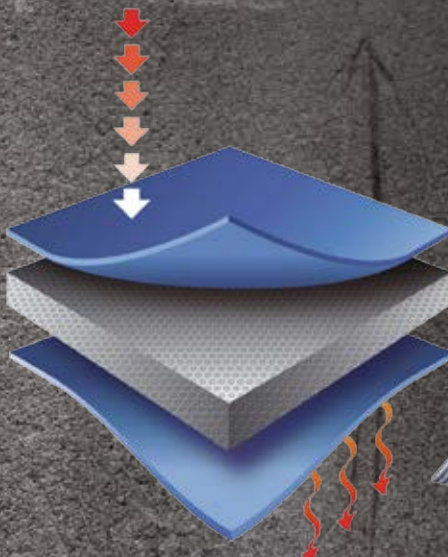


NEOTEX

Är ett specialutvecklat neoprenmaterial med slutna celler. Materialet har en hög elasticitet, bra värmeisolerande egenskaper och tar inte upp fukt.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex radial formAT MR2085,
Manex tendensNT EU2055,
Manex formAT MR2086 samt
Manex formAT MR2088.

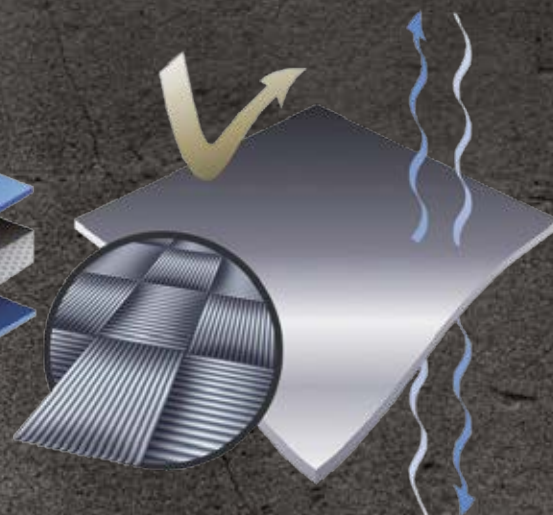

WEBTEX

Ett slitstarkt, specialvävt, material med smutsavvisande yta. Väven har en nätstruktur som tillåter huden att andas. Materialet är snabbtorkande.

PRODUKTER I MATERIALET

Manex opusWT kort EU2030 samt
Manex opusWT lång EU2031.

FOAMTEX, ÖPPNA CELLER

Manex radius kort MR2290
Manex radius lång MR2291
Manex radius ease MR2292

EU2010

PERFECT
PASSFORM

Manex Basic kort

Tillverkad i BaseTex. Ortosen har sytts med en midja för att ge perfekt passform. En kedjesöm över handleden ger en bra stabilitet på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid artrit, tendinit, karpaltunnelsyndrom samt post-op vid handledsfrakturer.

EU2010 Manex Basic kort, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkrets	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Basic stabil

Tillverkad i BaseTex. Modellen är baserad på EU 2010 men tre cm längre och bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid vibrationsskador, partiell radialispares, posttrauma/postop.

EU2011 Manex Basic stabil, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Basic Pollus

Tillverkad i BaseTex. Denna ortos har designats för att ge ett lätt stöd över thenarmuskulaturen genom att material har sytts på vid tumöppningen. Detta ger ett bra och lätt stöd för tummen. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid reumatiska eller degenerativa besvär, smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas. RSI.

EU2012 Manex Basic Pollus, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Basic kort C

Samma modell som EU 2010 men med ett fast tumgrepp som är något mindre. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Artralgi, tenosynovit, status post radiusfraktur.

EU2013 Manex Basic kort C, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2020

EU2023



Manex Rheuma kort

Tillverkad i SoftTex. Ortosen är speciellt designad för reumatiker genom att modellen är något rakare. Kardborrstängningen på dorsalsidan har utformats för att minska risken för tryck på Caput Ulnae. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid artriter- RA, neurologiska patienter, inom äldreomsorgen.

EU2020 Manex Rheuma kort svart, Vä/hö




Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkrets	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2023 Manex Rheuma kort beige, Vä/hö

Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkrets	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

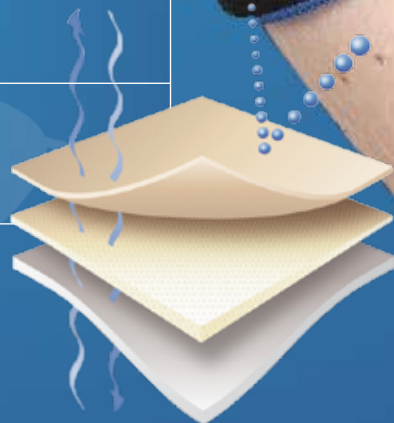

Manex Rheuma Lång

Tillverkad i SoftTex. Modellen är baserad på EU 2020/EU 2023 men tre cm längre och bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plasticskena. Latexfri. INDIKATIONER Postop rehabilitering.

EU2021 Manex Rheuma lång svart, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2024 Manex Rheuma lång beige, Vä/hö

Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2021



EU2024

Manex Rheuma Pollus

Tillverkad i SoftTex. Handledsortos med tumdel för att ge stöd och hålla tummen i funktionsställning. På utsidan av tumdelen ligger en flexibel stålskena som kan formas efter patienten. Latexfri. INDIKATIONER Postop rehabilitering.

EU2022 Manex Rheuma Pollus svart, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2025 Manex Rheuma Pollus beige, Vä/hö

Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2022



EU2025

Manex Rheuma Pollus CMC


Tillverkad i SoftTex. Handlesortos som ger ett bra och lätt stöd över thenarmuskulaturen genom att material har sytts på vid tumöppningen. Designen hjälper tummen i abduktion och ger ett ordentligt stöd vid tumbasen. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER** Vid reumatiska eller degenerativa besvär, smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas, RSI.

MR2027 Manex Rheuma Pollus CMC svart, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkrets	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

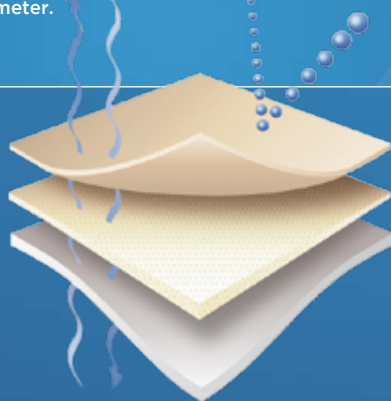

Manex Lace-Up

Tillverkad i SoftTex. Specialdesignad för patienter med nedsatt handfunktion. Kardborrstängningen med band gör den enkel att stänga. Stor vikt har lagts vid passform och funktion. Plösen är tillverkad i tunn Lycra vilket ger en hög komfort. Latexfri. **INDIKATIONER** Uttalad smärtproblematik, degenerativa ledförändringar vid tex RA.

EU2028 Manex Lace-Up beige, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2029 Manex Lace-Up svart, Vä/hö

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Rheuma Barn

Tillverkad i SoftTex. Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar vid handleden och underlättar handfunktion för lek och aktivitet. Handledsstöd som kan underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp. Även för barn som inte aktivt kan använda sina händer kan ortosbehandling vara motiverad vid olika ADL-situationer som t ex vid på- och avklädning och skötsel av hygien. Latexfri. **INDIKATIONER** Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn t ex med RA.

MR2920 Manex Rheuma Barn, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått	10-11 cm	11-13 cm	13-14 cm	14-15 cm	15-17 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Rheuma Pollus Kidz

Handledsortos för barn, tillverkad i SoftTex. Ortosen har utvecklats för att underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp. Tumdelen håller tummen i funktionsställning och ger stöd åt tummen i abduktion. Plastdelen formas för hand och håller sedan formen utan att man behöver använda varmt vatten. Latexfri. **INDIKATIONER** Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn med RA.

MR2921 Manex Rheuma Pollus Kidz, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått	10-11 cm	11-13 cm	13-14 cm	14-15 cm	15-17 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



MANEX OPUS WT KORT

EU2030



EU2030 är tillverkad i WebTex. Ett slitstarkt och specialvävt material med smutsavvisande yta.

Manex OpusWT kort är designad för att ge optimal stabilitet vid krävande arbetssituationer. Bandaget har fyra kardborrband på dorsalsidan samt justerbart

tunggrepp. Manex OpusWT levereras med en dynamisk plasticskena. Bandaget är latexfri.

INDIKATIONER


Vid smärta tendinit, artros och artrit. EU2030 är lämplig som arbetsbandage där både finmotoriska och belastningsrelaterade moment ingår i ett och samma arbete.

EU2030 Manex OpusWT kort svart, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkrets	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

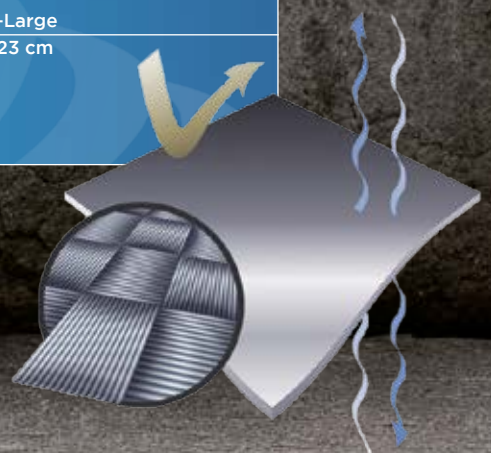

Manex OpusWT lång

Tillverkad i WebTex. Modellen är baserad på EU 2030 men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Posttrauma/postop, partiell radialispares.

EU2031 Manex OpusWT lång, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Optima kort

Tillverkad i BaseTex Plus. Liknande modell som EU 2010 men tillverkad i ett material med högre kompression. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompression posttrauma/postop, vid belastningsrelaterade aktiviteter och/eller problem.

EU2040 Manex Optima kort beige, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2042 Manex Optima kort svart, Vä/hö

Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Optima lång beige

Tillverkad i BaseTex Plus. Modellen är baserad på EU2040/EU2042 men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompression, posttrauma/postop, vid vibrationsskador, partiell radialispares.

EU2041 Manex Optima lång beige, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Optima lång svart

Tillverkad i BaseTex Plus. Modellen är baserad på EU2040/EU2042 men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompression, posttrauma/postop, vid vibrationsskador, partiell radialispares.

EU2043 Manex Optima lång svart, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkretsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2060



Manex SenseIT

Tillverkad i SensiTex. Handledsortos som utvecklats för situationer där ortosen kräver bra slitstyrka. SensiTex är semi-elastiskt med läderkänsla och ger därför ett bra stöd runt handleden. Kardborrstängning dorsalt samt justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER** Vid smärta, svaghet, degenerativa ledförändringar till exempel vid RA, ligamentskador.

EU2060 Manex SenseIT, Vä/hö



Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Omkremsmått	12-13 cm	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

MR2086



Manex FormAT CT

Tillverkad i NeoTex. Designad för användning som nattskena vid karpaltunnelsyndrom. Volart i ficka ligger en thermoplast som kan formas individuellt efter patienten. Detta ger ett bra och stabilt stöd nattetid. Ett brett fast band runt handleden och ett justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER** Nattortos vid karpaltunnelsyndrom, posttraumatiska besvär, överansträngning.

MR2086 Manex FormAT CT svart, Vä/hö



Storlek	Small	Medium	Large
Omkremsmått	13-16 cm	16-18 cm	18-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

MR2088



Manex FormAT

Tillverkad i NeoTex. Utvecklad för att ge ett individuellt stöd för patienter med uttalad smärtproblematik kring handledsregionen. Dorsalt ligger en ficka för thermoplast som formas individuellt. Volart ligger en stabil plasticskena för optimalt stöd. Ett brett fast band runt handleden ger ett bra stöd. Justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER** Används vid smärta tex efter Scaphoideumfraktur eller lunatummalaci, tendinit, epikondylit och karpaltunnelsyndrom.

MR2088 Manex FormAT, Vä/hö



Storlek	Small	Medium	Large
Omkremsmått	13-16 cm	16-18 cm	18-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter. Observera att thermoplasten måste tas ur vid tvätt



MR2083



Manex Radial

Tillverkad i NeoTex. Specialdesignad för patienter med radialispares, men kan även användas av andra diagnosgrupper. Ortosen är framtagen för att kunna uppdateras och justeras under hela behandlingen av patienten. Den består av tre delar: fingerplatta, tumdel och ortos med thermoplast för handryggen. Nattetid kan fingerplattan bytas ut mot ett mjukt band som stöd. Latexfri. **INDIKATIONER** Ersätta/stödja svaga muskler och möjliggöra ett funktionellt grepp vid radialispares, vid karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt vid till exempel radiusfraktur, vid ulnardrift av fingrar, subluxation av MCP-leder till följd av RA.

MR2085 Manex Radial svart, Vä/hö



Storlek	Small	Medium	Large
Storlek	13-16 cm	16-18 cm	18-22 cm


Observera att thermoplasten måste tas ur vid tvätt.

MR2083 Fingerplatta till Manex Radial FormAT, Vä/hö

Tillverkad i NeoTex och SoftTex. Säljs i tre-pack. Fingerplattan följer MCP-ledernas sluttande båge från Dig II-V. Storlek small, medium och large.

MR2084 Tumdel till Manex Radial FormAT, Vä/hö

Tillverkad i NeoTex. Säljs i tre-pack. Storlek: small, medium och large.

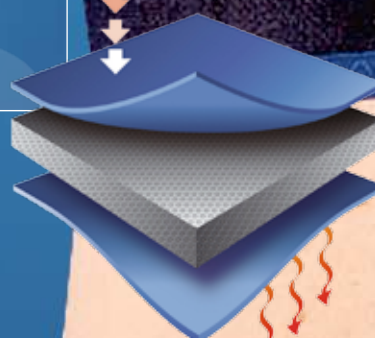



Manex AtmosT3

Tillverkad i TriTex. En enkel och mycket funktionell handledsortos med ett fast band runt handleden för maximalt stöd. Justerbart tumgrepp. Mycket lämplig för patienter som är tryckkänsliga. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid arbetsrelaterade situationer.

EU2180 Manex FormAT, Vä/hö



Storlek	Small	Medium	Large
Omkremsmått	13-16 cm	16-18 cm	18-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex TendensNT

Tillverkad i NeoTex. Detta bandage har utvecklats för patienter med arbetsrelaterade handledsproblem. Det avlastar senorna runt handleden och stödjer vid repetitiva rörelser. Designen gör att handflatan är fri och stödet ligger ulnart/radialt. Latexfri. INDIKATIONER Vid arbetsrelaterad problematik med monotona, repetitiva inslag till exempel musarm, tendinit, lateral epikondylit, karpaltunnelsyndrom.

EU2055 Manex TendensNT svart, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkremsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



**ALLA PRODUKTER PÅ
MEDIROYAL.SE**

Manex Radius kort

En ny modell av handledsortos tillverkad av FoamTex med öppna celler. Designen ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger stöd men ändå flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig stängning med två D-ringar och en plös i lycra. Tumgreppet är justerbart. Latexfri. **INDIKATIONER** Post frakturbehandling efter avgipsningar vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

MR2290 Manex Radius kort, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Radius lång

Baserad på MR2290-modellen men 3 cm längre och mer stabil. Tillverkad av FoamTex med öppna celler. Designen ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger både stöd och flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig stängning med två breda D-ringar och en plös i lycra. Tumgreppet är justerbart. Latexfri. **INDIKATIONER** Post frakturbehandling efter avgipsningar vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

MR2291 Manex Radius lång, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Radius ease

Baserad på MR2290-modellen men med snörning för enklare applicering. Tillverkad av FoamTex med öppna celler. Designen ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger både stöd och flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig snörning och plös i lycra. Tumgreppet är justerbart. Latexfri. **INDIKATIONER** Post frakturbehandling efter avgipsningar vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

MR2292 Manex Radius ease, Vä/hö



Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått	13-14 cm	14-16 cm	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2090
EU2091
EU2092
EU2093

OPTIMAL KOMFORT

Det extra stabiliserande banden kommer i universal storlek. De passar de flesta av Mediroyals handleds- och tumbandage.

Banden är gjorda av semielastisk velour för optimal komfort och stöd. Appliceras enkelt på förlängningen

av kardborren på bandaget. Fäst haken på extrabandet mot velouren på bandaget och spänn det runt handleden.

EU2090 Extra stabiliserande band beige

50 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2091 Extra stabiliserande band svart

50 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2092 Extra stabiliserande band beige

30 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2093 Extra stabiliserande band svart

30 mm, universal storlek 13-22 cm

MANEX RHEUMA BARN

MR2920



MR2920 är anpassad och designad för att ge optimalt stöd för barns händer och handleder.

Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar vid handleden och underlättar handfunktion för lek och aktivitet. Handledsstöd som kan underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp. Även för

barn som inte aktivt kan använda sina händer kan ortosbehandling vara motiverad vid olika ADL-situationer som t ex vid på-, avklädning och skötsel av hygien.


INDIKATIONER

Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn t ex med RA.

MR2920 Manex Rheuma barn, Vä/hö

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkrets	10-11 cm	11-13 cm	13-14 cm	14-15 cm	15-17 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

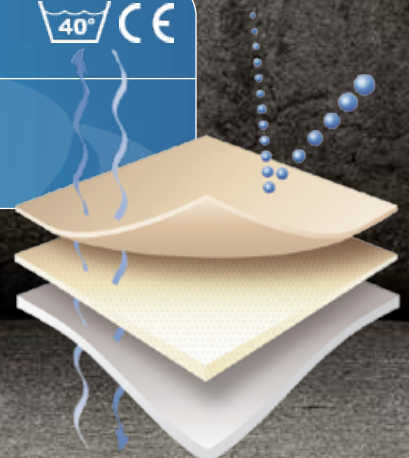

allt
SA





likks på
UTEN



mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/MediroyalNordic