


HJÄLP FÖR NACKE & AXEL



mediroyal.se

MR990 ERIXONE

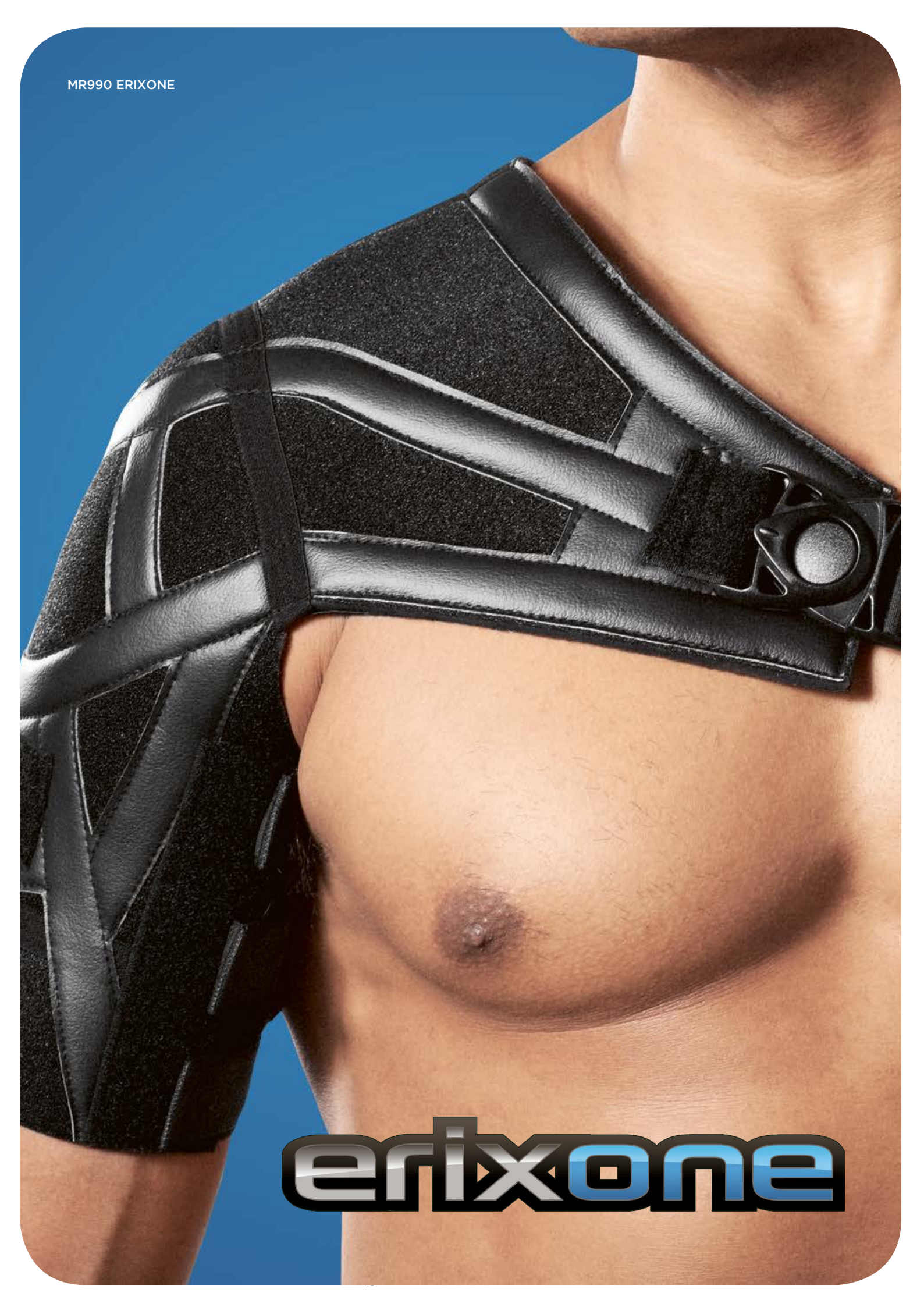

erixone

MR990

ErixOne

Axelleden är en av kroppens mest avancerade leder med stort rörelseomfång men med förhållandevis få muskler och ligament.

Muskulär stabilitet och god proprioception är viktiga faktorer för en funktionell axelled. Mediroyal ErixOne® är en patentsökt axelortos som utvecklats för att kunna ge axelleden olika typer av stabilitet. Från ökad proprioception och bio-feedback till mekanisk stabilitet och abduktions- och rotationskontroll. ErixOne® är ett modult system som består av en axelortos som kan kombineras med ett bröstbälte, stabiliseringsband och pelotter. Detta ger möjligheter att stabilisera axelleden individuellt. ErixOne® har designats med en kombination av elastiska och oelastiska material samt silikonband på insidan. Dessa samverkar för att ge axelleden mekaniskt stöd och rörelsekontroll upp till 70 grader abduktion. Stängningssystemet samverkar med axelortosens design för att lyfta axeln och ge en förkomprimering av ortosens baksida. Detta ger en effektiv upphängning och positionering av axelleden. ErixOne® är tillverkad av NeoTex som

isolerar kroppsvärmen. Utsidan av ortosen har samma funktion som mjuk kardborre. Med hjälp av det semi-elastiska stabiliseringsbandet kan man applicera kompression över utvalda delar av ortosen. Stabiliseringsbandet har kardborrefunktion och fäster över ortosens yta. Det gör att man också kan överföra kraft från ortosens utsida för att på det sättet öka proprioception från leden och bio-feedback effekten. Abduktions och rotationskontroll uppnår man bäst genom att komplettera axelortosen med ett bröstbälte och extra stabiliseringsband. Banden har två olika bredder och kan användas dels som enbart abduktionskontroll eller kombinerad abduktions- och rotationskontroll. ErixOne® fungerar utmärkt för mjukdels- och ligamentsskador i axelleden. Flexibiliteten att kunna bygga ut ortosens stabilitet vid behov gör den till unik på marknaden. Ortosen fungerar också för axelskador där patienten behöver en lyftande suspensionseffekt för att avlasta axelleden och muskulaturen.

INDIKATIONER Efter axelluxationer, skador på rotatorkuffen, A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och generell axelinstabilitet.

MR990 ERIXONE, HÖ/VÄ

Storlek	Omkretsmått, överarm/biceps
X-Small	24-28 cm
Small	28-32 cm
Medium	32-35 cm
Large	35-38 cm
X-Large	38-42 cm

ERIXONE MED TILLBEHÖR

MR990	ErixOne, komplett med alla tillbehör, XS-XL, Vä/Hö
MR980	ErixOne, enbart axelortos XS-XL Vä/Hö
MR981	Bröstbälte för ErixOne/ErixTwo, Small Medium Large
MR982	Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 30 mm samt överdrag
MR983	Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och Vänster samt en cirkulär pelott

MR960

ErixTwo

ErixTwo är en enklare version av den avancerade modellen ErixOne. ErixTwo är patentsökt och har fått en enklare konstruktion med större yta för infästning av band.

Framtill och baktill finns två semi-elastiska kardborrband som ger individuellt stöd anteriort/posteriort. Upptill på axeln finns ett smalare semi-elastiskt kardborrband som används för att lyfta axeln. Kombinationen av dessa band och den enklare konstruktionen gör den mer lämpad för axlar som behöver mer rörlighet och stöd än rörelsekontroll. ErixTwo® kan ge viss abduktionskontroll men framförallt anteriort/posteriort stöd upp till 90 graders abduktion. ErixTwo® är tillverkad av NeoTex för att ge värme och stöd.

Insidan har silikonband för att kunna överföra stöd från ortosen till huden för ökad proprioception och bio-feedback. Insidan av ortosen har också kardborrefunktion vilket gör att man enkelt kan applicera pelotter för ytterligare stöd eller tryck vid behov. ErixTwo® är också modul vilket gör att det går utmärkt att komplettera ortosens funktion med tillbehören från ErixOne® för abduktionskontroll eller extra stöd. ErixTwo® fungerar utmärkt för axlar som behöver rörlighet kombinerat med anteriort/posteriort stöd utan abduktionsbegränsning. Flexibiliteten gör dock att den enkelt kan byggas ut med hjälp av tillbehören framtagna för ErixOne®.

INDIKATIONER Efter axelluxationer, skador på rotatorkuffen, A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och generell axelinstabilitet.

MR960 ERIXTWO, HÖ/VÄ

Storlek	Omkretsmått, överarm/biceps
X-	24-28 cm
Small	28-32 cm
Medium	32-35 cm
Large	35-38 cm
X-Lar-	38-42 cm

MR960	ErixTwo, enbart axelortos XS-XL Vä/Hö.
MR981	Bröstmål för ErixOne/ErixTwo. Small, Medium,
MR982	Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 30 mm samt överdrag.
MR983	Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och Vänster samt en cirkulär pelott.

MR960 ERIXTWO

erixtwo

MR940 ERIXTHREE



erixthree

MR940

ErixThree

Utvecklad för patienter med subluktionsproblem, vid exempelvis stroke eller neurologiska sjukdomar, som behöver hjälp att lyfta och hålla axelleden på plats.

ErixThree® är ett patenterat system. Axelortosen är förstärkt och försedd med silikon på insidan som gör det möjligt att simulera funktionen av SIT-muskulaturen för att dra tillbaka axeln i ett säkrat posterioort läge. Ortosen hjälper till att både ge axelleden ett lyft samt posterior stabilitet. För att ge ytterligare suspension av axelleden kan separata okband användas för att stabilisera och lyfta axelleden individuellt. Okbandet ger en mycket effektiv suspension och lyft av axelleden och kan anpassas individuellt med hjälp av de två medföljande längderna. Vid extremt stora axlar eller när maximal effekt behövs kan det kortare okbandet användas ovanpå det längre och ger då dubbel effekt. ErixThree® är tillverkad i maxiperforerad NeoTex som ger en mycket bra ventilation av huden. Detta gör det möjligt att bära ortosen under längre tid utan att den blir varm. Bandet som går under armen är microperforerad för bra ventilation och hög komfort. Er-

ixThree® kan också användas som en enklare basortos för axelleden och sedan stabiliseras individuellt med hakkardborrbanden som medföljer för en tejpliknade-effekt. Detta kan vara ett mycket attraktivt alternativ för patienter med känslig hud som inte klarar av vanlig- eller kinesiotejp.

INDIKATIONER Anterior subluktion av axelleden efter stroke eller neurologisk sjukdom, instabilitet av axelleden efter trauma eller vid behov av stabilitet och avlastning av axelleden.

MR940 ERIXTHREE, HÖ/VÄ

Storlek	Omkretsmått, överarm/biceps
X-	24-28 cm
Small	28-32 cm
Medium	32-35 cm
Large	35-38 cm
X-Lar-	38-42 cm

Finns i höger- och vänsterutförande.

Det flexibla setet gör det möjligt att ytterligare avlasta axelleden tillsammans med ErixThree®. Setet kan inte användas utan axelortosen och består av två armband som fästs på ortosen och som sedan bär armen. För att minska risken för tryck över armen finns en armvagg med thermoplast som formas individuellt över underarmen. Thermoplasten läggs sedan i fickan som hjälper till att tryckavlasta ytterligare. Armen kan då enkelt bäras lättare och på det sättet avlasta axeln. För att förhindra att armbågen glider ur finns ett säkringsband som kan appliceras på banden närmast armbågen. Setet är modult och kan enkelt anpassas för de flesta storlekar. Fungerar både för höger och vänster.

MR941 ERIXTHREE® ARM-SLING KIT

Storlek: Universal, fungerar både för höger och vänster.





EU515 Mjuk halskrage

Mjuk halskrage i polyesterskum klädd med bomullstrikå för bästa form och passform. Idealisk att använda då ett lätt stöd behövs. Kardborrknäppning för enkel applicering. **INDIKATION** Avlastning för nacke och halskotpelare vid lindrigare besvär.

EU515 Mjuk halskrage

Höjd	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm
Längd	Universal			



EU520 Halskrage modell stabil

Mjuk halskrage förstärkt med en extra stabiliserande plasticskena för optimal avlastning och stabilitet vid nackproblem. Kragen är anatomiskt anpassad för bra komfort. **INDIKATION:** Överbelastningsskador av nackmuskulaturen, överrörlighet eller generell stabilisering.

EU520 Halskrage modell stabil

Höjd	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm
Längd	Universal			



Philadelphia-kragen

Philadelphia-kragen är utformad för att fixera och avlasta nacke och halskotpelare. Kragen är tillverkad i Plastazote med plastförstärkningar för hakan och nacken. Det integrerade hakstödet med öppning för trachea samt den anatomiska utformningen ger bra immobilisering och hög patientkomfort. **INDIKATIONER:** Fixering vid akuta skador, postoperativt.

1024 1034 1044 1054 Philadelphia-kragen

Storlek	Small	Medium	Large	
Omfång, cm	25-31	31-36	36-41	
Höjd/Art.nummer	6 cm/1024	8 cm/1034	11 cm/1044	13 cm/1054

1023-01 Philadelphia-krage Infant

Omkrets, cm	15-20
Höjd, mm	32

1023-00 Philadelphia-krage Child

Omkrets, cm	20-28
Höjd, mm	45



ALLA PRODUKTER PÅ

MEDIROYAL.SE

1044-8 StatNeck akutkrage

Denna akutkrage är tillverkad i vit polypropylen med ett foder i plastazote. Kragen är utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna immobilisera nacken vid exempelvis traumatiska skador då rörelse kan vara kritiskt. Kragen har ett integrerat hakstöd och anatomisk form för optimal stabilitet. **INDIKATIONER:** Fixering vid akuta skador.

1044-8 StatNeck akutkrage

Storlek	XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkrets, cm	44,5	44,5	56	56	56	56
Höjd, cm	4	4,5	4,5	6,5	7,5	9




1130100 Deroyal XTW Boa® krage

Boa®-systemet har designats så att kragen kan justeras i höjddled helt steglöst. Detta gör att kragen kan anpassas till i stort sett vilken patient som helst. Anpassningen görs enkelt med Boa®-disken som sedan säkras genom att trycka in den. För att ytterligare förhindra att patienten själv gör justeringen finns en låsring som appliceras över disken. Kragen har en stor trachea-öppning, tryckavlastande och fukttransporterande polstring och ett bakstycke designat med flexibla vingar för att minska risken för tryck samt över sternum en extra bred och flexibel vinge för att avlasta tryck. DeRoyal XTW powered by Boa® Technology är framtagen i en universalstorlek. Kan beställas med ett extra set av D-tex® polstring inkluderat eller separat. Cervikal instabilitet efter trauma, cervikal spinal stenos, cervikal spondylos, degenerativa sjukdomar, whiplash eller vid diskbråck i halskotpelaren.

1130100 Deroyal XTW Boa® krage

1130100	DeRoyal XTW Boa krage
1130200	DeRoyal XTW Boa krage med ett extra set av D-tex polstring
1130300	D-tex polstring, 1 set

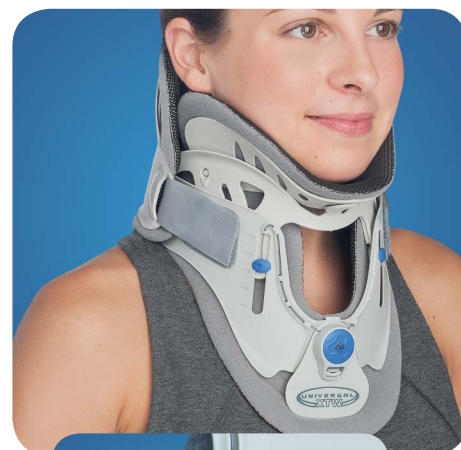

1120 XTW-krage

En nackkrage utvecklad för långtidsimmobilisering. Ger bra stabilitet i flexion, extension, lateral böjning och axial rotation. Kragen har flex-zoner både framtill och baktill för att minska risken för tryck och öka komforten. Skummaterialet i kragen är latexfritt. Levereras med ett extra set med polstring. Finns i fem storlekar. Måttet tas från mitten av käkbenet till trapezius.



XTW-krage vuxen

Storlek	X-kort	Kort	Standard	Hög	X-Hög
Nackhöjd, mm	- 6	6-16	16-32	32-47	47-

XTW-krage barn

Storlek	Infant, kort	Infant, standard	Barn, liten	Barn, kort	Barn, standard
Ålder	1-8 månader	9-24 månader	1-3 år	2-5 år	3-6 år
Kroppslängd, cm	53-83	73-94	83-101	89-114	94-122




3001 Nyckelbensbandage med spänne

På ett enkelt och effektivt sätt stabiliserar bandaget nyckelben och axelled. De polstrade banden och ryggplattan ger god tryckavlastning. Bandaget är tillverkat i ett icke absorberande material vilket medför att patienten kan sköta sin hygien utan att behöva ta av bandaget.

3001 Nyckelbensbandage med spänne

Storlek	Infant	Barn	Small/Medium	Medium	Large	X-Large
Omfång, cm	68-84*	92-116*	56-68	68-78	78-88	88-100

SÅ TAR DU RÄTT MÅTT: Starta mitt i mellan skulderbladen, under armhålan, runt axeln och tillbaka. Ligger patienten på gränsen till en annan storlek, ta de mindre storleken. *Mått: Tas som en åtta runt båda axlarna.

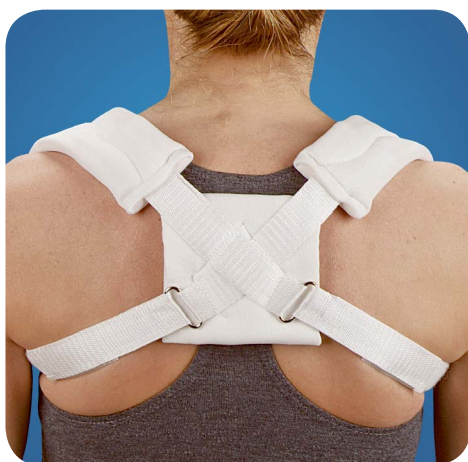

3002 Nyckelbensbandage

Ett smidigt och stabilt bandage för stabilisering av nyckelben och axel. Banden är polstrade och ryggplattan ger en bra tryckavlastning. Polstringsmaterialet är tillverkat i skum med slutna celler vilket gör att vätska inte absorberas. Det gör att patienten kan duscha utan att behöva ta av bandaget. Justering med kardborre gör ortosen mer flexibel i storleksomfång.

3002 Nyckelbensbandage

Storlek	Infant	Barn	Small	Medium	Large	X-Large
Omfång, cm	68-84*	92-116*	56-68	68-78	78-88	88-100

SÅ TAR DU RÄTT MÅTT: Starta mitt i mellan skulderbladen, under armhålan, runt axeln och tillbaka. Ligger patienten på gränsen till en annan storlek, ta de mindre storleken. *Mått: Tas som en åtta runt båda axlarna.



8010 Nyckelbensbandage

Ett smidigt och stabilt bandage för stabilisering av nyckelben och axel. Banden är polstrade och ryggplattan ger en bra tryckavlastning. Polstringsmaterialet är tillverkat i skum med slutna celler vilket gör att vätska inte absorberas. Det gör att patienten kan duscha utan att behöva ta av bandaget. Justering med kardborre gör ortosen mer flexibel i storleksomfång. Skyddet kan användas för både höger och vänster axel.

8010 Nyckelbensbandage

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large
Omkretsmått överarm, cm	24-28	28-32	32-35	35-38



8011 Axelskydd

Anatomiskt axelskydd med justeringsband som medger korrigering av rörelse. Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och stabilitet. Skyddet kan användas för både höger och vänster axel.

8011 Nyckelbensbandage

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Omkretsmått överarm, cm	24-28	28-32	32-35	35-38	38-41

8004 Armslinga special

Den här armslingan är tillverkad av ett slitstarkt bomulls-material. De justerbara D-ringarna förenklar appliceringen och den medföljande reglerbara axelplattan ger bra tryckavlastning. Tumbandet motverkar att handleden faller ned. Vid rätt applicering skall armbågsleden avlastas i 90° vinkel. Mät från mitten av armbågsleden till lillfingerknogen (MCP 5).

8004 Armslinga special

Storlek	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
Avstånd, cm	23-28	28-33	33-40	40-51	51



1169 Armslinga premium

Tillverkad av ett slitstarkt bomullsmaterial. Fickan är djup för säker placering av armbåge och arm. Barnstorlekarna har en annan färg med figurer på. De justerbara D-ringarna gör appliceringen enkel. På bandet finns en justerbar polstring för tryckavlastning. Tumbandet motverkar att handleden faller ned. Vid korrekt applicering skall armbågsleden avlastas i 90 graders vinkel.

1169 Armslinga special

Storlek	Infant	Barn	Small	Medium	Large	X-Large
Fickans mått, cm	-18	18-23	23-28	28-33	33-40	40-51



9012 Arm/axel-Immo

Designad för att stödja och immobilisera arm/axel på ett effektivt sätt. Midjebandet är tillverkat i ett ventilerande skummaterial med hög komfort. Arm- och handbanden fästs med kardborre. INDIKATIONER: Avlastning eller immobilisering av arm eller axelled.

9012 Arm/axel-Immo

Universal storlek.



4442 Armslinga, extra stabiliserande armlinda

Denna armslinga ger i kombination med det medföljande bandet en mycket bra stabilisering av arm och axel. Armslingan är tillverkat i ett perforerat skummaterial för bra komfort och ventilation.

4442 Armslinga, extra stabiliserande armlinda

Armslingan är universal och går att använda för höger och vänster.





1165 Axelabduktionskudde

Tillverkad i ett skummaterial med slutna celler och låg vikt. Kudden har en anatomisk design och ett bomullsöverdrag närmast kroppen som enkelt kan tvättas. Den kan ge antingen 55 eller 70 graders abduction och fästs mot kroppen med bröstbandet. Arm-manschetterna gör att armen fixeras effektivt.

1165 Axelabduktionskudde

Storlek	Small	Medium	Large
Kuddens mått, cm	63x60	75x68	77x91



1163 Shoulder P.A.D. II

Tillverkad av ett textilmaterial med kardborrefunktion som gör den helt anpassningsbar och justerbar. Fickan kan justeras så att armen låses effektivt. Höftbandet har ett snabbspänne för att förenkla applicering. Skumblocket ger en 35 gradig abduction i axelleden. Levereras med en handträningsboll för att förhindra svullnad under immobiliseringen.

1163 Shoulder P.A.D. II

Storlek	Small	Medium	Large
Fickans höjd/längd, cm	18x40	18x43	18x46



ALLA PRODUKTER PÅ

MEDIROYAL.SE

mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic