
Brugsanvisning og garanti til
MINI-VIBRATIONSMASSAGER

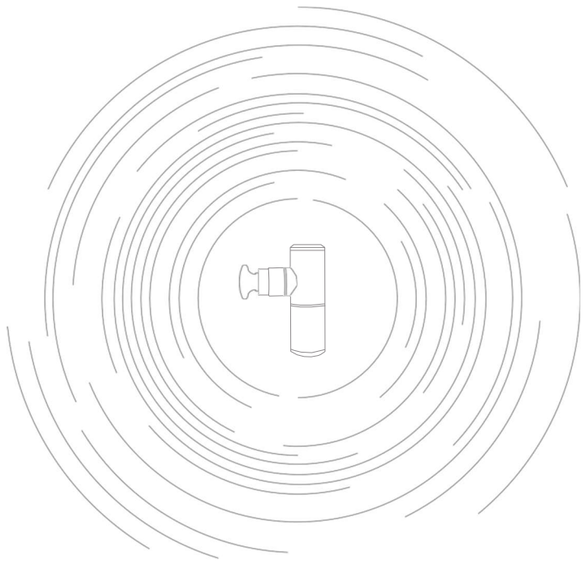

Instruktionsnummer:
051/2022/2 Udgivelsesdato:
5.08.2024

PRODUCENT: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co., LTD,
NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road,
Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTØR: HABYS Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło
PL, www.habys.com

Betingelser for sikker brug.

1. For at undgå risiko for elektrisk stød, brand eller personskade skal produktet anvendes i overensstemmelse med følgende retningslinjer:
   a) Må ikke nedsænkes i vand. Holdes væk fra væsker og varmekilder. Beskyt ventilationsåbningerne mod støv og snavs.
   b) Skru ikke skruerne ud, og adskil ikke enheden i dele.
   c) Brug ikke apparatet uafbrudt i mere end en time. Vent 30 minutter, før det tages i brug igen.
   d) Enheden er udelukkende beregnet til brug af voksne.
   e) Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares utilgængeligt for børn.
   f) Brug ikke apparatet på følgende kropsdele: kønsorganer, ansigt, øjne, operationssår, inficeret eller såret hud, beskadigede knogler eller led.
   g) Anvend kun på ren, tør hud ved let at trykke og bevæge apparatet hen over huden i ca. 60 sekunder pr. område.
   h) I tilfælde af smerter eller andet ubehag skal brugen straks afbrydes.
   i) Oplad kun med den originale strømforsyning.
   j) Strømforsyningen må kun bruges til at oplade enheden og må ikke anvendes til andre formål.
   k) Brug ikke andre strømforsyninger til at oplade enheden.
2. Brug ikke massageapparater eller andre vibrationsapparater uden lægens tilladelse i følgende tilfælde: graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller skader på øjets nethinde, brug af pacemaker, nylig gennemgået operation, epilepsi, migræne, diskusprolaps, spondylolisthesis, spondylose, spondylolyse, nyligt udført leudskiftning, spiral, metalstænger eller -plader.
3. Svage personer og børn bør overvåges af en voksen, når apparatet anvendes.
4. Ovenstående kontraindikationer betyder ikke, at det er forbudt at bruge massageapparatet, men vi anbefaler, at man først konsulterer en læge.

Tekniske data.

Batteri: Lithium-ion 2500 mAh
Effekt: 20 W
Oplader: -kabel USB -type C Motor: børsteløs Antal hastighedsniveauer : 4
Hastighedsområde: 1800 – 3200 o/min
Vibrationsamplitude : 7,5 mm Mål: 113 mm x 135 mm x 45 mm Nettovægt: 0,7 kg

Udpakning og første brug.

1. Indhold i pakken:
   a) vibrationsmassager
   b) 6 udskiftelige massagedyser
   c) opladerkabel
   d) brugsanvisning
   e) 1 etui
2. Udpakning. Fjern alle beskyttelseselementer fra forsendelseskassen. Læs denne brugsanvisning og alle sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug.
3. Oplad enhedens batteri fuldt ud inden første brug.

Brugsanvisning.

1. **Opladning.**
   a) Oplad batteriet fuldt ud, før du bruger enheden for første gang.
   b) Under opladning lyser indikatorlampen rødt, og de blå hastighedsindikatorlamper begynder at blinke. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatorlampen farve til grøn.
   c) Det tager ca. 3 timer at oplade batteriet fuldt. Enhedens driftstid ved højeste hastighed er ca. 8 timer.
   d) Når batteriniveauet falder til under 10 %, begynder den røde LED at blinke. Enheden skal da oplades.
   e) Af sikkerhedsmæssige årsager må enheden ikke bruges under opladning.
   f) For at sikre en lang levetid skal enheden oplades, når

den røde LED begynder at blinke.

2. **Udskiftning af massagehoveder.**
   a) Indsatserne skal fjernes, når apparatet er slukket, ved at trække i dem og dreje dem let.
   b) Indsæt påsætningerne, når apparatet er slukket, ved at trykke dem fast, indtil de sidder på plads.
3. **Tænd/sluk.**
   a) Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at tænde enheden.
   b) Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at slukke for enheden.
4. **Hastighedsjustering.**
   a) Niveau 1 er standardindstillingen, når enheden tændes.
   b) Hvert tryk øger hastigheden til det næste niveau.
   c) Når hastigheden når niveau 4, skal du trykke endnu en gang for at vende tilbage til niveau 1.

   Bemærk: Enheden er udstyret med en 10-minutters driftstæller for at undgå skader på muskler og bindevæv forårsaget af overdreven massage.
5. **Statusindikator.**
   a) Hastighedsindikatoren viser vibrationshastigheden.
   b) Niveau 1 er standardindstillingen, når enheden tændes.
   c) Hastigheden ændres ved hvert kort tryk, sekventielt og cyklisk.


NIVEAU 1	1800 o/min
NIVEAU 2	2100 o/min
NIVEAU 3	2500 o/min
NIVEAU 4	3200 omdr./min

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.

Rengør med et let fugtigt håndklæde og tør efter med en blød klud. Brug ikke alkohol eller alkoholholdige rengøringsmidler. Der må kun anvendes en lille mængde neutralt rengøringsmiddel til rengøring af apparatet.
Indsæt tilbehørsdele, når apparatet er slukket, ved at trykke dem fast, indtil de sidder godt fast.
Undgå, at der trænger væsker ind i apparatet.

Udskiftelige hoveder.

1. Rund – til massage af hele kroppen, f.eks. hænder og fodsåler.
2. Flad – afslapning og formning af hele kroppen.
3. Kegleformet – til dyb, punktvis stimulering af meridianerne.
4. Gaffelformet – til nakke, skuldre og sener.
5. Fladt opvarmningshoved – til massage af bl.a. nakke-, skulder-, ryg-, over- og underarms- samt hoftemuskler med ekstra opvarmningsfunktion (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
6. Fladt mundstykke med gelindlæg – blødt gelpude til generel massage med ekstra kølefunktion (efter at mundstykket er blevet afkølet i køleskabet).

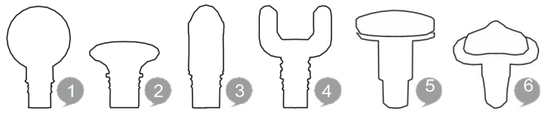

Garantibetingelser.

1. I dette dokument forstås ved:
   a) »Producenten« betegner HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hjemsted i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, indført i virksomhedsregistret, der føres af distriktsretten i Rzeszów, XII. Økonomiske Afdeling af det nationale retsregister, med tildelt KRS-nummer: 0000513317, med en aktiekapital på 10.750.000 zloty (ord: ti millioner syv hundrede og halvtreds tusind zloty), hvor kapitalen er fuldt indbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) »Køber« betegner den endelige køber af udstyr fremstillet af Producenten, herunder både forbrugere og erhvervsdrivende.
   c) »Distributør« betegner en enhed, der på grundlag af en aftale med Producenten sælger Udstyret i et afgrænset område.
   d) »Autoriseret serviceværksted« betyder udelukkende et serviceværksted, der drives af producenten, eller et serviceværksted, der er udpeget af producenten og drives af dennes distributør,
   e) »Udstyr« betegner en løsøregenstand, der er fremstillet af producenten, som er genstand for købsaftalen, og som er omfattet af den pågældende garanti.
2. Producenten garanterer god kvalitet og problemfri funktion af det udstyr, som dette garantibevis er udstedt for, i en periode på 1 år.
3. Garantiomfattet reparation omfatter ikke de handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som køberen selv er forpligtet til at udføre (montering af udstyret, vedligeholdelse af udstyret osv.).
4. Garantien dækker kun fejl, der skyldes årsager, der ligger i selve udstyret. Garantien dækker især ikke skader, der er opstået som følge af forkert eller ikke i overensstemmelse med brugsanvisningen foregående brug, opbevaring, vedligeholdelse eller transport af udstyret, samt farveforskelle mellem dele, der har været udsat for og ikke har været udsat for solstråling, påvirkning af kemiske eller slibende midler, luftforurening eller utilsigtede huller og slidmærker, forekomsten af pletter eller ringe efter fedtede eller farvende stoffer (fedt, cremer, balsam eller olier), permanent farvning med farvestoffer såsom blæk, permanente markører eller andre ikke-permanente farvestoffer, der anvendes i tøjproduktion (f.eks. farvestoffer, der anvendes til fremstilling af tøj af typen blå jeans).
5. Garantien dækker ikke mekaniske skader på udstyret.
6. Køberen mister sine rettigheder i henhold til garantien i følgende tilfælde:
   a) hvis producenten konstaterer, at udstyret i garantiperioden er blevet repareret uden for et autoriseret værksted,
   b) hvis der er foretaget konstruktionsmæssige ændringer på udstyret uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten,
   c) hvis udstyret anvendes i strid med dets tilsigtede formål,
   d) anvendelse af udstyret efter, at der er konstateret en konstruktionsfejl i det.
7. Uafhængigt af tabet af garantirettighederne, som beskrevet ovenfor i punkt 6, påtager producenten sig heller ikke noget ansvar for skader på ejendom eller skader påført tredjemand, som kan skyldes brugen af det udstyr, der er omfattet af garantien.
8. Garantien udelukker eller begrænser ikke de rettigheder, der følger af garantien for mangler. Udøvelsen af rettighederne i henhold til garantien påvirker ikke sælgerens ansvar i henhold til garantien for mangler. Hvis køberen udøver sine rettigheder i henhold til garantien, suspenderes fristen for udøvelse af rettighederne i henhold til garantien for mangler fra den dag, hvor producenten underrettes om manglen. Fristen løber videre fra den dag, hvor producenten nægter at opfylde sine forpligtelser i henhold til garantien, eller hvor fristen for opfyldelse heraf er udløbet uden resultat.
9. Garantidækningen er begrænset til det land, hvor udstyret blev solgt.
10. Producenten vil opfylde sine forpligtelser i henhold til garantien (afhjælpning af mangler eller konstruktionsskader på udstyret, der skyldes årsager, der ligger i udstyret selv, og som er blevet afsløret i garantiperioden) gratis inden for 14 dage fra den dato, hvor udstyret blev leveret til producenten eller et autoriseret servicecenter. Hvis reparationen af udstyret ikke kan udføres inden for den ovenfor angivne frist, underretter producenten køberen herom og angiver årsagerne til forsinkelsen samt den forventede frist for opfyldelse af det anerkendte garantikrav.
11. For at kunne gøre brug af garantibestemmelserne skal følgende fire betingelser være opfyldt samlet (kumulativt):
    a) fremvisning af en momsfaktura, en kvittering eller et andet købsbevis for udstyret fra køberens side samt fotografisk dokumentation af det defekte udstyr ledsaget af en kort beskrivelse af årsagerne til garantikravet,
    b) anmeldelse af fejlen inden for 14 (fjorten) dage efter, at den er blevet opdaget,
    c) levering af udstyret i den originale emballage på producentens regning til den adresse, der er angivet ovenfor i garantibeviset, eller til adressen på det autoriserede servicecenter,
    d) angivelse af det sted, hvor producenten skal levere udstyret efter reparation (begrænset til det land, hvor udstyret blev købt).
12. Garantiperioden forlænges med reparationsperioden, regnet fra den dag, hvor udstyret blev afleveret til producenten eller det autoriserede servicecenter, til den dag, hvor udstyret blev returneret til køberen.
13. Det påhviler producenten eller det autoriserede servicecenter at fastlægge omfanget og fremgangsmåden for reparationen af udstyret.
14. Garantien er begrænset til reparation af udstyret. Producenten forbeholder sig retten til at udskifte udstyret med et fejlfrit eksemplar, hvis reparationsomkostningerne overstiger den pris, der er angivet på købsbeviset. Køberen har ikke ret til at kræve udskiftning af udstyret med et nyt inden for garantien. Garantien dækker især ikke ansvar for tab eller skader, som køberen måtte lide som følge af, at han er blevet frataget muligheden for at benytte udstyret.
15. Producenten påtager sig ikke ansvar for skader på udstyret, der opstår under transporten udført af transportvirksomheden, indtil udstyret er modtaget af producenten fra transportvirksomheden.
16. Hvis forsendelsen af udstyret er blevet bestilt af producenten, er det køberens pligt at kontrollere udstyrets tekniske tilstand ved modtagelsen. Hvis køberen konstaterer, at forsendelsen eller det udstyr, der befinder sig i den, er blevet beskadiget, skal køberen:
    a) straks, senest inden for 3 dage fra modtagelsesdatoen, underrette producenten om eventuelle skader på udstyret, der er opstået under transporten, for at give producenten mulighed for at indgive en reklamation til transportvirksomheden og gøre de dermed forbundne krav gældende,
    b) levere en reklamationsrapport, der er udfærdiget mellem køberen og transportvirksomheden, til producenten.
17. Garantibestemmelserne i dette dokument udgør de eneste og eksklusive garantibestemmelser for produkter fra HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.