
Bruksanvisning og garanti for MINI-VIBRASJONSMASSASJER

HABYS®

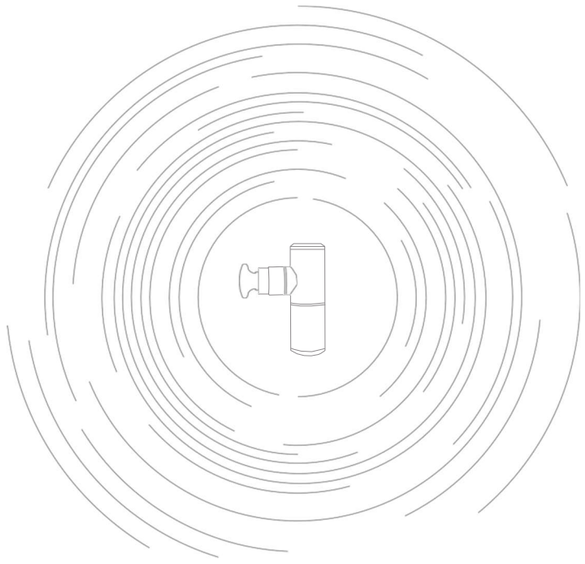

CE

Instruksjonsnummer:
051/2022/2 Utgivelsesdato for instruksjonen: 5.08.2024

PRODUSENT: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co,. LTD, NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road, Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTØR: HABYS Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło PL, www.habys.com

Vilkår for sikker bruk.

1. For å unngå fare for elektrisk støt, brann eller personskader må produktet brukes i henhold til følgende retningslinjer:
   a) Ikke senk den ned i vann. Hold den unna væsker og varmekilder. Beskytt ventilasjonsåpningene mot støv og smusspartikler.
   b) Ikke skru ut skruene, og ikke demonter enheten.
   c) Ikke bruk enheten kontinuerlig i mer enn en time. Vent 30 minutter før du bruker den igjen.
   d) Enheten er kun beregnet for bruk av voksne.
   e) Holdes utenfor barns rekkevidde. Oppbevares utilgjengelig for barn.
   f) Ikke bruk apparatet på følgende kroppsdeler: kjønnsorganer, ansikt, øyne, operasjonssår, infisert eller skadet hud, skadede bein eller ledd.
   g) Bruk kun på ren, tørr hud ved å trykke lett og bevege apparatet over huden i ca. 60 sekunder på hvert område.
   h) Ved smerter eller annet ubehag må bruken avbrytes umiddelbart.
   i) Lad kun med den originale strømforsyningen.
   j) Strømforsyningen skal kun brukes til å lade enheten; den skal ikke brukes til andre formål.
   k) Ikke bruk andre strømforsyninger til å lade enheten.
2. Ikke bruk massasjeapparatet eller andre vibrasjonsapparater uten å ha fått tillatelse fra lege i følgende tilfeller: graviditet, diabetes med komplikasjoner som nevropati eller skade på øyets netthinne, bruk av pacemaker, nylig gjennomført operasjon, epilepsi, migrene, skiveprolaps, spondylolistese, spondylose, spondylolyse, nylig gjennomført leddproteseoperasjon, spiral, metallstenger eller -plater.
3. Svake personer og barn bør være under oppsyn av en voksen når de bruker apparatet.
4. Ovennevnte kontraindikasjoner innebærer ikke et forbud mot bruk av massasjeapparatet, men vi anbefaler likevel å konsultere lege på forhånd.

Spesifikasjoner.

Batteri: Litium-ion 2500 mAh
Effekt: 20 W
Lader: -kabel USB -type C Motor: uten børster Antall hastighetsnivåer : 4 Hastighetsområde: 1800 – 3200 o/min Vibrasjonsamplitude : 7,5 mm Dimensjoner: 113 mm x 135 mm x 45 mm Nettovekt: 0,7 kg

Utpakking og første bruk.

1. Innhold i esken:

a) vibrasjonsmassasjeapparat
   b) 6 utskiftbare massasjehoder
   c) ladekabel
   d) bruksanvisning
   e) 1 etui
2. Utpakking. Fjern alle sikkerhetskomponenter fra forsendelsesesken. Les denne bruksanvisningen og alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før bruk.
3. Lad enhetens batteri helt opp før første bruk.

Brukerveiledning.

1. **Lading.**
   a) Før første bruk må batteriet lades opp helt.
   b) Mens batteriet lades, lyser indikatoren rødt, og de blå indikatorene for hastighetsnivå begynner å blinke. Når batteriet er fulladet, skifter indikatoren farge til grønt.
   c) Det tar omtrent 3 timer å lade batteriet fullt opp. Enheten har en driftstid på omtrent 8 timer på høyeste hastighetsnivå.
   d) Når batterinivået faller under 10 %, begynner den røde LED-lampen å blinke. Enheten må da lades opp.
   e) Av sikkerhetshensyn bør du ikke bruke enheten mens den lades.
   f) For å sikre lang levetid bør enheten lades når

den røde LED-lampen begynner å blinke.

2. **Utskifting av massasjehoder.**
   a) Massasjehodene skal fjernes når enheten er slått av, ved å trekke og vri dem lett.
   b) Hodene skal settes på når enheten er slått av, ved å trykke dem godt inn til de sitter fast.
3. **Slå på / Slå av.**
   a) Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder for å slå på enheten.
   b) Trykk og hold inne knappen i 3 sekunder for å slå av enheten.
4. **Hastighetsjustering.**
   a) Nivå 1 er standardinnstillingen når enheten slås på.
   b) Hvert trykk øker hastigheten til neste nivå.
   c) Når hastigheten når nivå 4, trykk én gang til for å gå tilbake til nivå 1.
   Merk: Enheten er utstyrt med en 10-minutters driftstimer for å unngå skader på muskler og fascia forårsaket av overdreven massasje.
5. **Statusindikator.**
   a) Hastighetsindikatoren viser vibrasjonshastigheten.
   b) Nivå 1 er standardinnstillingen når enheten slås på.
   c) Hastigheten endres ved hvert kort trykk, sekvensielt og syklisk.


NIVÅ 1	1800 o/min
NIVÅ 2	2100 o/min
NIVÅ 3	2500 o/min
NIVÅ 4	3200 o/min

Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring.

Rengjør med et lett fuktig håndkle, og tørk av med en myk klut. Ikke bruk alkohol eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Det er kun tillatt å bruke en liten mengde nøytralt vaskemiddel til rengjøring av enheten.
Sett på hylsene når enheten er slått av, og trykk dem godt inn til de sitter fast.
Unngå at væsker trenger inn i apparatet.

Utskiftbare hoder.

1. Rund – til massasje av hele kroppen, f.eks. hender og underdelen av foten.
2. Flat – avslapning og modellering av hele kroppen.
3. Kuleformet – til dyp, punktvis stimulering av meridianene.
4. Gaffelformet – til nakke, skuldre og sener.
5. Flat oppvarmingsdyse – til massasje av muskler, blant annet i nakke, skuldre, rygg, armer og ben samt hoftemuskulaturen, med ekstra oppvarmingsfunksjon (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
6. Flat dyse med gelinnsats – myk gelpute for generell massasje med ekstra kjølefunksjon (etter at dysen er avkjølt i kjøleskapet).

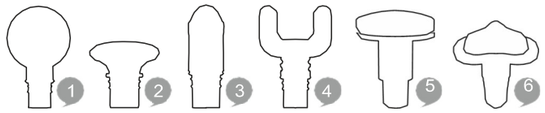

Garantibetingelser.

1. I dette dokumentet forstås:
   a) «Produsenten» betyr HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hovedkontor i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, oppført i foretaksregisteret som føres av distriktsretten i Rzeszów, XII. avdeling for økonomiske saker i det nasjonale rettsregisteret, med tildelt KRS-nummer: 0000513317, med en aksjekapital på 10 750 000 zloty (i ord: ti millioner syv hundre og femti tusen zloty), hvor kapitalen er fullt innbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) «Kjøper» betyr den endelige kjøperen av utstyr produsert av produsenten, herunder både forbrukere og næringsdrivende.
   c) «Distributør» betyr en enhet som, på grunnlag av en avtale med produsenten, selger utstyret i et angitt område.
   d) «Autorisert serviceverksted» betyr utelukkende et serviceverksted som drives av produsenten eller et serviceverksted som er angitt av produsenten og drives av dennes distributør,
   e) «Utstyr» betyr en løsøregenstand produsert av produsenten, som er gjenstand for en salgskontrakt og som omfattes av den aktuelle garantien.
2. Produsenten garanterer god kvalitet og feilfri drift av utstyret som dette garantibeviset gjelder for, i en periode på 1 år.
3. Garantiarbeid omfatter ikke tiltak som er beskrevet i bruksanvisningen, og som kjøperen er forpliktet til å utføre selv (montering av utstyret, vedlikehold av utstyret osv.).
4. Garantien dekker kun feil som skyldes mangler ved selve utstyret. Garantien dekker særlig ikke skader som oppstår som følge av feilaktig bruk eller bruk i strid med bruksanvisningen, feil lagring, vedlikehold eller transport av utstyret, samt fargeforskjeller mellom deler som er utsatt og ikke utsatt for solstråling, påvirkning av kjemikalier eller slipemidler, luftforurensning eller utilsiktede hull og slitasje, forekomst av flekker eller ringer etter fete eller fargende stoffer (fett, kremer, balsam eller oljer), varig farging med fargestoffer som blekk, permanente tusjer eller andre ikke-varige fargestoffer brukt i klesproduksjon (f.eks. fargestoffer brukt til å fremstille klær som blå jeans).
5. Garantien dekker ikke mekaniske skader på utstyret.
6. Kjøperen mister sine rettigheter i henhold til garantien i følgende tilfeller:
   a) hvis produsenten konstaterer at utstyret i garantiperioden har blitt reparert utenfor et autorisert serviceverksted,
   b) det er foretatt konstruksjonsmessige endringer på utstyret uten forhåndsgodkjenning fra produsenten,
   c) bruk av utstyret på en måte som ikke er i samsvar med dets tiltenkte formål,
   d) bruk av utstyret etter at en konstruksjonsfeil har blitt oppdaget.
7. Uavhengig av tapet av garantirettigheter, som beskrevet ovenfor i punkt 6, påtar produsenten seg heller ikke ansvar for skader på eiendom eller skader påført tredjeparter som kan skyldes bruk av utstyret som er omfattet av garantien.
8. Garantien utelukker eller begrenser ikke rettighetene som følger av garantien for mangler. Utøvelse av rettighetene i henhold til garantien påvirker ikke selgerens ansvar i henhold til garantien for mangler. Dersom kjøperen utøver sine rettigheter i henhold til garantien, suspenderes fristen for å utøve rettighetene i henhold til garantien for mangler fra den dagen produsenten blir underrettet om mangelen. Fristen løper videre fra den dagen produsenten nekter å oppfylle sine forpliktelser i henhold til garantien, eller fra den dagen fristen for oppfyllelse av disse forpliktelsene utløper uten at de er oppfylt.
9. Garantidekningen er begrenset til det landet der utstyret ble solgt.
10. Produsenten skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til garantien (å utbedre feil eller skader på utstyrets konstruksjon som skyldes årsaker som ligger i selve utstyret og som er oppdaget i garantiperioden) kostnadsfritt innen 14 dager fra datoen for levering av utstyret til produsenten eller et autorisert serviceverksted. Dersom reparasjonen av utstyret ikke kan utføres innen den ovennevnte fristen, skal produsenten informere kjøperen om dette, samt oppgi årsakene til forsinkelsen og den forventede fristen for gjennomføring av det godkjente garantikravet.
11. For å kunne gjøre krav på garantien må fire vilkår være oppfylt samlet (kumulativt):
    a) fremvisning av en momsfaktura, kvittering eller annet kjøpsbevis for utstyret fra kjøperen, samt fotografisk dokumentasjon av det defekte utstyret sammen med en kort beskrivelse av grunnene til garantikravet,
    b) feilen må meldes innen 14 (fjorten) dager etter at den ble oppdaget,
    c) levering av utstyret i originalemballasjen på produsentens bekostning, til adressen angitt ovenfor i garantibeviset eller til adressen til et autorisert serviceverksted,
    d) angivelse av hvor produsenten skal levere utstyret etter at det er reparert (begrenset til det landet hvor utstyret ble kjøpt).
12. Garantiperioden forlenges med reparasjonstiden, regnet fra den dagen utstyret ble levert til produsenten eller et autorisert serviceverksted, til den dagen utstyret ble returnert til kjøperen.
13. Det er produsentens eller det autoriserte serviceverkstedets ansvar å fastsette omfanget og måten reparasjonen av utstyret skal utføres på.
14. Garantien er begrenset til reparasjon av utstyret. Produsenten forbeholder seg retten til å bytte ut utstyret mot et feilfritt eksemplar dersom reparasjonskostnadene overstiger prisen på utstyret som fremgår av kjøpsbeviset. Kjøperen har ikke rett til å kreve utskifting av utstyret mot et nytt innenfor rammen av garantien. Garantien omfatter særlig ikke ansvar for tap eller skader som oppstår hos kjøperen i forbindelse med at han eller hun fratas muligheten til å benytte utstyret.
15. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader på utstyret som oppstår under transporttjenesten utført av transportøren, frem til det tidspunktet produsenten mottar utstyret fra transportøren.
16. Dersom forsendelsen av utstyret ble bestilt av produsenten, er kjøperen forpliktet til å kontrollere utstyrets tekniske tilstand ved mottak. Dersom kjøperen konstaterer at forsendelsen eller utstyret i den er skadet, skal kjøperen:
    a) umiddelbart, senest innen 3 dager fra mottaksdatoen, underrette produsenten om eventuelle skader på utstyret som oppstod under transporten, slik at produsenten kan fremme en reklamasjon overfor transportøren og gjøre gjeldende eventuelle krav i forbindelse med dette,
    b) levere en reklamasjonsrapport til produsenten, utarbeidet mellom kjøperen og transportøren.
17. Garantibestemmelsene i dette dokumentet er de eneste og utelukkende garantibestemmelsene for produktene fra HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.