
Bruksanvisning och garanti för
MINI-VIBRATIONSMASSAGER

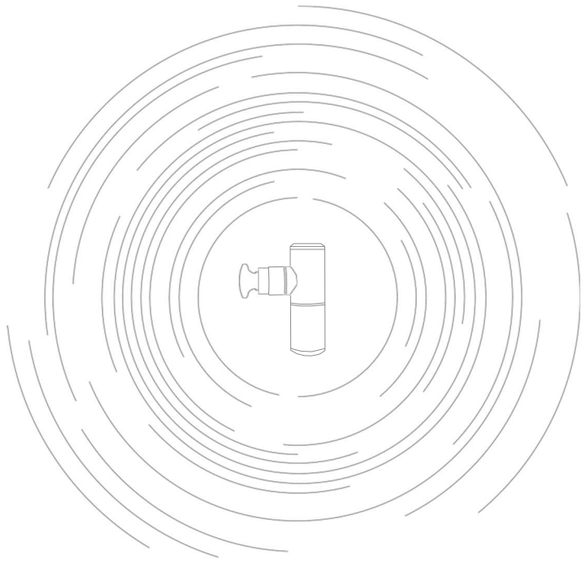

Instruktionsnummer:
051/2022/2 Utfärdandedatum: 5 augusti 2024

TILLVERKARE: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co,. LTD, NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road, Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTÖR: HABYS Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło PL, www.habys.com

Villkor för säker användning.

1. För att undvika risk för elchock, brand eller personskada måste produkten användas enligt följande anvisningar:
   a) Sänk inte ner produkten i vatten. Håll den borta från vätskor och värmekällor. Skydda ventilationsöppningarna mot damm och smuts.
   b) Skruva inte loss skruvarna och ta inte isär enheten.
   c) Använd inte enheten oavbrutet i mer än en timme. Vänta 30 minuter innan du använder den igen.
   d) Enheten är endast avsedd att användas av vuxna.
   e) Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras på en plats som är oåtkomlig för barn.
   f) Använd inte apparaten på följande kroppsdelar: könsorgan, ansikte, ögon, operationssår, infekterad eller skadad hud, skadade ben eller leder.
   g) Använd endast på ren, torr hud genom att trycka lätt och föra apparaten över huden i cirka 60 sekunder per område.
   h) Vid smärta eller annat obehag ska användningen omedelbart avbrytas.
   i) Ladda endast med den medföljande originaladaptern.
   j) Använd endast strömförsörjningen för att ladda enheten; använd den inte för andra ändamål.
   k) Använd inte andra nätadaptrar för att ladda enheten.
2. Använd inte massageapparater eller andra vibrationsapparater utan läkarens godkännande vid följande tillstånd: graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller skador på ögats näthinna, användning av hjärtstimulator, nyligen genomförd operation, epilepsi, migrän, diskbråck, spondylolisthes, spondylos, spondylolys, nyligen genomförd ledprotesoperation, spiral, metallstänger eller metallplattor.
3. Svaga personer och barn bör övervakas av en vuxen när apparaten används.
4. Ovanstående kontraindikationer innebär inte att det är förbjudet att använda massagern, men vi rekommenderar att du först rådgör med en läkare.

Tekniska specifikationer.

Batteri: Litiumjon 2500 mAh
Effekt: 20 W
Laddare: kabel USB typ C Motor: borst lös Antal hastighetsnivåer : 4 Hastighetsintervall: 1800 – 3200 rpm
Vibrationsamplitud : 7,5 mm Mått: 113 mm x 135 mm x 45 mm Nettovikt: 0,7 kg

Uppackning och första användning.

1. Förpackningens innehåll:
   a) vibrationsmassager
   b) 6 utbytbara munstycken till massagern
   c) laddningskabel
   d) bruksanvisning
   e) 1 förvaringsfodral
2. Uppackning. Ta bort alla skyddsdelar från fraktlådan. Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder produkten.
3. Ladda enhetens batteri fullt innan du använder den för första gången.

Bruksanvisning.

1. **Laddning.**
   a) Ladda batteriet till full kapacitet före första användningen.
   b) När batteriet laddas lyser indikatorlampan rött och de blå indikatorlamporna för hastighetsnivån börjar blinka. När batteriet är fulladdat ändrar indikatorlampan färg till grönt.
   c) Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet fullt. Enhetens drifttid på högsta hastighetsnivå är cirka 8 timmar.
   d) När batterinivån sjunker under 10 % börjar den röda lampan blinka. Enheten måste då laddas.
   e) Av säkerhetsskäl bör enheten inte användas under laddning.
   f) För att säkerställa en lång livslängd bör enheten laddas när den röda lampan börjar blinka.

2. **Byte av massagehuvuden.**
   a) Massagehuvudena ska tas bort när enheten är avstängd genom att dra och vrida lätt.
   b) Sätt på munstyckena när enheten är avstängd genom att trycka in dem ordentligt tills de sitter fast.
3. **Påslagning/avstängning.**
   a) Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på enheten.
   b) Tryck och håll ned knappen i 3 sekunder för att stänga av enheten.
4. **Hastighetsinställning.**
   a) Nivå 1 är standardinställningen när enheten slås på.
   b) Varje tryckning ökar hastigheten till nästa nivå.
   c) När hastigheten når nivå 4, tryck en gång till för att återgå till nivå 1.
   Obs: Enheten är utrustad med en 10-minuters driftstimer för att undvika skador på muskler och fascia orsakade av överdriven massage.
5. **Statusindikator.**
   a) Hastighetsindikatorn visar vibrationshastigheten.
   b) Nivå 1 är standardinställningen när enheten slås på.
   c) Hastigheten ändras vid varje kort tryckning, sekventiellt och cykliskt.


NIVÅ 1	1800 varv/min
NIVÅ 2	2100 varv/min
NIVÅ 3	2500 varv/min
NIVÅ 4	3200 varv/min

Rengöring, underhåll och förvaring.

Rengör med en lätt fuktad handduk och torka av med en mjuk trasa. Använd inte alkohol eller alkoholhaltiga rengöringsmedel. Endast en liten mängd neutralt rengöringsmedel får användas för rengöring av enheten. Sätt på munstyckena när enheten är avstängd genom att trycka hårt tills de sitter ordentligt fast.
Se till att inga vätskor tränger in i apparaten.

Utbytbara munstycken.

1. Rund – för helkroppsmassage, t.ex. händer och fotrygg.
2. Platt – avslappning och formning av hela kroppen.
3. Kulformad – för djup, punktvis stimulering av meridianerna.
4. Gaffelformad – för nacke, axlar och senor.
5. Platt värmande munstycke – för massage av bland annat nacke, axlar, rygg, över- och underarmar samt höftmusklerna, med extra värmefunktion (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
6. Platt munstycke med gelinsats – mjuk gelkudde för allmän massage med extra kylfunktion (efter att munstycket först har kylts ned i kylskåpet).

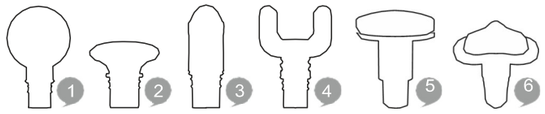

Garantivillkor.

1. I detta dokument avses med:
   a) Med "tillverkaren" avses HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, införd i företagsregistret som förs av distriktsdomstolen i Rzeszów, XII:e ekonomiska avdelningen vid det nationella domstolsregistret, med tilldelat KRS-nummer: 0000513317, med ett aktiekapital på 10 750 000 zloty (i ord: tio miljoner sju hundra femtio tusen zloty), vilket är fullt inbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) "Köparen" avser den slutliga köparen av utrustning tillverkad av Tillverkaren, inklusive såväl konsumenter som företagare.
   c) "Distributör" avser en aktör som, på grundval av ett avtal med tillverkaren, säljer utrustningen inom ett angivet område.
   d) "Auktoriserad serviceverkstad" avser uteslutande en serviceverkstad som drivs av tillverkaren eller en serviceverkstad som tillverkaren har utsett och som drivs av tillverkarens distributör.
   e) "Utrustning" avser en lös egendom, tillverkad av tillverkaren, som är föremål för köpeavtalet och som omfattas av den aktuella garantin.
2. Tillverkaren garanterar god kvalitet och felfri funktion för den utrustning som omfattas av detta garantibevis under en period av 1 år.
3. Garantiåtgärder omfattar inte åtgärder som anges i bruksanvisningen och som köparen är skyldig att utföra på egen hand (montering av utrustningen, underhåll av utrustningen m.m.).
4. Garantans ansvar omfattar endast fel som uppstått på grund av orsaker som ligger i själva utrustningen. Garantin omfattar i synnerhet inte skador som uppstått till följd av felaktig eller icke-föreskriven användning, förvaring, underhåll eller transport av utrustningen, samt färgskillnader mellan delar som utsatts respektive inte utsatts för solljus, påverkan av kemikalier eller slipmedel, luftföroreningar eller oavsiktliga hål och skavmärken, förekomsten av fläckar eller ringar efter feta eller färgande ämnen (fetter, krämer, lotioner eller oljor), permanent färgning med färgämnen såsom bläck, permanenta märkpennor eller andra icke-beständiga färgämnen som används vid tillverkning av kläder (t.ex. färgämnen som används för att tillverka kläder av typen blå jeans).
5. Garantin omfattar inte mekaniska skador på utrustningen.
6. Köparen förlorar sina rättigheter enligt garantin i följande fall:
   a) om tillverkaren konstaterar att utrustningen under garantiperioden har reparerats av någon annan än en auktoriserad serviceverkstad,
   b) om några konstruktionsmässiga ändringar har gjorts på utrustningen utan tillverkarens föregående skriftliga medgivande,
   c) användning av utrustningen på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda ändamål,
   d) användning av utrustningen efter att en konstruktionsfel har upptäckts.
7. Oavsett förlusten av garantirätten, som beskrivs ovan i punkt 6, ansvarar tillverkaren inte heller för några skador på egendom eller skador på tredje part som kan orsakas av användning av den utrustning som omfattas av garantin.
8. Garantin utesluter inte och begränsar inte heller de rättigheter som följer av garantin för väsentliga fel. Utövandet av rättigheter enligt garantin påverkar inte säljarens ansvar enligt garantin för väsentliga fel. Om köparen utövar sina rättigheter enligt garantin avbryts tidsfristen för att utöva rättigheterna enligt garantin för sakfel från och med den dag då tillverkaren underrättas om felet. Tidsfristen fortsätter att löpa från och med den dag då tillverkaren vägrar att fullgöra sina skyldigheter enligt garantin eller när tidsfristen för att fullgöra dessa har löpt ut utan resultat.
9. Garantins omfattning är begränsad till det land där utrustningen såldes.
10. Tillverkaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt garantin (avhjälpande av fel eller konstruktionsskador på utrustningen som uppstått på grund av orsaker som ligger i utrustningen själv och som upptäckts under garantiperioden) kostnadsfritt inom 14 dagar från den dag då utrustningen levererades till tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad. Om reparationen av utrustningen inte kan utföras inom den ovan angivna tidsfristen ska tillverkaren informera köparen om detta samt ange orsakerna till förseningen och den beräknade tidpunkten för genomförandet av det godkända garantianspråket.
11. För att kunna utnyttja garantirätten måste fyra villkor vara uppfyllda samtidigt (kumulativt):
   a) att köparen uppvisar en momsfaktura, ett kvitto eller annat inköpsbevis för utrustningen, samt fotografisk dokumentation av den defekta utrustningen tillsammans med en kort beskrivning av skälen till garantikravet,
   b) anmälan av felet inom 14 (fjorton) dagar från det att det upptäcktes,
   c) utrustningen måste levereras i originalförpackningen på tillverkarens bekostnad, till den adress som anges ovan i garantibeviset eller till en auktoriserad serviceverkstad,
   d) angivande av den plats dit tillverkaren ska leverera utrustningen efter reparationen (begränsat till det land där utrustningen köptes).
12. Garantiperioden förlängs med den tid som reparationen tar, räknat från den dag då utrustningen levererades till tillverkaren eller den auktoriserade servicen till den dag då utrustningen återlämnades till köparen.
13. Det åligger tillverkaren eller den auktoriserade servicestationen att fastställa omfattningen och sättet för reparationen av utrustningen.
14. Garantin är begränsad till reparation av utrustningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att byta ut utrustningen mot en felfri sådan, om reparationskostnaden överstiger det pris som anges på inköpskvittot. Köparen har inom ramen för garantin inte rätt att kräva att utrustningen byts ut mot en ny. Garantin omfattar i synnerhet inte ansvar för förluster eller skador som uppstår hos köparen i samband med att denne berövas möjligheten att använda utrustningen.
15. Tillverkaren ansvarar inte för skador på utrustningen som uppstår under transporten som utförs av transportföretaget fram till dess att tillverkaren tar emot utrustningen från transportföretaget.
16. Om leveransen av Utrustningen har beställts av Tillverkaren är det Köparens skyldighet att kontrollera Utrustningens tekniska skick vid mottagandet. Om Köparen konstaterar att försändelsen eller Utrustningen i den har skadats, ska Köparen:
   a) omedelbart, senast inom tre dagar från mottagandet av försändelsen, underrätta tillverkaren om eventuella skador på utrustningen som uppstått under transporten, så att tillverkaren kan anmäla reklamationen till transportföretaget och göra gällande sina anspråk i samband därmed,
   b) lämna in ett reklamationsprotokoll, upprättat mellan köparen och transportföretaget, till tillverkaren.
17. Garantibestämmelserna i detta dokument utgör de enda och exklusiva garantivillkoren för produkter från HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.