
Brugsanvisning og garanti til
VIBRATIONSMASSAGER PRO

HABYS®

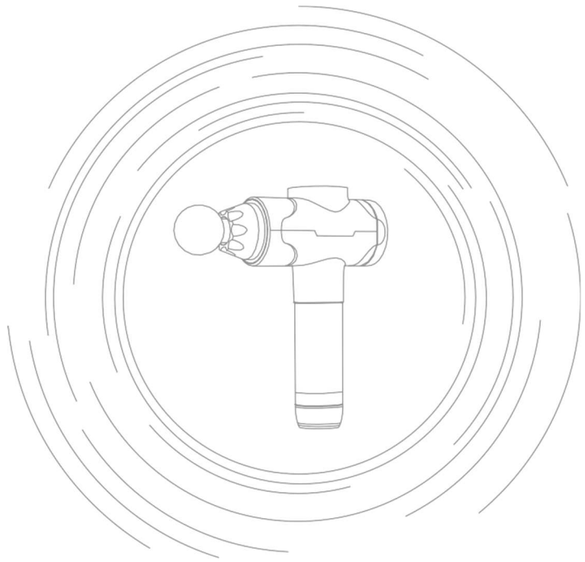

CE

Vejledningsnummer: 050/2022/3
Udgivelsesdato: 21.08.2024

Betingelser for sikker brug.

1. For at undgå risiko for elektrisk stød, brand eller personskade skal produktet anvendes i overensstemmelse med følgende retningslinjer:
   a) Må ikke nedsænkes i vand. Holdes væk fra væsker og varmekilder. Beskyt ventilationsåbningerne mod støv og snavs.
   b) Skru ikke skruerne ud, og adskil ikke enheden i dele.
   c) Brug ikke enheden uafbrudt i mere end en time. Vent 30 minutter, før den tages i brug igen.
   d) Enheden er udelukkende beregnet til brug af voksne.
   e) Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares utilgængeligt for børn.
   f) Brug ikke apparatet på følgende kropsdele: kønsorganer, ansigt, øjne, operationssår, inficeret eller såret hud, beskadigede knogler eller led.
   g) Anvend kun på ren, tør hud ved let at trykke og bevæge apparatet hen over huden i ca. 60 sekunder pr. område.
   h) I tilfælde af smerter eller andet ubehag skal brugen straks afbrydes.
2. Brug ikke massageren eller andre vibrationsapparater uden lægens tilladelse i følgende tilfælde: graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller nethindeskade, brug af pacemaker, nylig gennemgået operation, epilepsi, migræne, diskusprolaps, spondylolisthesis, spondylose, spondylolyse, nyligt udført leddudskiftning, spiral, metalstænger eller -plader.
3. Svage personer og børn bør overvåges af en voksen, når apparatet anvendes.
4. Ovenstående kontraindikationer betyder ikke, at det er forbudt at bruge massageapparatet, men vi anbefaler, at man først rådfører sig med en læge.

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.

Rengør med et let fugtigt håndklæde og tør efter med en blød klud. Brug ikke alkohol eller alkoholholdige rengøringsmidler. Der må kun anvendes en lille mængde neutralt rengøringsmiddel til rengøring af apparatet. Indsæt tilbehørsdele, når apparatet er slukket, ved at trykke dem fast, indtil de sidder godt fast.
Undgå, at der trænger væsker ind i apparatet.

Specifikationer.

Batteri: Lithium-ion 2600 mAh
Motor: børsteløs Antal hastighedsniveauer : 30
Hastighedsområde: 1300 – 3600 o/min
Vibrationsamplitude: 16 mm
Display: LCD Støjniveau ≤50 dB Mål: 180 mm x 255 mm x 50 mm Nettovægt: 1 kg

Udpakning og første brug.

1. Indhold i pakken:
   a) vibrationsmassager
   b) 12 udskiftelige dyser til massageren
   c) USB-/USB-C-opladerkabel
   d) brugervejledning
   e) etui
   Der kræves en oplader på mindst 2 A til opladning (sættet indeholder ikke en oplader).
2. Udpakning. Fjern alle beskyttelseselementer fra forsendelseskassen. Læs denne brugsanvisning og alle sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.
3. Oplad enhedens batteri fuldt ud inden første brug.

Brugsanvisning.


1. **Opladning.**
   a) Sørg for, at tænd/sluk-knappen står i positionen „OFF“, inden opladning.
   b) Under opladning af batteriet vises det aktuelle niveau nederst på håndtaget i procent og med et symbol for et batteri, der oplades.
   c) Det tager ca. 4 timer at oplade batteriet fuldt.
   d) Det aktuelle batteriniveau vises også på hoveddisplayet i trin på 40 %, 60 %, 80 % og 100 %.
   e) Enhedens driftstid ved højeste hastighed er ca. 8 timer.
   f) Når batteriniveauet falder til under 10 %, begynder den røde LED at blinke. Enheden skal da oplades.
   g) Af sikkerhedsmæssige årsager må enheden ikke bruges under opladning.
   h) For at sikre en lang levetid skal enheden oplades, når den røde LED begynder at blinke.
2. **Udskiftning af massagehoveder.**
   a) Massagehovederne skal fjernes, når enheden er slukket, ved at trække i dem og dreje dem let.
   b) Hovedene skal sættes på, når enheden er slukket, ved at trykke dem fast, indtil de klikker på plads.
3. **Tænd/sluk.**
   a) For at starte enheden skal du sætte strømafbryderen i positionen »ON«.
   b) For at slukke for apparatet skal du sætte tænd/sluk-knappen i positionen „OFF“.
4. **Hastighedsregulering.**
   a) Niveau 1 er standardindstillingen, når enheden tændes.
   b) Hvert tryk på knappen „+“ på hoveddisplayet øger hastigheden til det næste niveau.
   c) Hvert tryk på knappen „-“ på hoveddisplayet sænker hastigheden til et lavere niveau.
   d) Indstillingsniveauer:

NIVEAU 1-5	1300–1600 omdr.
NIVEAU 6-10	1700–2000 omdr./min
NIVEAU 11-15	2100–2400 omdr./min
NIVEAU 16-20	2500–2800 omdr./min
NIVEAU 21-25	2900–3200 omdr./min
NIVEAU 26-30	3300–3600 omdr./min

Bemærk: Enheden er udstyret med en 10-minutters driftstæller for at undgå skader på muskler og fascia som følge af overdreven massage.

5. **Hoved- og hjælpedisplay.**
   a) Hoveddisplayet viser alle relevante oplysninger, såsom: batteriniveau, den aktuelt indstillede hastighed og indikator for korrekt tryk under drift.
   b) Trykket under brug angives med lysdioder: 3 grønne lysdioder angiver det korrekte trykområde under brug, røde lysdioder angiver for stort tryk under brug.

c) På hjælpedisplayet i den nederste del af håndtaget vises det aktuelle batteriopladningsniveau.

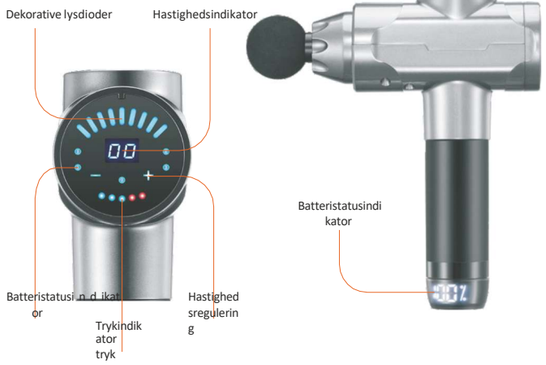

Udskiftelige hoveder.

1. Rund – til massage af muskler, bl.a. i nakken, skuldrene, ryggen, over- og underkroppen.
2. Gaffelformet (U-form) – til massage af bl.a. området omkring rygsøjlen.
3. Flad – til massage af bl.a. musklerne i nakken, skuldrene, ryggen, de øvre og nedre lemmer samt hoftemusklerne.
4. Skulderblad – til massage af bl.a. musklerne i den nedre del af ryggen.
5. Kugleformet – til massage af hænder og mindre muskelgrupper.
6. Bueformet – til massage af bl.a. lår- og lægmusklerne.
7. Gyro – til dyb penetration af muskler og triggerpunkter.
8. Mashroom – til blid massage omkring leddene.
9. Fingerhovedet – til punktmassage af muskel- og fascie-strukturer.
10. Kamformet – til massage af musklerne omkring ryghvirvlerne, designet til at beskytte senerne og udelukkende massere musklerne.
11. Fladt opvarmningshoved – til massage af bl.a. nakke-, skulder-, ryg-, arm- og benmuskler samt hoftemuskler med en ekstra opvarmningsfunktion (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
12. Fladt mundstykke med gelindlæg – blødt gelpude til generel massage med ekstra kølefunktion (efter forudgående afkøling af spidsen i køleskabet).



Garantibetingelser.

1. I dette dokument forstås ved:
   a) betyder »Producenten« HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hjemsted i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, indført i virksomhedsregistret, der føres af distriktsretten i Rzeszów, XII. Afdeling for Erhvervsret under det nationale retsregister, med tildelt KRS-nummer: 0000513317, med en aktiekapital på 10.750.000 zloty (i ord: ti millioner syv hundrede og halvtreds tusind zloty), hvor kapitalen er fuldt indbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) »Køber« betegner den endelige køber af udstyr fremstillet af Producenten, herunder både forbrugere og erhvervsdrivende.
   c) »Distributør« betegner en enhed, der på grundlag af en aftale med Producenten sælger Udstyret i et afgrænset område.
   d) »Autoriseret serviceværksted« betegner udelukkende et serviceværksted, der drives af producenten, eller et serviceværksted, der er udpeget af producenten og drives af dennes distributør,
   e) Ved »udstyr« forstås en løsøregenstand, der er fremstillet af producenten, som er genstand for købsaftalen, og som denne garanti gælder for.
2. Producenten garanterer god kvalitet og fejlfri funktion af det udstyr, for hvilket det pågældende garantibevis er udstedt, i en periode på 1 år.
3. Garantiomfattet reparation omfatter ikke de handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som køberen selv er forpligtet til at udføre (montering af udstyret, vedligeholdelse af udstyret osv.).
4. Garantien dækker kun fejl, der skyldes årsager, der ligger i selve udstyret. Garantien dækker især ikke skader, der er opstået som følge af forkert eller ikke i overensstemmelse med brugsanvisningen foretaget brug, opbevaring, vedligeholdelse eller transport af udstyret samt farveforskelle mellem dele, der er udsat for og ikke udsat for solstråling, påvirkning af kemikalier eller slibemidler, luftforurening eller utilsigtede punkteringer og slid, tilstedeværelse af pletter eller ringe efter fedtede eller farvende stoffer (fedt, cremer, balsam eller olier), varig farvning med farvestoffer såsom blæk, permanente markører eller andre ikke-varige farvestoffer, der anvendes i tøjproduktion (f.eks. farvestoffer, der anvendes til fremstilling af tøj af typen blå jeans).
5. Garantien dækker ikke mekaniske skader på udstyret.
6. Køberen mister sine rettigheder i henhold til garantien, hvis:
   a) producenten konstaterer, at udstyret i garantiperioden er blevet repareret uden for et autoriseret servicecenter,
   b) at foretage konstruktionsmæssige ændringer af udstyret uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten,
   c) at anvende udstyret i strid med dets tilsigtede formål,
   d) at anvende udstyret, efter at der er konstateret en konstruktionsfejl i det.
7. Uafhængigt af tabet af garantirettighederne, som er beskrevet ovenfor i punkt 6, påtager producenten sig heller ikke ansvar for skader på ejendom eller skader påført tredjemand, som kan skyldes brugen af det udstyr, der er omfattet af garantien.
8. Garantien udelukker eller begrænser ikke de rettigheder, der følger af garantien for mangler. Udøvelsen af rettighederne i henhold til garantien påvirker ikke sælgerens ansvar i henhold til garantien for mangler. Hvis køberen udøver sine rettigheder i henhold til garantien, suspenderes fristen for udøvelse af rettighederne i henhold til garantien for mangler fra den dag, hvor producenten underrettes om manglen. Denne frist løber videre fra den dag, hvor producenten nægter at opfylde sine forpligtelser i henhold til garantien, eller hvor fristen for opfyldelse heraf er udløbet uden resultat.
9. Garantidækningen er begrænset til det land, hvor udstyret blev solgt.
10. Producenten vil opfylde sine forpligtelser i henhold til garantien (afhjælpning af fejl eller konstruktionsskader på udstyret, der skyldes årsager, der ligger i udstyret selv, og som er blevet afsløret i løbet af garanti) gratis inden for 14 dage fra datoen for levering af udstyret til producenten eller et autoriseret servicecenter. Hvis reparationen af udstyret ikke kan udføres inden for den ovenfor angivne frist, vil producenten informere køberen herom og angive årsagerne hertil Forsinkelser og forventet gennemførelsestidspunkt for en godkendt garantikrav.
11. For at kunne gøre brug af garantirettighederne skal fire betingelser være opfyldt samlet (kumulativt):
    a) fremvisning af en momsfaktura, en kvittering eller et andet købsbevis for udstyret fra køberens side samt fotografisk dokumentation af det defekte udstyr ledsaget af en kort beskrivelse af årsagerne til garantikravet,
    b) anmeldelse af fejlen senest 14 (fjorten) dage efter, at den er blevet opdaget,
    c) levering af udstyret i den originale emballage på producentens regning til den adresse, der er angivet ovenfor i garantibeviset, eller til adressen på det autoriserede servicecenter,
    d) angivelse af det sted, hvor producenten skal levere udstyret efter reparationen (begrænset til det land, hvor udstyret blev købt).
12. Garantiperioden forlænges med reparationsperioden, regnet fra den dag, hvor udstyret blev afleveret til producenten eller det autoriserede servicecenter, til den dag, hvor udstyret blev returneret til køberen.
13. Det påhviler producenten eller det autoriserede serviceværksted at fastlægge omfanget og fremgangsmåden for reparation af udstyret.
14. Garantien er begrænset til reparation af udstyret. Producenten forbeholder sig retten til at udskifte udstyret med et fejlfrit eksemplar, hvis reparationsomkostningerne overstiger den pris, der er angivet på købsbeviset. Køberen har ikke ret til at kræve udskiftning af udstyret med et nyt inden for garantien. Garantien dækker især ikke ansvar for tab eller skader, som køberen måtte lide som følge af, at han er blevet frataget muligheden for at benytte udstyret.
15. Producenten påtager sig ikke ansvar for skader på udstyret, der opstår under transporten udført af transportvirksomheden, indtil udstyret er modtaget af producenten fra transportvirksomheden.
16. Hvis forsendelsen af udstyret er bestilt af producenten, er det køberens pligt at kontrollere udstyrets tekniske tilstand ved modtagelsen. Hvis køberen konstaterer, at

    forsendelsen, eller hvis udstyret i forsendelsen er blevet beskadiget, skal køberen:
    a) straks, senest inden for 3 dage fra modtagelsen af forsendelsen, underrette producenten om eventuelle skader på udstyret, der er opstået under transporten, for at give producenten mulighed for at indgive en reklamation til transportvirksomheden og gøre de dermed forbundne krav gældende,
    b) levere en reklamationsrapport, der er udfærdiget mellem køberen og transportvirksomheden, til producenten.
17. Garantibestemmelserne i dette dokument udgør de eneste og eksklusive garantibestemmelser for produkter fra HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRODUCENT: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co,. LTD, NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road, Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTØR: HABYS Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło PL, www.habys.com