
Bruksanvisning og garanti for VIBRASJONSMASSASJER PRO

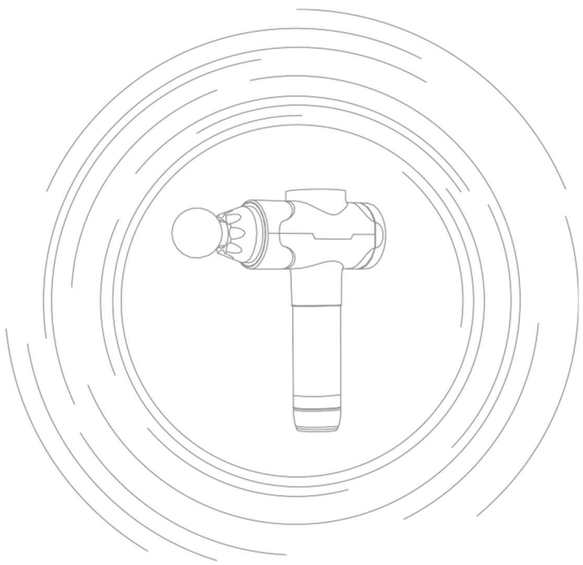

Brukerhåndboksnummer: 050/2022/3 Utgivelsesdato: 21.08.2024

Vilkår for sikker bruk.

1. For å unngå fare for elektrisk støt, brann eller personskader må produktet brukes i henhold til følgende retningslinjer:
   a) Ikke senk den ned i vann. Hold den unna væsker og varmekilder. Beskytt ventilasjonsåpningene mot støv og smusspartikler.
   b) Ikke skru ut skruene, og ikke demonter enheten.
   c) Ikke bruk enheten kontinuerlig i mer enn en time. Vent 30 minutter før du bruker den igjen.
   d) Enheten er kun beregnet for bruk av voksne.
   e) Holdes utenfor barns rekkevidde. Oppbevares utilgjengelig for barn.
   f) Ikke bruk apparatet på følgende kroppsdeler: kjønnsorganer, ansikt, øyne, operasjonssår, infisert eller skadet hud, skadede bein eller ledd.
   g) Bruk kun på ren, tørr hud ved å trykke lett og bevege apparatet over huden i ca. 60 sekunder på hvert område.
   h) Ved smerter eller annet ubehag må bruken avbrytes umiddelbart.
2. Ikke bruk massasjeapparatet eller andre vibrasjonsapparater uten samtykke fra lege i følgende tilfeller: graviditet, diabetes med komplikasjoner som nevropati eller skade på øyets netthinne, bruk av pacemaker, nylig gjennomført operasjon, epilepsi, migrene, skiveprolaps, spondylolistese, spondylose, spondylolyse, nylig gjennomført leddproteseoperasjon, spiral, metallstenger eller -plater.
3. Svake personer og barn bør være under oppsyn av en voksen når de bruker apparatet.
4. De ovennevnte kontraindikasjonene innebærer ikke at det er forbudt å bruke massasjeapparatet, men vi anbefaler at du først rådfører deg med en lege.

Rengjøring, vedlikehold og oppbevaring.

Rengjør med et lett fuktig håndkle og tørk av med en myk klut. Ikke bruk alkohol eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Det er kun tillatt å bruke en liten mengde nøytralt vaskemiddel til rengjøring av apparatet. Sett på påsatsene når apparatet er slått av, og trykk dem godt på plass til de sitter fast.
Unngå at væsker trenger inn i apparatet.

Spesifikasjoner.

Batteri: Litium-ion 2600 mAh Motor: børsteløs Antall hastighetsnivåer : 30 Hastighetsområde: 1300 – 3600 o/min
Vibrasjonsamplitude: 16 mm
Skjerm: LCD Støynivå
≤50 dB Dimensjoner: 180 mm x 255 mm x 50 mm Nettovekt: 1 kg

Utpakking og første gangs bruk.

1. Innhold i esken:
   a) vibrasjonsmassasjeappar at
   b) 12 utskiftbare massasjedyser
   c) USB-/USB-C-ladekabel
   d) brukerveiledning
   e) etui
   For lading kreves en lader på minst 2A (lader er ikke inkludert i settet).
2. Utpakking. Fjern alle beskyttelseselementer fra forsendelsesesken. Les denne bruksanvisningen og alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før bruk.
3. Lad enhetens batteri helt opp før første bruk.

Brukerveiledning.


1. **Lading.**
   a) Før lading må du forsikre deg om at strømbryteren står i posisjonen «OFF».
   b) Under lading vises det aktuelle batterinivået nederst på håndtaket i form av en prosentverdi og et symbol for batteri under lading.
   c) Det tar ca. 4 timer å lade batteriet fullt opp.
   d) Det aktuelle batterinivået vises også på hoveddisplayet i trinnene: 40 %, 60 %, 80 % og 100 %.
   e) Driftstiden for enheten på høyeste hastighetsnivå er ca. 8 timer.
   f) Når batterinivået faller under 10 %, begynner den røde LED-lampen å blinke. Enheten må da lades opp.
   g) Av sikkerhetshensyn bør du ikke bruke enheten mens den lades.
   h) For å sikre lang levetid bør du lade enheten når den røde LED-lampen begynner å blinke.
2. **Bytte av massasjehoder.**
   a) Massasjehodene skal fjernes når enheten er slått av, ved å trekke og vri dem lett.
   b) Hodene skal settes på når enheten er slått av, ved å trykke hardt til de sitter på plass.
3. **Slå på / Slå av.**
   a) For å starte enheten må du sette strømbryteren i stillingen «ON».
   b) For å slå av enheten, sett strømbryteren i posisjonen «OFF».
4. **Hastighetsregulering.**
   a) Nivå 1 er standardinnstillingen når enheten slås på.
   b) Hvert trykk på «+»-knappen på hoveddisplayet øker hastigheten til neste nivå.
   c) Hvert trykk på «-»-knappen på hoveddisplayet reduserer hastigheten til et lavere nivå.
   d) Justeringsnivåer:

NIVÅ 1–5	1300–1600 o/min
NIVÅ 6–10	1700–2000 o/min
NIVÅ 11–15	2100–2400 o/min
NIVÅ 16–20	2500–2800 o/min
NIVÅ 21–25	2900–3200 o/min
NIVÅ 26–30	3300–3600 o/min

Merk: Enheten er utstyrt med en 10-minutters driftstimer for å unngå skader på muskler og fascia forårsaket av overdreven massasje.

5. **Hoved- og hjelpeskjerm.**
   a) Hoveddisplayet viser all nyttig informasjon, for eksempel: batterinivå, gjeldende hastighet og indikator for riktig trykk under bruk.
   b) Trykket under bruk vil bli indikert med lysdioder: 3 grønne lysdioder for riktig trykkområde under bruk, røde lysdioder for for høyt trykk under bruk.

c) På hjelpeskjermen nederst på håndtaket vises det aktuelle batterinivået.

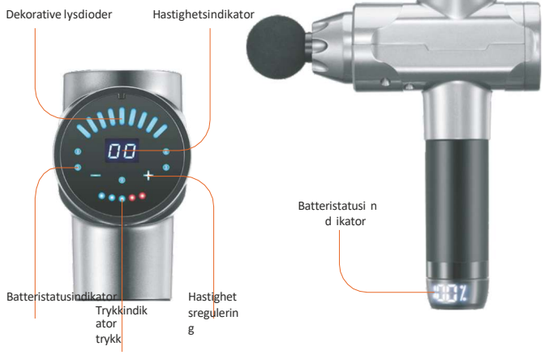

Utskiftbare hoder.

1. Rund – til massasje av muskler, blant annet i nakken, skuldrene, ryggen, over- og underekstremitetene.
2. Gaffelformet (U-form) – til massasje av blant annet området rundt ryggraden.
3. Flat – til massasje av muskler, blant annet i nakken, skuldrene, ryggen, over- og underekstremitetene samt hoftemuskulaturen.
4. Skulderbladformet – til massasje av blant annet musklene i nedre del av ryggen.
5. Kuleformet – til massasje av hender og mindre muskelgrupper.
6. Bueformet – til massasje av blant annet lår- og leggmusklene.
7. Gyro – for dyp penetrering av muskler og triggerpunkter.
8. Mushroom – til skånsom massasje rundt leddene.
9. Fingerhodet – til punktvis arbeid med muskel- og fasciastrukturer.
10. Kamformet – til massasje av muskler rundt ryggvirvlene, designet for å beskytte sener og kun massere muskler.
11. Flat oppvarmingsdyse – til massasje av muskler, blant annet i nakke, skuldre, rygg, armer og ben samt hoftemuskulaturen, med ekstra oppvarmingsfunksjon (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
12. Flat dyse med gelinnsats – myk gelpute for generell massasje med ekstra kjølefunksjon (etter at massasjedysen er avkjølt i kjøleskapet).



Garantibetingelser.

1. I dette dokumentet forstås med:
   a) betyr «produsent» HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hovedkontor i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, registrert i foretaksregisteret ført av distriktsretten i Rzeszów, XII. avdeling for økonomiske saker i det nasjonale rettsregisteret, med tildelt KRS-nummer: 0000513317, med en aksjekapital på 10 750 000 zloty (i ord: ti millioner syv hundre og femti tusen zloty), hvor kapitalen er fullt innbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) «Kjøper» betyr den endelige kjøperen av utstyr produsert av produsenten, herunder både forbrukere og næringsdrivende.
   c) «Distributør» betyr en enhet som, på grunnlag av en avtale med produsenten, selger utstyret i et angitt område.
   d) «Autorisert serviceverksted» betyr utelukkende et serviceverksted som drives av produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten og drives av dennes distributør,
   e) «Utstyr» betyr en løsøregenstand produsert av produsenten, som er gjenstand for kjøpsavtalen og som omfattes av denne garantien.
2. Produsenten garanterer god kvalitet og feilfri funksjon av utstyret som dette garantibeviset gjelder for, i en periode på 1 år.
3. Garantireparasjoner omfatter ikke tiltak som er beskrevet i bruksanvisningen, og som kjøperen er forpliktet til å utføre selv (montering av utstyret, vedlikehold av utstyret osv.).
4. Garantien omfatter kun feil som skyldes årsaker som ligger i selve utstyret. Garantien omfatter særlig ikke skader som oppstår som følge av feil bruk eller bruk, oppbevaring, vedlikehold eller
   transport av utstyret, samt fargeforskjeller mellom deler som er utsatt og ikke utsatt for solstråling, påvirkning av kjemikalier eller slipemidler, luftforurensning eller tilfeldige punkteringer og slitasje, forekomst av flekker eller ringer etter fete eller fargende stoffer (fett, kremer, balsam eller oljer), varig farging med fargestoffer som blekk, permanente tusjer eller andre ikke-varige fargestoffer brukt i klesproduksjon (f.eks. fargestoffer brukt til å fremstille klær som blå jeans).
5. Garantien dekker ikke mekaniske skader på utstyret.
6. Kjøperen mister sine rettigheter i henhold til garantien dersom:
   a) produsenten konstaterer at utstyret i garantiperioden har blitt reparert utenfor et autorisert serviceverksted,
   b) å foreta noen som helst konstruksjonsmessige endringer på utstyret uten forhåndsgodkjenning fra produsenten,
   c) å bruke utstyret på en måte som ikke er i samsvar med dets tiltenkte formål,
   d) å bruke utstyret etter at det har oppstått en konstruksjonsfeil.
7. Uavhengig av tapet av garantirettigheter, som beskrevet ovenfor i punkt 6, påtar produsenten seg heller ikke ansvar for skader på eiendom eller skader påført tredjeparter som kan oppstå som følge av bruk av utstyret som er omfattet av garantien.
8. Garantien utelukker eller begrenser ikke rettighetene som følger av ansvaret for mangler. Utøvelsen av rettighetene i henhold til garantien påvirker ikke selgerens ansvar for mangler. Dersom kjøperen utøver sine rettigheter i henhold til garantien, suspenderes fristen for å utøve rettighetene i henhold til mangelgarantien fra den dagen produsenten blir underrettet om mangelen. Denne fristen løper videre fra den dagen produsenten nekter å oppfylle sine forpliktelser i henhold til garantien, eller fra den dagen fristen for oppfyllelse av disse forpliktelsene utløper uten at de er oppfylt.
9. Garantidekningen er begrenset til det landet der utstyret ble solgt.
10. Produsenten skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til garantien (utbedring av feil eller skader på utstyrets konstruksjon som skyldes årsaker som ligger i selve utstyret, og som ble oppdaget i løpet av

    garanti) kostnadsfritt innen 14 dager fra datoen for levering av utstyret til produsenten eller et autorisert serviceverksted. Dersom reparasjon av utstyret ikke kan utføres innen den ovennevnte fristen, vil produsenten informere kjøperen om dette og oppgi årsakene
    Forsinkelser og forventet behandlingstid for godkjente garantikrav.
11. For å kunne benytte seg av garantirettighetene må fire vilkår være oppfylt samlet (kumulativt):
    a) fremleggelse av en momsfaktura, kvittering eller annet kjøpsbevis for utstyret fra kjøperen, samt fotografisk dokumentasjon av det defekte utstyret sammen med en kort beskrivelse av grunnene til garantikravet,
    b) å melde fra om feilen innen 14 (fjorten) dager etter at den ble oppdaget,
    c) levering av utstyret i originalemballasjen på produsentens bekostning, til adressen angitt ovenfor i garantibeviset eller til adressen til det autoriserte serviceverkstedet,
    d) angivelse av leveringsstedet hvor produsenten skal levere utstyret etter at reparasjonen er utført (begrenset til det landet hvor utstyret ble kjøpt).
12. Garantiperioden forlenges med reparasjonstiden, regnet fra den dagen utstyret ble levert til produsenten eller det autoriserte serviceverkstedet, til den dagen utstyret ble returnert til kjøperen.
13. Det er produsentens eller det autoriserte serviceverkstedets ansvar å fastsette omfanget og måten reparasjonen av utstyret skal utføres på.
14. Garantien er begrenset til reparasjon av utstyret. Produsenten forbeholder seg retten til å bytte ut utstyret med et feilfritt eksemplar dersom reparasjonskostnadene overstiger prisen på utstyret som er angitt i kjøpsbeviset. Kjøperen har ikke rett til å kreve utskifting av utstyret mot et nytt innenfor rammen av garantien. Garantien omfatter særlig ikke ansvar for tap eller skader som oppstår hos kjøperen som følge av at han eller hun fratas muligheten til å bruke utstyret.
15. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader på utstyret som oppstår under transporttjenesten utført av transportøren, frem til det tidspunktet produsenten mottar utstyret fra transportøren.
16. Dersom forsendelsen av utstyret ble bestilt av produsenten, er det kjøperens plikt å kontrollere utstyrets tekniske tilstand ved mottak. Dersom kjøperen konstaterer at

    forsendelsen eller utstyret i den ble skadet, skal kjøperen:
    a) umiddelbart, senest innen 3 dager fra mottaksdatoen, underrette produsenten om eventuelle skader på utstyret som oppstod under transporten, for å gjøre det mulig for produsenten å melde fra om reklamasjonen til transportøren og fremme tilhørende krav,
    b) levere en reklamasjonsrapport til produsenten, utarbeidet mellom kjøperen og transportøren.
17. Garantibestemmelsene i dette dokumentet utgjør de eneste og eksklusive garantivilkårene for produktene fra HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRODUSENT: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co,. LTD, NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road, Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTØR: HABYS Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło PL, www.habys.com