
Bruksanvisning och garanti för VIBRATIONSMASSAGER PRO

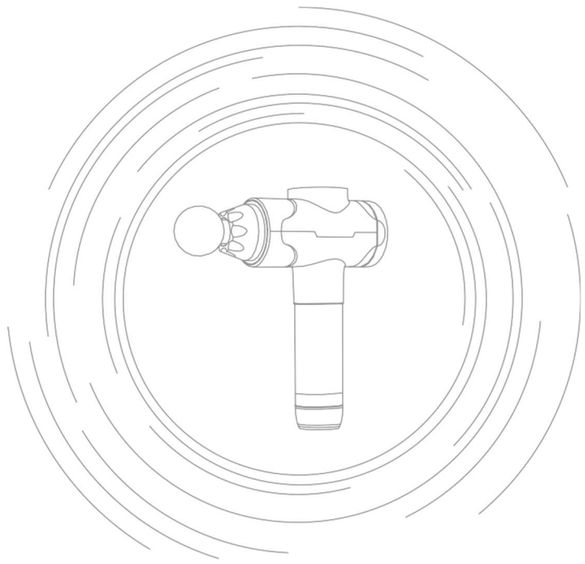

Bruksanvisningsnummer: 050/2022/3 Utgivningsdatum: 21.08.2024

Villkor för säker användning.

1. För att undvika risk för elstötar, brand eller personskador måste produkten användas enligt följande regler:
   a) Sänk inte ner den i vatten. Håll den borta från vätskor och värmekällor. Skydda ventilationsöppningarna mot damm och smuts.
   b) Skruva inte loss skruvarna och ta inte isär enheten.
   c) Använd inte enheten oavbrutet i mer än en timme. Vänta 30 minuter innan du använder den igen.
   d) Enheten är endast avsedd att användas av vuxna.
   e) Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras på en plats som är oåtkomlig för barn.
   f) Använd inte apparaten på följande kroppsdelar: könsorgan, ansikte, ögon, operationssår, infekterad eller skadad hud, skadade ben eller leder.
   g) Använd endast på ren, torr hud genom att trycka lätt och föra apparaten över huden i cirka 60 sekunder per område.
   h) Vid smärta eller annat obehag ska användningen omedelbart avbrytas.
2. Använd inte massagern eller andra vibrationsapparater utan läkarens godkännande vid följande tillstånd: graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller skador på ögats näthinna, användning av hjärtstimulator, nyligen genomförd operation, epilepsi, migrän, diskbråck, spondylolisthes, spondylos, spondylolys, nyligen genomförd ledprotesoperation, spiral, metallstänger eller metallplattor.
3. Svaga personer och barn bör övervakas av en vuxen när enheten används.
4. Ovanstående kontraindikationer innebär inte att det är förbjudet att använda massageapparaten, men vi rekommenderar att du först rådgör med en läkare.

Rengöring, underhåll och förvaring.

Rengör med en lätt fuktad handduk och torka av med en mjuk trasa. Använd inte alkohol eller alkoholhaltiga rengöringsmedel. Endast en liten mängd neutralt rengöringsmedel får användas för att rengöra apparaten. Sätt på munstyckena när apparaten är avstängd genom att trycka hårt tills de sitter ordentligt fast.
Se till att inga vätskor tränger in i enheten.

Tekniska specifikationer.

Batteri: Litiumjon 2600 mAh Motor: borst lös Antal hastighetsnivåer : 30 Hastighetsintervall: 1300 – 3600 rpm
Vibrationsamplitud: 16 mm
Display: LCD Ljudnivå
≤50 dB Mått: 180 mm x 255 mm x 50 mm Nettovikt: 1 kg

Uppackning och första användning.

1. Förpackningens innehåll:
   a) vibrationsmassager
   b) 12 utbytbara munstycken till massagern
   c) USB-/USB-C-laddningskabel
   d) bruksanvisning
   e) förvaringsfodral
   För laddning krävs en laddare på minst 2 A (laddare ingår inte i paketet).
2. Uppackning. Ta bort alla skyddsdelar från fraktlådan. Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder produkten.
3. Ladda enhetens batteri fullt innan du använder den för första gången.

Bruksanvisning.


1. **Laddning.**
   a) Se till att strömbrytaren står i läge ”OFF” innan du laddar.
   b) Under laddningen visas den aktuella laddningsnivån längst ned på handtaget i procent och med symbolen för laddning.
   c) Det tar cirka 4 timmar att ladda batteriet fullt.
   d) Batteriets aktuella laddningsnivå visas även på huvuddisplayen i steg om: 40 %, 60 %, 80 % och 100 %.
   e) Enhetens drifttid vid högsta hastighet är cirka 8 timmar.
   f) När batterinivån sjunker under 10 % börjar den röda lysdioden blinka. Enheten måste då laddas.
   g) Av säkerhetsskäl bör enheten inte användas under laddning.
   h) För att säkerställa en lång livslängd bör enheten laddas när den röda lysdioden börjar blinka.
2. **Byte av massagehuvuden.**
   a) Massagehuvudena ska tas bort när enheten är avstängd genom att dra och vrida lätt.
   b) Sätt på munstyckena när enheten är avstängd genom att trycka hårt tills de sitter fast.
3. **Påslagning/avstängning.**
   a) För att starta enheten ska du ställa strömbrytaren i läget ”ON”.
   b) För att stänga av enheten, flytta strömbrytaren till läget ”OFF”.
4. **Hastighetsreglering.**
   a) Nivå 1 är standardinställningen när enheten startas.
   b) Varje gång du trycker på knappen ”+” på huvuddisplayen ökar hastigheten till nästa nivå.
   c) Varje gång du trycker på knappen ”-” på huvuddisplayen sänks hastigheten till nästa lägre nivå.
   d) Justeringsnivåer:

NIVÅ 1–5	1300–1600 rpm
NIVÅ 6–10	1700–2000 rpm
NIVÅ 11–15	2100–2400 rpm
NIVÅ 16–20	2500–2800 rpm
NIVÅ 21–25	2900–3200 rpm
NIVÅ 26–30	3 300–3 600 rpm

Obs! Enheten är utrustad med en 10-minuters drifttimer för att undvika skador på muskler och fascia orsakade av överdriven massage.

5. **Huvud- och hjälpdisplay.**
   a) På huvuddisplayen visas all användbar information, såsom: batterinivå, aktuell hastighet och indikator för korrekt tryck under drift.
   b) Trycket under arbete indikeras med lysdioder: 3 gröna lysdioder visar korrekt tryckintervall under arbete, röda lysdioder visar för högt tryck under arbete.

c) På hjälpdisplayen i den nedre delen av handtaget visas den aktuella batterinivån.

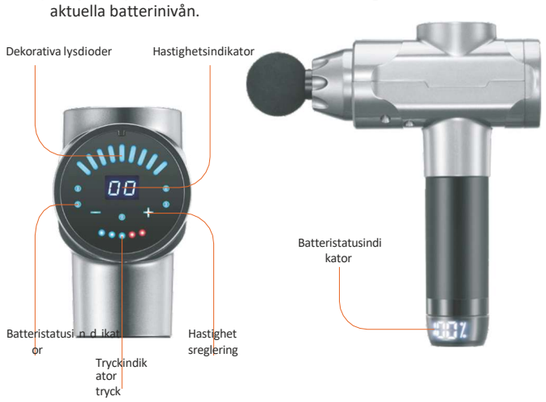

Utbytbara skrivhuvuden.

1. Rund – för massage av bland annat nacke, axlar, rygg, armar och ben.
2. Gaffelformad (U-form) – för massage av bland annat området kring ryggraden.
3. Platt – för massage av bland annat nacke, axlar, rygg, armar och ben samt höftmusklerna.
4. Skovelformad – för massage av bland annat nedre delen av ryggen.
5. Kulformad – för massage av händer och mindre muskelgrupper.
6. Bågformad – för massage av bland annat lår- och vadmusklerna.
7. Gyro – för djup penetration av muskler och triggerpunkter.
8. Mushroom – för skonsam massage kring lederna.
9. Fingertips – för punktvis behandling av muskel- och fasciastrukturer.
10. Kamformad – för massage av musklerna kring ryggkotorna, utformad för att skydda senorna och enbart massera musklerna.
11. Platt värmande munstycke – för massage av bland annat nacke, axlar, rygg, armar och ben samt höftmusklerna, med extra värmefunktion (44 °C, 56 °C eller 61 °C).
12. Platt munstycke med gelinsats – mjuk gelkudde för allmän massage med extra kylfunktion (efter att munstycket först har kylts ned i kylskåp).



Garantivillkor.

1. I detta dokument avses med:
   a) avses med "Tillverkaren" HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i Jasło, ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, registrerat i företagsregistret som förs av tingsrätten i Rzeszów, XII:e avdelningen för ekonomiska frågor vid det nationella domstolsregistret, med tilldelat KRS-nummer: 0000513317, med ett aktiekapital på 10 750 000 zloty (i ord: tio miljoner sju hundra femtio tusen zloty), vilket är fullt inbetalt, NIP: 6852208438, REGON: 180186290.
   b) "Köparen" avser den slutliga köparen av utrustning tillverkad av Tillverkaren, inklusive såväl konsumenter som företagare.
   c) "Distributör" avser en aktör som, på grundval av ett avtal med tillverkaren, säljer utrustningen inom ett angivet område.
   d) "Auktoriserad serviceverkstad" avser uteslutande en serviceverkstad som drivs av tillverkaren eller en serviceverkstad som tillverkaren har utsett och som drivs av tillverkarens distributör,
   e) Med "utrustning" avses en lös egendom, tillverkad av tillverkaren, som är föremål för köpeavtalet och som omfattas av den aktuella garantin.
2. Tillverkaren garanterar god kvalitet och felfri funktion för den utrustning för vilken detta garantibevis har utfärdats under en period av 1 år.
3. Garantiåtgärder omfattar inte åtgärder som anges i bruksanvisningen och som köparen är skyldig att utföra på egen hand (montering av utrustningen, underhåll av utrustningen m.m.).
4. Garantansvaret omfattar endast fel som uppstått på grund av orsaker som ligger i själva utrustningen. Garantin omfattar i synnerhet inte skador som uppstått till följd av felaktig eller icke-föreskriven användning, förvaring, underhåll eller

   transport av utrustningen, samt färgskillnader mellan delar som utsätts respektive inte utsätts för solljus, kemikalier eller slipmedel, luftföroreningar eller oavsiktliga hål och skavsår, förekomst av fläckar eller ringar efter feta eller färgande ämnen (fetter, krämer, balsam eller oljor), bestående missfärgning orsakad av färgämnen såsom bläck, permanenta markeringspennor eller andra icke-beständiga färgämnen som används vid tillverkning av kläder (t.ex. färgämnen som används för att tillverka kläder av typen blå jeans).
5. Garantin täcker inte mekaniska skador på utrustningen.
6. Köparen förlorar sina rättigheter enligt garantin om:
   a) tillverkaren konstaterar att utrustningen under garantiperioden har reparerats utanför en auktoriserad serviceverkstad,
   b) att utan tillverkarens föregående skriftliga medgivande göra några konstruktionsändringar på utrustningen,
   c) använda utrustningen på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användningsområde,
   d) använda utrustningen efter att en konstruktionsfel har upptäckts.
7. Oavsett förlusten av de garantirättigheter som beskrivs ovan i punkt 6, ansvarar tillverkaren inte heller för några skador på egendom eller skador på tredje part som kan orsakas av användning av den utrustning som omfattas av garantin.
8. Garantin utesluter inte och begränsar inte heller de rättigheter som följer av garantin för konstruktionsfel. Utövandet av rättigheter enligt garantin påverkar inte säljarens ansvar enligt garantin för konstruktionsfel. Om köparen utövar sina rättigheter enligt garantin, avbryts tidsfristen för att utöva rättigheterna enligt garantin för sakfel från och med den dag då tillverkaren underrättas om felet. Tidsfristen fortsätter att löpa från och med den dag då tillverkaren vägrar att fullgöra sina skyldigheter enligt garantin eller när tidsfristen för att fullgöra dessa har löpt ut utan resultat.
9. Garantins giltighetsområde är begränsat till det land där utrustningen såldes.
10. Tillverkaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt garantin (avhjälpa fel eller konstruktionsskador på utrustningen som uppstått på grund av orsaker som ligger i utrustningen själv och som upptäckts under

    garanti) kostnadsfritt inom 14 dagar från det att utrustningen levererats till tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad. Om reparationen av utrustningen inte kan utföras inom den ovan angivna tidsfristen ska tillverkaren informera köparen om detta samt ange orsakerna

    Förseningar och beräknad tidpunkt för hantering av ett godkänt garantiärende.
11. För att kunna utnyttja garantirätten måste fyra villkor vara uppfyllda samtidigt (kumulativt):
    a) uppvisande av en momsfaktura, ett kvitto eller annat inköpsbevis för utrustningen från köparen, samt fotografisk dokumentation av den defekta utrustningen tillsammans med en kort beskrivning av skälen till att garantikravet framställs,
    b) anmälan av felet inom 14 (fjorton) dagar från det att det upptäcktes,
    c) leverera utrustningen i originalförpackningen på tillverkarens bekostnad, till den adress som anges ovan i garantibeviset eller till adressen för den auktoriserade servicen,
    d) angivande av den plats dit tillverkaren ska leverera utrustningen efter reparationen (begränsat till det land där utrustningen köptes).
12. Garantiperioden förlängs med reparationstiden, räknat från den dag då utrustningen levererades till tillverkaren eller den auktoriserade servicen till den dag då utrustningen återlämnades till köparen.
13. Det åligger tillverkaren eller den auktoriserade servicestationen att fastställa omfattningen och sättet för reparationen av utrustningen.
14. Garantin är begränsad till reparation av utrustningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att byta ut utrustningen mot en felfri enhet, om reparationskostnaden överstiger det pris som anges på inköpskvittot. Köparen har inte rätt att inom ramen för garantin kräva att utrustningen byts ut mot en ny. Garantin omfattar i synnerhet inte ansvar för förluster eller skador som uppstår hos köparen till följd av att denne berövas möjligheten att använda utrustningen.
15. Tillverkaren ansvarar inte för skador på utrustningen som uppstår under transporten som utförs av transportföretaget fram till dess att tillverkaren tar emot utrustningen från transportföretaget.
16. Om transporten av utrustningen har beställts av tillverkaren är det köparens skyldighet att kontrollera utrustningens tekniska skick vid mottagandet. Om köparen konstaterar att försändelsen eller den utrustning som ingår i den har skadats, ska köparen:
    a) omedelbart, senast inom 3 dagar från mottagandet av försändelsen, underrätta tillverkaren om alla skador på utrustningen som uppstått under transporten, för att göra det möjligt för tillverkaren att anmäla reklamationen till transportföretaget och driva de därmed sammanhängande anspråken,
    b) överlämna till tillverkaren ett reklamationsprotokoll som upprättats mellan köparen och transportföretaget.
17. Garantivillkoren i detta dokument utgör de enda och exklusiva garantivillkoren för produkter från HABYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

TILLVERKARE: Shen Zhen Xiancaiyuan Technology Co,. LTD, NO.2 Hexi new village Guanlan Huanguan zhong road, Longhua district, Shenzhen city, Guangdong province, Kina

IMPORTÖR: HABYS Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło PL, www.habys.com