

# Follo Corpus M



Follo Futura har produsert behandlingsbenker gjennom mange år. Follo Corpus M er en av Europas mest anerkjente undersøkelses- og behandlingsbenker og er en videreutvikling av Masolett-benken.

Follo Corpus M leveres i tre putevarianter; to, tre og fem puter. Felles for alle benkene er at hodeputen kan justeres opptil 40 grader og ned til -90 grader. På benk med tre puter kan fotputen justeres opp til 63 grader. Den femdelte benken kan man i tillegg justere armputene. Dette gjør at benken har stor grad av fleksibilitet i forhold til undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Kunden kan velge mellom elektrisk eller hydraulisk løftemekanisme. Som standard leveres benken med sentralt hjulløftssystem og betjeningsbøyle for elektrisk hev/senk eller hydraulisk pumpe for hev/senk. Den elektriske hev/senk funksjonen har skinnekontroll og man kan velge mellom 2 monterte fotbrytere, håndkontroll eller fotbøyle.

Benken har en løftekapasitet på 170 kg, mens maks statisk ladet er 250 kg. Benken har en vekt på 75 kg. Standard lengde på putene er 197 cm og standard bredde 70cm. Benken kan heves til maks 97 cm og senkes til minimum 45 cm. Som ekstrautstyr tilbys banan, nesehullkloss og papirrullholder. Papirrullholder kan monteres i både fot- og hodeende.

Putene er lekkert utformet og har myk liggeflate som gir god komfort, noe pasienter setter stor pris på. Benkene leveres med skai i seks standard farger; sort, antrasitt, orkidé, cyclamen, eggeskall og kornblå. Understellet er laget av stål og leveres i en grå lakkutførelse som standard.

Follo Futura er ISO-sertifisert og produktene som produseres har vært gjennom bedriftens kvalitetskontroll. Alle benkene er CE-godkjente.

Benkene er i sin helhet produsert i Norge.

Vekt:	Løftekapasitet:	Max. statisk ladet:	Alternativ kontroll:
75 kg	170 kg	250 kg	a) Skinnekontroll for elektrisk hev/senk b) 2 monterte fotbrytere c) Håndkontroll

## Tekniske spesifikasjoner

### Elektrisk

Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:
113-119100-P	45-97 cm	196 x 70 cm	2	Elektrisk skinnekontroll
113-119100-B	45-97 cm	196 x 70 cm	3	Elektrisk skinnekontroll
113-119100-C	45-97 cm	196 x 70 cm	5	Elektrisk skinnekontroll

### Hydraulisk


Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:
113-119200-P	45-97 cm	196 x 70 cm	2	Hydraulisk
113-119200-B	45-97 cm	196 x 70 cm	3	Hydraulisk
113-119200-C	45-97 cm	196 x 70 cm	5	Hydraulisk

### Drenasje


Varenummer:	Høyde:	Lengde/bredde:	Antall puter:	Løftesystem:
113-119201-C	45-97 cm	196 x 70 cm	5	Hydraulisk
113-119201-B	45-97 cm	196 x 70 cm	3	Hydraulisk
113-119101-B	45-97 cm	196 x 70 cm	5	Elektrisk
113-119101-C	45-97 cm	196 x 70 cm	3	Elektrisk

## Justeringer


2 puter

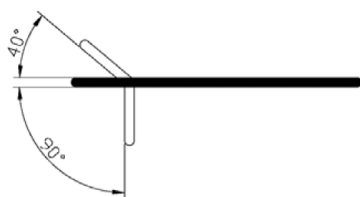

3 puter

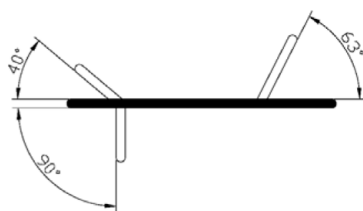

5 puter

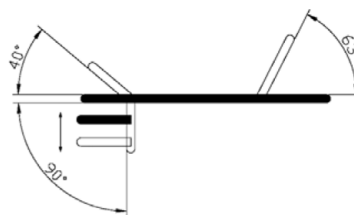

## Ekstra utstyr

Nesehullkloss 119-310056

Papirrullholder 119-40000-95



FOLLO FUTURA

ALFAcare

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden  
Tlf: 35 02 95 95 / post@alfacare.no / www.alfacare.no