

The Mediroyal logo consists of the brand name in a white sans-serif font, followed by a stylized white graphic of three overlapping curved shapes. This is set against a blue rectangular background with a thin yellow vertical stripe on the right side.


mediroyal

Orthoses are our passion

Håndterapi

Et utvalg av funksjonelle ortoser
fra MediRoyal

Material

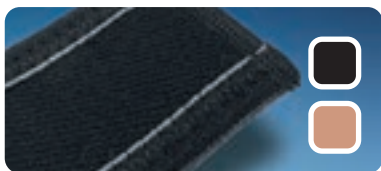

Mediroyal Origo™

Origo™ är ett nytt material med bra kompression och stabilitet samt hög komfort. Basen är bomull som blandats med nylon för att ge en mjuk och komfortabel känsla mot huden. Utsidan har en slitstark struktur och insidan en mjuk och komfortabel yta. Elastanfiber säkerställer kompressionen i materialet. Finns i Beige och Svart.



Mediroyal Ventus™

Ventus™ är ett material med en aktiv andningsfunktion. Kompositionen består av slitstark och smutsavvisande Lycra på utsidan och en komfortabel och mjuk microfleece på insidan. Mellan dessa två lager finns ett andningsaktivt membran som ger en effektiv ventilation i materialet. Beige och Svart.



Mediroyal Neptune™

Neptune™ är ett hydrodynamiskt material som tagits fram för att kunna torka snabbt efter det har blivit blött. Grunden är samma som de material som används för lågfriktionsdräkter inom simning. Utsidan består av en smutsavvisande och slitstark Lycra. Insidan är ett Melangematerial av hydrodynamisk microfiber som ger en svalkande och komfortabel känsla. Finns i Svart.



Mediroyal NRX®

NRX® är vårt nya neoprenmaterial tillverkad av 100% CR. Det ger en högre elasticitet och slitstyrka än vanliga neoprenmaterial. Materialet är laminerat med textiljersey för hög komfort. NRX® är också testat för hudirritation av SGS Ultra Trace & Industrial Safety Hygiene. Finns i Svart.




Mediroyal ARX®

ARX® är vårt nya tredimensionella material som ger en hög ventilation, tryckavlastning och hög komfort. Materialet har en komplex struktur som består av en dynamisk kärna av nylon. Ovan och undersidan är både komfortabel och slitstark. Konstruktionen ger en optimal elasticitet och kompression i kombination med en utmärkt ventilation. Finns i Beige och Svart.

NRX®, ARX® are registered trademarks of Mediroyal Nordic AB, Sweden

Handledsskenor

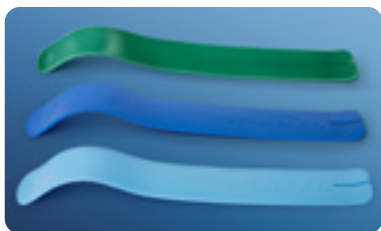

Mediroyal Handledsskenor

Mediroyal har arbetat med att ta fram en ny handledsskena som är mönsterskyddad. Den kan enkelt omformas med både varmluft och vatten. Designen har en delad kant nedtill på skenan för att ge mer dynamik och minska risken för tryck vid palmarflexion och belastning. Skenan finns i två olika längder och med två olika grader av stabilitet som anpassats till de olika materialen i Mediroyals handledsserier. Vår ljusblå skena är av samma stabilitet som vår gröna med skillnaden att den gröna har en lägre, neutral handledsvinkel som är speciellt lämplig vid karpaltunnelsyndrom.

Mediroyal har även tagit fram en förformad aluminiumskena för att komplettera handsortimentet. Skenan är tillverkad av aluminium i mediumstabil kvalitet som enkelt och snabbt kan justeras för hand. MR2293 passar alla korta handledsmodeller i Origo™, Ventus™ och Neptune™-serierna.



- MR2296 Kort Handledsskena Standard · Ljusblå · 5-pack
- MR2297 Kort Handledsskena Stabil · Marinblå · 5-pack
- MR2298 Lång Handledsskena Standard · Ljusblå · 5-pack
- MR2299 Lång Handledsskena Stabil · Marinblå · 5-pack
- MR2294 CTA-skena Kort · Grön · 5-pack
- MR2293 Handledsskena Aluminium · Svart · 10-pack

Orthoses are our passion

Innehåll	Sida
Material	2
Handledsskenor	2
Handled	4
Tumme	9
Viloskenor	13
Tonus	15
Ödemhandskar	16
Finger	17
Arm, Armbåge och Axel	20
Ortoser för barn	21
NRX Strap	22
Band och kardborre	24
Polstring	26
Thermoplaster	26
Hydrokollator	28
Bedömning	28
Träning	29
Tejp	30

Mediroyal – funktionell svensk design

Produktutveckling är en kombination av idéer, material, design och kunnande. Vi på Mediroyal har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla produkter som ger patienter ökad funktionalitet varje dag. För oss är ortoser en passion. Kvalitet, prestanda och design är alla faktorer som gör skillnad. Därför är vi extra stolta över att märka våra ortoser med Functional Swedish Design.



Handled



Origo · Kort eller Lång handled _____ ORIGO

Modell med justerbart tumgrepp. Bra kompression och stabilitet. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Nedtill är stadkanten öppen för optimal elasticitet. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Levereras med kort handledsskena stabil. På den långa modellen finns ett elastiskt kardborrband för extra stabilitet.

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid artrit, tendinit eller vid karpaltunnelsyndrom. Lång modell även för arbetsrelaterade aktiviteter, vibrationskador och partiell radialispareas.

- MR2260 – Kort · Svart · Höger / Vänster
- MR2210 – Kort · Beige · Höger / Vänster
- MR2261 – Lång · Svart · Höger / Vänster
- MR2211 – Lång · Beige · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	12–13	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Origo Pollus kort handled _____ ORIGO

Modell med justerbart tumgrepp och tumdel. Bra kompression och stabilitet. Den korta tumdelen ger ett bra stöd för CMC-leden och thenarmuskulaturen. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Nedtill är stadkanten öppen för optimal elasticitet. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Levereras med kort handledsskena stabil.

Indikationer: Vid reumatiska eller degenerativa besvär. Smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas RSI (Repetitive Strain Injury).

- MR2262 – Svart · Höger / Vänster
- MR2212 – Beige · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	12–13	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Origo · Kort handled med slutet tumgrepp _____ ORIGO

Modell med slutet tumgrepp. Bra kompression och stabilitet. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Nedtill är stadkanten öppen för optimal elasticitet. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Levereras med kort handledsskena stabil.

Indikationer: Handledsinstabilitet, artralgi (ledvärk, smärta), vid artrit, tendinit, post-operativt efter frakturer, karpaltunnelsyndrom.

- MR2263 – Svart · Höger / Vänster
- MR2213 – Beige · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	12–13	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Origo Tetra · Kort eller lång handled _____ ORIGO

Kort respektive lång modell speciellt anpassad för tetraplegiker genom att modellen är rakare skuren och något mindre än standardstorlekarna. I handflatan finns ett konstlädermaterial tillverkat av polyamid/polyuretan som ger både ett bättre grepp och ökad slitstyrka. Över handleden finns ett brett elastiskt kardborrband för ökad stabilitet över handleden. Formsydd i tre delar för optimal passform, med en lycra-plös för att förenkla appliceringen. Levereras med lång handledsskena stabil.

Indikationer: Vid stroke, traumatisk förvärvad hjärnskada. Vid MS i aktivitet. Vid arbetsrelaterade monotona, repetitiva inslag t ex musarm, tendinit.

- MR2267 – Kort · Svart · Höger / Vänster
- MR2268 – Lång · Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Ventus · Kort eller lång handled _____ VENTUS

Modell med justerbart tumgrepp. Slitstark och smutsavvisande Lycra på utsidan och mjuk microfleece på insidan. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. Dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka.

Indikationer: Vid smärta och ledvärk, tendinit, artrit vid RA, karpaltunnelsyndrom, vid neurologiska skador och sjukdomar. Postoperativ rehabilitering efter frakturer.

- MR2220 – Kort · Svart · Höger / Vänster
- MR2223 – Kort · Beige · Höger / Vänster
- MR2221 – Lång · Svart · Höger / Vänster
- MR2224 – Lång · Beige · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	12–13	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Ventus · Kort handled EZY _____ VENTUS

Modell framtagen för att göra appliceringen för patienten enklare. Som ett komplement till den vanliga kardborrstängningen finns en lycraplös som gör det enkelt att trä på handledsortosen som en handske. Modellen är helt baserad på MR2220 med samma passform och stabilitet. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenfickan av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Vid smärta och ledvärk, tendinit, artrit vid RA, karpaltunnelsyndrom, vid neurologiska skador och sjukdomar. Postoperativ rehabilitering efter frakturer.

- MR2226 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Ventus · Kort handled med tumme _____ VENTUS

Över tumdelen finns en flexibel stålskena och handledsskenan är standardskenan. Slitstark och smutsavvisande Lycra på utsidan och mjuk microfleece på insidan. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka.

Indikationer: Instabilitet i handled och tumme. Postoperativt efter fraktur, vid tendinit, vid reumatiska besvär tex artrit, Morbus De Quervain.

- MR2222 – Svart · Höger / Vänster
- MR2225 – Beige · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Ventus Pollus · Kort handled _____ VENTUS

Den korta tumdelen ger ett bra stöd för CMC-leden och thenarmuskulaturen. Slitstark och smutsavvisande Lycra på utsidan och mjuk microfleece på insidan. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka.

Indikationer: Vid reumatiska eller degenerativa besvär som smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas, RSI (Repetitive Strain Injury).

MR2227 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Ventus · Handled med snörning _____ VENTUS

Modellen har en snörning som gör applicering enklare för patienter som har begränsad greppfunktion. Snörningen tillsammans med lycraplösen gör det enkelt att applicera ortosen som en handske och sedan stänga med en hand. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart. Levereras med kort handledsskena standard.

Indikationer: Vid reumatiska besvär t ex artrit, smärta, svaghet, tendinit, handledsinstabilitet.

MR2229 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



Neptune · Kort eller lång handled _____ NEPTUNE

Modell med justerbart tumgrepp. Sval och snabbtorkande. Formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Levereras med kort handledsskena standard. Ortosen kan med fördel användas vid aktiviteter i blöta miljöer eftersom materialet torkar snabbt efter kontakt med vatten.

Indikationer: Handledsinstabilitet, smärta, svaghet, tendinit, karpaltunnelsyndrom, vid reumatiska besvär som artrit.

MR2230 – Kort · Svart · Höger / Vänster

MR2231 – Lång · Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	XXL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	21–23	



One Size · Tumme och Handled _____ ONE SIZE

En mjuk och smidig tum- och handledsortos tillverkad i neoprene. Ortosen ger ett lätt stöd för tummen och handleden och har en låg profil. Ovansidan är ett kardborretyg vilket gör att hakedelen kan fästas precis var som helst på ortosens yta. Insidan har ett hudvänligt och komfortabelt nylonmaterial.

Indikationer: Handledsinstabilitet och lättare problem från CMC-leden, vid artrit eller tendinit.

MR8809 – Svart

Size	Universal						
cm	12–20						



Manex Tendens^{NT} _____

Ortos utvecklad för patienter med arbetsrelaterade handledsproblem. Ger avlastning för senorna runt handleden och stödjer vid repetitiva rörelser. Designen gör att handflatan är fri och stödet ligger ulnart/radialt.

Indikationer: Vid arbetsrelaterad problematik med monotona repetitiva inslag till exempel musarm, tendinit, lateralepikondylit. Den fria palmara ytan gör ortosen lämplig vid exempelvis racketsporter och golf.

EU2055 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Manex Radius kort eller lång handled

Modell som ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger stöd men ändå flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig stängning med två D-ringar och en plös i lycra. Tumgreppet är justerbart. För utökat stöd finns denna ortos även i en lång variant.

Indikationer: Post frakturbehandling efter avgipsningar, vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

■ MR2290 – Kort · Svart · Höger / Vänster

■ MR2291 – Lång · Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Manex Radius Ease med snörning

Modell med snörning för enklare applicering. Designen ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger stöd men ändå flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig med snörning och plös i lycra. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Post frakturbehandling efter avgipsningar, vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

■ MR2292 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Manex Radial 2.0

NRX

Specialdesignad ortos för patienter med radialispare. Kan även användas av andra diagnosgrupper som exempelvis dropphand vid CVA. Ortosen kan ersätta och stödja svaga muskler och möjliggöra ett funktionellt grepp. Den består av en handledsdel med thermoplast, fingerplatta och tumdel samt ett skumband. Thermoplasten formas individuellt över handryggen med hjälp av varmt vatten. Ortosen blir då en dorsal skena där fingerplattan och tumdelen kan fästas in och ge en individuell extension av tumme och fingrar. Fri palmar yta.

Indikationer: Radialispare, dropphand vid CVA (Cerebrovascular Accident), vid karpaltunnelsyndrom, post-traumatiskt vid till exempel radiusfraktur eller vid ulnardrift av fingrar subluxation av MCP-leder till följd av RA.

■ MR2285 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Manex Radial 2.0 Fingerplattform, 3-pack

NRX

Fingerplattan för Manex Radial 2.0 i trepack. Fingerplattan kan appliceras på en individuellt anpassad thermoplastortos genom att bara fästa mjuk kardborre på ortosen. Därefter kopplas fingerplattan på och ger då en dynamisk individuell extension av MP-leder och fingrar.

Tips! Fingerplattan kan även appliceras på en individuellt anpassad ortoslösning

Indikationer: Radialispare, eller dropphand vid CVA (Cerebrovascular Accident).

■ MR2283 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Manex Radial 2.0 Tumdel, 3-pack

NRX

Tumdelen för Manex Radial 2.0 i trepack. Tumdelen kan appliceras på en individuellt anpassad thermoplastortos genom att bara fästa mjuk kardborre på ortosen. Tumdelen ger en dynamisk extension av tummen och kan också användas vid behandling av adduktionskontrakturer.

Tips! Tumdelen kan även appliceras på en individuellt anpassad ortoslösning

Indikationer: Radialispare, dropphand vid CVA (Cerebrovascular Accident) eller vid behandling av adduktionskontrakturer.

■ MR2284 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



BOA · Kort eller lång handledsortos

BOA

Handledsortos med fast tumgrepp, ger en bra stabilitet och jämn kompression för både mellanhand och underarm. Boa®-systemet, som består av ett vadersystem, gör att man kan reglera stödet exakt efter patienten. Under vadersystemet finns en triåplös för att förenkla appliceringen. Den levereras med en bred metallskena som kan justeras individuellt. Den korta modellen ger ett bra stöd volart/dorsalt samt viss stabilitet i pro/supination.

Indikationer: Skador över karpalbenen som lunatum, scaphoideum, triquetrum och pisiforme, skador över TFCC-komplexet, radiokarpalligamentsskador och behandling efter avgipsning.

■ MBA110 – Kort · Svart · Höger / Vänster

■ MBA111 – Lång · Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	XL	
cm	13–16	15–17	16–18	17–21	



BOA · Kort handledsortos med tumme

BOA

Denna handledsortos ger stöd för både handleden och tummen. Tumgreppet är justerbart med ett elastiskt band. Ortosen ger ett bra stöd och jämn kompression för både tumme, mellanhand och handled. Boa®-systemet förenklar applikationen för patienten och gör det enkelt att ge ett individuellt stöd. Levereras med en bred metallskena för handleden och en justerbar aluminiumskena för tummen.

Indikationer: Ulnara kollateralligamentsskador, skador över karpalbenen som lunatum, scaphoideum, triquetrum och pisiforme, skador över TFCC-komplexet, radiokarpalligamentsskador och behandling efter avgipsning.

■ MBA112 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	XL	
cm	13–16	15–17	16–18	17–21	

TFCC Handled och Armbågsortos

TFCC-ortosen utvecklades för att skapa ett kostnadseffektivt system som är snabbt och enkelt anpassat för patienten utan värme eller plast. Systemet består av en handledsortos som finns i tre olika längder. Håvarens längd avgör ortosens rotationstabilitet och som ett komplement till handledsortosen har vi också designat en modul armbågsdel som kan kopplas på handledsortosen för mer rotationskontroll. Armbågsdelen kopplas på under de första 2–3 veckorna efter avgipsning för att kontrollera pronation och supination. Därefter används enbart handledsortosen för att uppnå funktionell stabilitet under resterande tid för behandlingen.

För minskad risk för tryck samt för att motverka svullnad rekommenderas kompressionshandstrumporna i kombination med TFCC-ortosen.



TFCC Handledsortoser

Indikationer: Konservativ- eller post-operativt behandling av TFCC-skador, distala radiusfrakturer, mellanhandsfrakturer, instabilitet i handleden efter frakturer.

■ TFC101 – TFCC Handledsortos Kort · 25 cm längd · höger / vänster

■ TFC102 – TFCC Handledsortos Mellan · 28 cm längd · höger / vänster

■ TFC103 – TFCC Handledsortos Lång · 31 cm längd · höger / vänster

Size	S	M	L	
cm	12–15	14–18	17–23	



Kompressionshandstrumpor – Kompressionsklass 2

Indikationer: Ödem i handleden efter frakturimmobilisering.

■ TFC107 – Kort modell (passar TFC101 – höger och vänster)

■ TFC108 – Lång modell (passar TFC102 och TFC103 – höger och vänster)

Size	S	M	L	
cm	12–15	14–18	17–23	



TFCC Armbågsdel

■ TFC105 – Armbågsdel · Höger / Vänster

Size	1	2	3	
cm	19–23	23–28	28–34	



Origo · Kort / Mellan tumortos med skena _____ ORIGO

Tumortos i stabilt material som ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och ett lättare stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytt för att förhindra att handens valv pressas samman. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Kan anpassas med spiralfjäder eller flexistål (båda ingår), där flexistålet justeras individuellt efter patienten. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Skador orsakade av arbetsrelaterade situationer, t ex triggertumme, artros, artrit. Zig Zag tumme /skomakartumme vid RA.

- MR2364 – Kort · Svart · Höger / Vänster – Se bilden till vänster
- MR2314 – Kort · Beige · Höger / Vänster
- MR2365 – Mellan · Svart · Höger / Vänster
- MR2315 – Mellan · Beige · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Neptune · Kort / Mellan tumortos med skena _____ NEPTUNE

Sval och snabbtorkande tumortos. Ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och ett lättare stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytt för att förhindra att handens valv pressas samman. Skenficka av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Kan anpassas med spiralfjäder eller flexistål (båda ingår), där flexistålet justeras individuellt efter patienten. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Vid svaghet, smärta, artros i tummens CMC-led. Lämplig som arbetsortos där både finmotoriska och belastningsrelaterade moment ingår.

- MR2334 – Kort · Svart · Höger / Vänster – Se bilden till vänster
- MR2335 – Mellan · Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



ARX · Kort / Mellan tumortos _____ ARX

Tumortos i ARX®-material som ger bra ventilation, tryckavlastning och hög komfort. För ett bra stöd över thenarmuskulaturen och lättare stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytt för att förhindra att handens valv pressas samman. Skenficka tillverkad av dubbelvävd nylon maximal slitstyrka. Kan anpassas med spiralfjäder eller flexistål (båda ingår), där flexistålet justeras individuellt efter patienten. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: CMC ledsnärta, artros, reumatiska problem, artrit, överansträngning och vid stukning av led – ligamentskada.

- MR2376 – Kort · Svart · Höger / Vänster – Se bilden till vänster
- MR2374 – Kort · Beige · Höger / Vänster
- MR2377 – Mellan · Svart · Höger / Vänster
- MR2375 – Mellan · Beige · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · CMC Kort, tumortos

NRX

Tumortos tillverkad i NRX® designad för att ge ett individuellt anpassat stöd till CMC-leden. Ortosen har en ficka för thermoplast som formas efter användaren genom att hålla varmt vatten direkt i fickan. Ortosens yta består av ett kardborretyg och kardborre av formsprutad microhake som ger en extremt låg profil som gör den snäll vid mot huden vid kontakt. Haken fäster mycket bra mot ytan och klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna öppna. Justerbart tumgrepp.

Indikationer: Vid stukning, smärta, svaghet, överansträngd tumme, artrit, artros. Lämplig för att stimulera svaga muskler, öka rörelseomfång. Vid träning i aktivitet, precision och opposition.

MR2350 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · MCP Mellan, tumortos

NRX

Tumortos tillverkad i NRX® designad för att ge ett individuellt anpassat stöd till CMC- och MP-led. Ortosen har en ficka för thermoplast som formas efter användaren genom att hålla varmt vatten direkt i fickan. Ortosens yta består av ett kardborretyg och kardborre av formsprutad microhake som ger en extremt låg profil som gör den snäll vid mot huden vid kontakt. Haken fäster mycket bra mot ytan och klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna öppna. Justerbart tumgrepp.

Indikationer: Vid ulnar/radial kollateralligamentskada, degenerativa problem, zig zag tumme / skomakartumme till följd av RA.

MR2351 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · DeQ Lång, tumortos

NRX

Tumortos tillverkad i NRX® designad för att ge ett individuellt anpassat stöd till CMC- och MP-led. Längden gör den speciellt lämplig vid problem med De Quervain. Ortosen har en ficka för thermoplast som formas efter användaren genom att hålla varmt vatten direkt i fickan. Ortosens yta består av ett kardborretyg och kardborre av formsprutad microhake som ger en extremt låg profil som gör den snäll vid mot huden vid kontakt. Haken fäster mycket bra mot ytan och klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna öppna. Runt handleden finns ett elastiskt band för att ge ett effektivt handledsstöd. Justerbart tumgrepp.

Indikationer: Vid Morbus De Quervain, postop, vid tumfraktur /senskada, artrit. Lämplig vid tonusökning i tummen och för att bibehålla funktionell position i aktivitet, exempelvis spela golf.

MR2352 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · Opponent tumortos

NRX

Cirkulär tumortos med thermoplast som formas och anpassas individuellt hjälp av varmt vatten. Ortosen appliceras cirkulärt och spänns med hjälp av en D-ring och kardborre. Ortosen ger stöd och avlastning av thenar/hypothenar-muskulaturen. Kan både användas som dag och nattortos. Vid tumgreppet finns ett elastiskt hakband som kan fästas in mot ortosens yta för att ge mer specifikt stöd över exempelvis CMC-leden. Tumgreppet är justerbart.

Indikationer: Aktivitetsortos mot smärta, svaghet i muskulatur, inskränkt öppningsgrepp, ofrivilliga muskel-spänningar. Nattortos för avlastning, hindra / påverka adduktionskontrakturer. Postoperativt efter t ex interpositionsplastik i CMC-1 led.

MR2181 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · Tumme – OBS! Leveransklar Q3 2020

NRX

Mjuk, elastisk tumtortos i perforerad neopren som skyddar och avlastar tummen. Insidan är beklädd med vårt neptunematerial. Håller tummen i neutral position vid viloläge. Finns i två olika storlekar. MR201 är nättare och med ett smalare handledsband och MR202 är något längre och ger mer stöd över handleden. Kan klippas till önskad utformning vid behov.

Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

■ **NRX201 – Kort · Svart · Höger / Vänster** – Se bilden till vänster

■ **NRX202 – Lång · Svart · Höger / Vänster**

Size	1	2
cm	< 17	> 17

Om gränsvärde uppmäts bör den större modellen väljas



NRX · Tumme Thenar PLUS – OBS! Leveransklar Q3 2020

NRX

Baseras på NRX-tumme. Byggs vidare med ett dragband som ger extra stöd för CMC-leden och thenarmuskulaturen. Dragbandet kan fästas fritt då hela ytskiktet fungerar som fästyta.

Indikationer: Artros, CMC- eller MCP-ledsinstabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

■ **NRX211 – Kort · Svart · Höger / Vänster**

■ **NRX212 – Lång · Svart · Höger / Vänster** – Se bilden till vänster


Size	1	2
cm	< 17	> 17

Om gränsvärde uppmäts bör den större modellen väljas



Mediroyals Proxi™ är tillverkad av det populära Neptune™ materialet som är andningsaktivt, hydrodynamiskt och torkar snabbt. Proxi har en ny design där en membranfilm lamineras på textilen för att balansera elasticiteten i textildelen. Filmen ger extra stöd utan att någon skena behövs. Neptune™ materialets mjuka kardborretyta gör att lågprofilhaken kan fästas in enkelt och infästningen ger en mycket låg profil. Membranfilmen som lamineras på ortosernas yta är hygroskopisk och formar sig efter kroppsvärme. Detta gör att tumtortosen formar sig individuellt efter patienten efter några timmars användning. Designen gör att inga kantband behövs vilket gör det enkelt att justera ortosernas form vid behov med hjälp av en sax. Alla ytor kan klippas förutom där kardborren är infäst eller där en plastskena eventuellt löper.

I de lösningar där plastskenor är integrerade i ortoserna går det att justera passformen utan både värme och vatten.

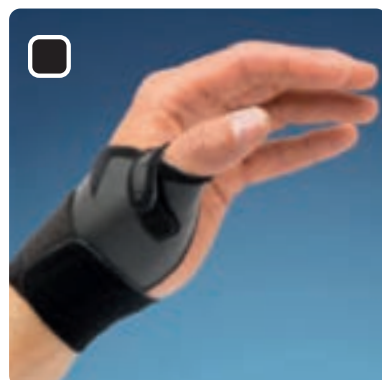

Proxi Light · tumtortos

PROXI

Proxi light har en ny design där en membranfilm lamineras på textilen för att balansera elasticiteten i textildelen. Filmen ger extra stöd utan att någon skena behövs. Neptune™ materialets mjuka kardborretyta gör att lågprofilhaken kan fästas in enkelt och infästningen ger en mycket låg profil. Membranfilmen som lamineras på ortosernas yta är hygroskopisk och formar sig efter kroppsvärme.

Indikationer: CMC- eller MCP-leds instabilitet, inflammation, stukningar, reumatoid artrit, degenerativa sjukdomar eller milda adduktionskontrakturer.

■ **MR2337 – Svart · Höger / Vänster**

Size	XS	S	M	L	XL
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22





Proxi Plus • tumortos

PROXI

Mediroyals Proxi™ Plus tumortos har en unik kombination av en individuellt anpassad tumortos i termoplast och ett textilt bandage. Stödet över tumdelen är tillverkat av termoplast, 1,6 mm Immo Plus® som lamineras och förformats för att stödja tummens CMC- och MCP-leder. Termoplasten ger ett utmärkt stöd, mycket låg profil och kan justeras enkelt utan behov av varken värme eller vatten. Böj bara ihop termoplastdelen lätt för att göra den mindre eller vik ut den lätt för att göra den större.

Indikationer: CMC- eller MCP-leds instabilitet, ligamentsskador, inflammation, stukningar, reumatoid artrit eller degenerativa sjukdomar.

MR2338 – Svart • Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Proxi DeQuervain • tumortos – OBS! Leveransklar Q3 2020

PROXI

Mediroyals Proxi™ DeQuervain är en kombination av en individuellt anpassad ortos i termoplast och en mjuk tumortos. Termoplastdelen har en öppning över extensorsenan vilket ger mindre tryck än vanliga tumortoser. Textildelen kan dessutom klippas upp för att minska trycket ytterligare. Ortosen har inga kantband vilket gör att hela ortosen kan enkelt anpassas med hjälp av en sax. Undvik att klippa över termoplastförstärkningen och kardborreinfästningen.

Indikationer: Morbus DeQuervain, tendinit, post-operativt efter CMC kirurgi

MR2339 – Svart • Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Proxi CMC • tumortos – OBS! Leveransklar Q3 2020

PROXI

Mediroyal Proxi™ CMC är en ortos som designats för patienter med CMC-1 problem. Designen har en förformad volar platta i termoplast som hjälper till att positionera tummen och ge bättre ledutrymme över CMC-1 leden. Den volara plattan har en öppning över thenarmuskulaturen där ett semielastiskt kardborrband kan fästas in för att ge aktivt stöd och stödja tummen i abduktion. Det semielastiska hakbandet kan positioneras över CMC-1 leden för att ge stöd och fästas på den dorsala sidan.

Indikationer: CMC-1 relaterade problem, tumbasartros

MR2381 – Svart • Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



NRX · Ulnar Deviation Orthosis


NRX

Volar platta som är tillverkad av en formbar metallkärna. Lätt att justera och forma för stabilitet åt MP-lederna och även ge stöd åt det volara valvet.

Indikationer: Ulnardeviation av MP-lederna vid RA, inflammatoriska processer över MP-lederna, post operativt efter MP-plastiker, för att separera fingrarna vid problem med volarhygien eller för strokepatienter för att minska tryck palmart.

MR2202 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
mm	55–70	70–85	85–100	

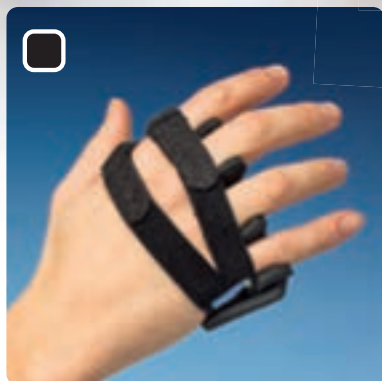

Manex Ulnar – NYHET!

Manex Ulnar är en handledsortos som utvecklats för att stödja och öka funktionen för patienter med ulnardeviation av MCP-lederna. Designen är gjord som en handske med snörning som stängning för att den skall vara lätt att applicera. Över MCP-lederna finns band för att stabilisera varje led individuellt.

Indikationer: Reumatoid artrit, ulnardeviation av MCP-lederna

MR2241 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	13–14	14–16	16–18	18–20	20–22	



Air-Soft · Stabil Viloortos

Viloortos som ger stöd för handled, tumme och fingrar med förstärkt aluminiumram. Breda band över handleden för extra stabilitet och band över handryggen som förhindrar att användaren kryper ur ortosen.

För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

Indikationer: Postoperativt vid skada, ödem, dropphand och vid stramhet i fingerflexorerna.

EU326 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	XL	
mm	57–70	70–85	85–95	95–105	



RHS · Hand- och fingerortos med tumabduktion


Handortos som positionerar handled, tumme och fingrar i en viloposition. Tumdelen är placerad i abduktion och kan ställas optimalt för att stödja tummen. Ortosen är tillverkad av en aluminiumram som kan ställas individuellt efter patienten. Kan både användas som dag och nattortos.

För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

Indikationer: Lätt till måttlig spasticitet, efter botulinumtoxininjektion, vid reumatoid artrit eller post-operativt efter skada.

MR327 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
mm	60–75	75–90	90–105	

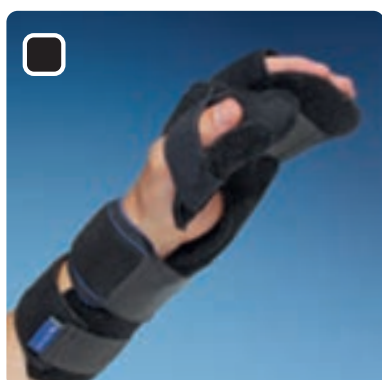




Dyflex®

DYFEX® står för Dynamic Finger Extension och är ett nytt koncept som utvecklats och patenterats av Mediroyal för patienter med spasticitet. Konceptet är en kombination av statisk och justerbar ortos, som kompletterats med två luftblåsor. Dessa luftblåsor är integrerade i fingerplattformen och ger stöd till handens tvärgående och längsgående valv. Blåsorna kompletterar fingerplattformens funktion genom att ge en dynamisk extension av fingrarna.

Indikationer: Produkten har designats för att ge ett funktionellt stöd för patienten med måttlig till hög spasticitet. Det fungerar också utmärkt för patienter som genomgår behandling med botulinumtoxin. Vid kontrakturer i handleden kan det vara svårare att nå effekt om kontrakturen är större än 45 grader volart.

MR328 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
mm	60–75	75–90	90–105	

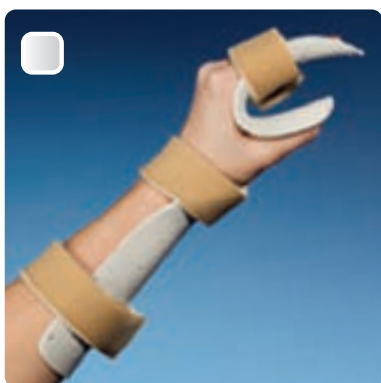


Skena i funktionsställning

Håller hand och handled i funktionell/viloposition. Handled 30 grader extension, MCP-leder 50 grader flexion, IP-leder 10–30 grader flexion. Tillverkad i 3,2mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa delar av skenan med vatten eller varmluft. Perforeringen är strategiskt placerad för att sörja för maximal ventilation utan att påverka skenans stabilitet. Ortosen inkluderar tryckavlastande kardborreband i materialet Velfoam. Höger- och vänstermodell.

Indikationer: Spasticitet, Cerebral Vaskulär Accident, kontrakturer

TH1004 – Vit / Beige · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
mm	57–70	73–83	86–95	

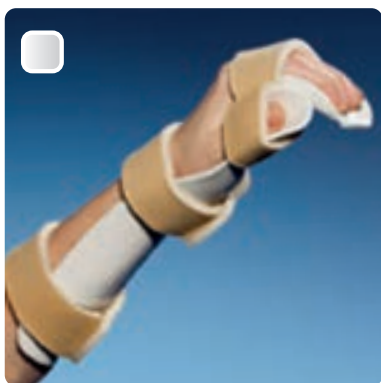

Skena i funktionsställning, stöd för tummens thenarmuskulatur

Håller hand och handled i handens viloposition. Handled 20 graders extension, MCP-leder 40 grader flexion, lätt flexion i IP-lederna. Tummen i palmarabducerat läge med stöd åt thenarmuskulaturen för att stabilisera, smärtlindra, motverka adduktionskontrakturer för ett bättre grepp. Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omformat och anpassa delar av skenan med vatten eller varmluft. Ortosen inkluderar tryckavlastande kardborreband i materialet Velfoam.

Indikationer: Vid kroniska sjukdomar, reumatoid artrit, postoperativ muskelförsvagning, förhindra kontrakturer vid stroke, slapp pares, spasticitet

TH1005 – Vit / Beige · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
mm	57–70	73–83	86–95	



Spasticitetsskena

Hjälper till att hålla handleden i neutral position och bibehåller tummens öppningsgrepp. Konen inhiberar långfingerspasticitet. Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Indikationer: Spasticitet eller för att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident)

TH1001 – Vit / Beige · Höger / Vänster


Size	S	M	L	
mm	57–70	73–83	86–95	

Tonus



Mediroyal TONUS™ är ett nytt system för tonusreducerande skenor vid spasticitet. Systemet kombinerar en stabil plattform som kan justeras individuellt till patienten i kombination med en uppblåsbar luftblåsa. Blåsan ger ett individuellt stöd över metakarpalbågen och en dynamisk finger- och handledsextension. Mediroyal TONUS™ finns i två basversioner, en med fixerad blåsa och den andra med en roterbar blåsa som kan ställas individuellt i ulnar- och radialdeviation. Cirkulär blåsa levereras endast med en fixerad blåsa.

TONUS™ Klädsel TONUS™-materialet har speciellt utvecklats för att ge både bra ventilation, kontroll av luftfuktighet och tryckavlastning. Neurologiska patienter har ofta känslig hud. Fuktighet i kombination med tryck ger lätt tryckproblem. Vi spenderade nästa två år för att utveckla det nya materialet. Kompositionen består av specialbehandlad ekologisk ull från både Norge och Nya Zeeland tillsammans med en PES-fiber som är ihållig. Materialet ger en optimal transport av fukt från huden i kombination med bra temperaturreglering. Det nya TONUS™ materialet är tvättbart i maskin i 60 grader för att kunna upprätthålla bra hygien.

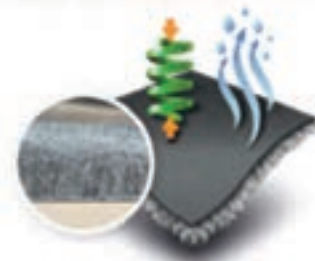

Tonus RG – Ringgrepp, fixerad blåsa eller med rotationsadapter

Mediroyal TONUS™ är ett nytt system för tonusreducerande skenor vid spasticitet. Systemet kombinerar en stabil plattform som kan justeras individuellt till patienten i kombination med en uppblåsbar luftblåsa. Blåsan ger ett individuellt stöd över metakarpalbågen och en dynamisk finger- och handledsextension. Mediroyal TONUS™ med ringgreppsbåsa finns i två basversioner, en med fixerad blåsa och den andra med en roterbar blåsa som kan ställas individuellt i ulnar- och radialdeviation.

TON405 – Plattform med fixerad blåsa, komplett ortos

TON406 – Plattform med rotationsadapter, komplett ortos

Size	Kort	Standard	Lång	
mm	45–90	90–130	90–130	



Tonus C – Cirkulär blåsa, fixerad blåsa

Mediroyal TONUS™ är ett nytt system för tonusreducerande skenor vid spasticitet. Systemet kombinerar en stabil plattform som kan justeras individuellt till patienten i kombination med en uppblåsbar luftblåsa. Blåsan ger ett individuellt stöd över metakarpalbågen och en dynamisk finger- och handledsextension. Mediroyal TONUS™ med cirkulär blåsa levereras med en fixerad blåsa.

TON407 – Plattform med cirkulär, fixerad blåsa, komplett ortos

Size	Standard	Lång	
mm	90–130	90–130	



Tonus Hand Roll

TONUS™ Hand Roll är en ortos som fungerar utmärkt för att öppna fingrarna och minska risken för tryck i vola. Patienter som haft fingerkontrakturer under en längre tid har oftast en ökad risk för att få problem med hygien och tryckproblem i vola och över fingrarna. Detta kan leda till problem med trycksår och lokala hudinfektioner. TONUS™ Hand Roll kan användas för både tryckavlastning och också hjälpa med att extendera fingrarna.

Indikationer: Fingerkontrakturer, tryckproblem över fingrar eller i vola eller vid spasticitet.

TON403 – Tonus Hand Roll · Höger / Vänster

Universalstorlek



Tonus Fingerseparationsband

Detta band har designats för att kunna separera fingrarna och kontrollera måttlig ulnar- och radialdeviation när man använder TONUS™-skenan. Fingerslyngor tillverkade av Ventus™-material är mjukt, andningsaktivt och ger hög användarkomfort. I varje ände på bandet finns två NRX® microhakar som fästs i mot skenans undersida. Vid problem med ulnardeviation fästs det radiala bandet först därefter det ulnara bandet.

Indikationer: Fingersepareringsproblem, hygienproblem mellan fingrarna, tryckproblematik eller vid ulnar-/radialdeviation

TON812-U – Tonus Fingerseparationsband

Universalstorlek

Ödemhandskar



Bilateral ödemhandske

Mediroyal ödemhandske är av universal modell för höger och vänster, vilket minskar behovet av antal handskar på lagret. Tillverkad av samma kompressiongivande och komfortabla lycramaterial som våra andra handskar. Handsken är sydd med öppen overlock-söm för att möjliggöra justeringar enkelt. Nedtill har handsken ingen söm för att kunna fungera optimalt. Handsken kan tvättas i maskin om du använder en tvättpåse. Skall dropp-torka därefter, får inte tumlas.

910 – Beige Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	XL
cm	15–18	18–20	20–22	22–24	24–27



Ödemhandske · Slutna fingertoppar, Kort / Lång

Ödemhandske med sömmar på utsidan, för att minimera tryck. Material i nylon och Lycra. Latexfria. tillverkad i rip-stop-söm.

Indikationer: Förebyggande och postoperativ ödembehandling eller ödembehandling efter stroke

903 – Kort · Beige Höger / Vänster

905 – Lång · Beige Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L
mm	178	203	228	255



Ödemhandske 3/4, silikonbelagd

Ödemhandske med silikongrepp. Material i nylon och Lycra. Latexfria. tillverkad i rip-stop-söm.

Indikationer: Förebyggande och postoperativ ödembehandling eller ödembehandling efter stroke

906 – Beige Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L
mm	178	203	228	255



Ödemhandske · Öppna fingertoppar, kort

Ödemhandske med öppna fingertoppar. Material i nylon och Lycra. Latexfria. tillverkad i rip-stop-söm.

Indikationer: Förebyggande och postoperativ ödembehandling eller ödembehandling efter stroke

902 – Beige Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L
mm	178	203	228	255



Fingerhylsor för ödem

Hylsorna är tillverkade i samma kompressionsgivande Lycramaterial som våra ödemhandskar. Fingerhylsorna är speciellt sydda för att kunna överlappa omkretsmått från 30 mm upp till 85 mm beroende på storlek som används. Sömmen är en så kallad rip-stop söm som inte löper och hylsan kan därför klippas i önskad längd. Vid högre belastning kan sömmen brännas lätt med öppen låga för att fästas. Fingerhylsorna finns i fyra olika storlekar.

908 – Beige · 5-pack

Storlek i mm	XS	S	M	L
A. Distalt omkretsmått	20–30	30–40	40–50	50–60
B. Proximalt omkretsmått	40–55	50–65	60–75	70–85



Isotonerhandske 3/4-finger

Latexfria handskar med lätt kompression för lätt smärta och svullnad av handen. Mjuk, sömlös konstruktion som eliminerar tryckpunkter. Sömmarna är vända på utsidan av handsken, bort från huden. Isotonerhandsken är den enda tillgängliga handsken utan sömmar vid basen av tummen - ett känsligt område för smärta. Tillverkad av nylon och Lycra och tvåvägsriktning på materialet. Behagliga för heldagsanvändning. Öppen fingertoppsdesign för en aktiv hand. Säljs i par. Utformade för långtidsanvändning.

Indikationer: Svullnad/smärta orsakad av skada artrit eller andra kroniska orsaker långtidsanvändning i arbete

907 – Beige · Levereras i par (1 st höger och 1 st vänster)

Size	S	M	L
mm	203	228	255





Tvillingförband

Ett tvättbart antiglidskumfodrat, ventilerande material som erbjuder en enastående komfort, genom att materialet ligger tätt intill huden vilket hindrar glidning. Latexfritt. Idealiskt för användning under arbete, fritids- och sportaktiviteter och långtidsanvändning.

Indikationer: Lätta distorsioner. Öm, svullen led med partiell/total ligamentsskada i PIP-leden. Lätta stabila frakturluxationer, behandling upp till sex veckor.

- 1005-5 Tvillingförband, 13 mm, 5-pack
- 1005-25 Tvillingförband, 13 mm, 25-pack
- 1005-50 Tvillingförband, 13 mm, 50-pack
- 1005-100 Tvillingförband, 13 mm, 100-pack
- 1003-5 Tvillingförband, 19 mm, 5-pack
- 1003-25 Tvillingförband, 19 mm, 25-pack
- 1003-50 Tvillingförband, 19 mm, 50-pack
- 1003-100 Tvillingförband, 19 mm, 100-pack
- 1007-5 Tvillingförband, 26 mm, 5-pack
- 1007-25 Tvillingförband, 26 mm, 25-pack
- 1007-50 Tvillingförband, 26 mm, 50-pack
- 1007-100 Tvillingförband, 26 mm, 100-pack

Size	Universal
------	-----------



ARX · Tvillingförband



ARX® Tvillingförband består av två mjuka textilmaterial som fäster effektivt mot sig själva, utan varken klistor eller hake. Magiskt!

- EU448015 Tvillingförband, Svart, 13 mm, 50-pack
- EU448014 Tvillingförband, Svart, 13 mm, 25-pack
- EU448013 Tvillingförband, Svart, 13 mm, 5-pack

Size	Universal
------	-----------



Oval-8 Fingerring

Stabiliserar-avlastar och/eller korrigerar fingrarnas IP-leder. Säljes separat och/eller flerpäck. Ändring av ortosens vinkel justeras enkelt med varmluftspistol.

Indikationer: Korrigerar svanhals-, Boutininié- och malletfinger, reducerar lateraldeviation av fingret och avlastar vid triggerfinger.

- 1008 Oval-8 · 1 st
- 1008-5 Oval-8 · 5-pack
- 1008-S Oval-8 · 14-pack – 1 av var storlek 2–15
- 1008-K Oval-8 · 44-pack – Antal och storlekar enligt nedan

Antal	1	2	2	4	5	5	5	5	4	3	2	2	2	1
Storlek	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Size	2–15
	Tillgänglig i storlekar motsvarande standardstorlekar hos vanliga ringar



Open-Air STAX fingerskena Startset (40-pack) och 1-pack

Set med 40 stycken STAX-ortoser och 50 stycken band. Fingertoppskena som skyddar distala falangen och extenderar i DIP-leden. Tillverkad i genomskinlig klar plast. Perforerad design minskar hudpåverkan. Öppen topp möjliggör kontroll av fingertopp och nagelband. Självhäftande kardborrband säkrar ortosen på fingret. Bandet appliceras genom spåret i ortosen.

635 Startset – 40-pack

Storlek*	0	1	2	3	3,5	4	5	5,5	6	7
Antal	2 st	3 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st	5 st	3 st	2 st


*Storlekar angivna i standardstorlekar hos vanliga ringar



STAX Fingerskena – 1-pack

Art.nr	620	621	622	623	6235	624	625	6255	626	627
Storlek	0	1	2	3	3,5	4	5	5,5	6	7

*Storlekar angivna i standardstorlekar hos vanliga ringar

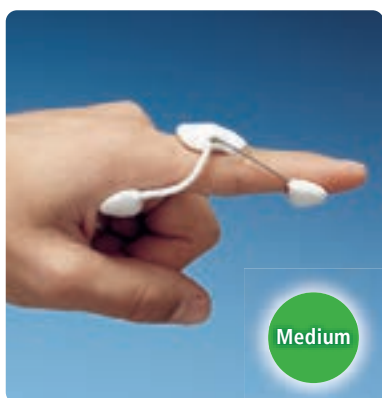


Extensionsfjäder-PIP lång

Sträcker i PIP-led och har en mild extensionseffekt på MCP-leden. Lämnar DIP-leden fri. Fingrfjädern åstadkommer en jämn tryckfördelning över PIP-leden genom den polstrade dorsala plattan.


Indikationer: Sträckdefekt i PIP-led, korrigering vid Boutinniéredeformitet och PIP-leds stramhet.

För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

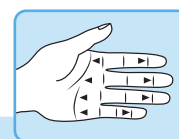

501

Size	XS (AA)	S (A)	M (B)	L (C)	XL (D)
Längd mm	57	67	76	89	109
Bredd mm	22	22	25	29	29

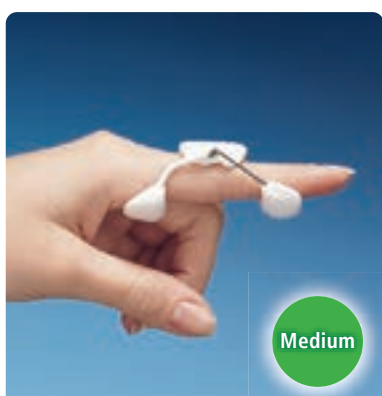


Extensionsfjäder-PIP kort

Påverkar inte MCP-leden men sträcker i PIP-leden. Mindre storlekar kan användas för DIP-leden. Fjädern kan enkelt justeras vid svullnad.


Indikationer: Sträckdefekt på PIP-led för att öka extension. Minskning av ledstramhet och korrigering av Boutinniéredeformitet.

För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

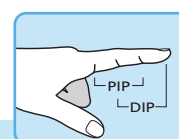

504


Size	XS (AA)	S (A)	M (B)	L (C)	XL (D)
Längd mm	44	48	51	57	67
Bredd mm	22	22	25	29	29

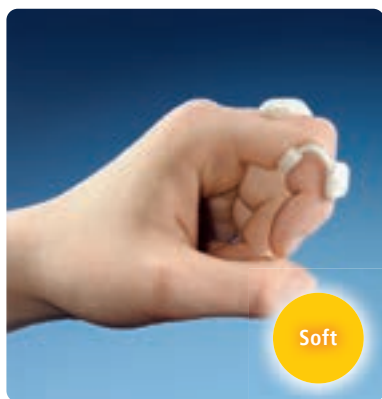

Fingerfjädr Flexion


Indikationer: PIP-ledsflexion vid kontraktur, reducera svanhalsdeformitet, krosskador.

För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

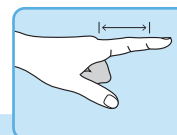

601

Size	XS (AA)	S (A)	M (B)	L (C)	XL (D)
Längd mm	44	48	51	57	67
Bredd mm	22	22	25	29	29

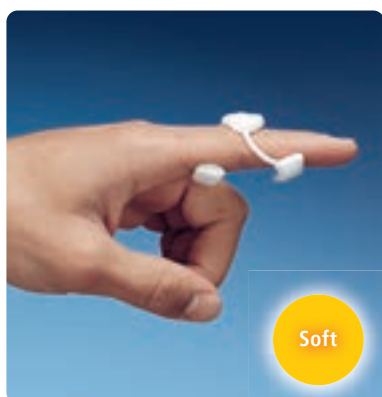


Fingerfjädr Extension – PIP, låg fjäderspänning

Fingerfjädrern åstadkommer en smidig sträckning av leden fullt ut. Låg fjäderspänning för att reducera PIP, DIP eller IP-leds flexionskontraktur. Lämplig att bära under längre tid på grund av den låga fjäderspänningen.

Indikationer: Krosskador, brännskador, Boutonniéredeformitet, begynnande kontraktur i PIP-led.


För fler utföranden besök vår hemsida www.mediroyal.se

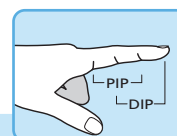


602

Size	XS (AA)	S (A)	M (B)	L (C)	XL (D)
Längd mm	44	48	51	57	67
Bredd mm	22	22	25	29	29


Mätinstruktioner för anpassning av fingerfjädrar

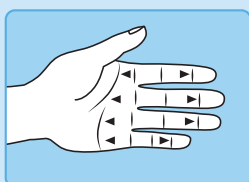

Längd och bredd i mm. Avståndet mäts från det distala böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. Fingret ska vara sträckt vid mätningen.

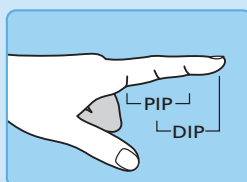

Längd och bredd i mm. Mät avståndet från den volara ytan av fingret från fingerbasen av MCP-leden.

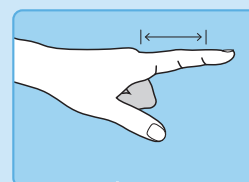


Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av fingret. Från fingerbas till DIP-led som indikeras på illustrationen.

Fingerfjädrar – direktiv för praktisk användning

Fingerfjädrar – kraft och spänning

Fjäders spänning	Extension / modell	Kraft mot leden	Flexion /modell
X-hard	502	12,4 N full extension	
Hard	507	3,4 N 15° flexion	
Medium	501	2,3 N 15° flexion	503
Medium	504	2,3 N 15° flexion	
Soft	602	1,1 N 15° flexion	601

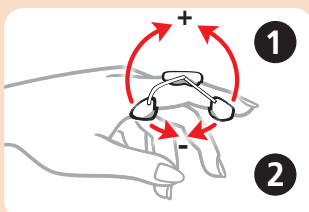

Samtliga fingerfjädrar är möjliga att justera spänningen på.

1 + Öka spänningen – Dra isär skänklarna innan fjädern placeras på fingret.

2 - Minska spänningen – Dra samman skänklarna innan fjädern placeras på fingret.

Arm · Armbåge · Axel



EpiArc · Epikondylitspänne

Ger bra avlastning vid laterala epikondylitproblem (tennisarm). Stor kontaktyta. Insida belagd med silikon för en tidig signal från underarmens extensormuskler. Silikonet ger ett säkert grepp vilket förhindrar att ortosen glider. EpiArc kan också användas vid mediala epikondylitproblem (golfarmbåge). EpiArc™ har en polstring tillverkad av NRX-material vilket ger en lokal värmeökning, för ökad elasticitet och smärtlindring.

Indikationer: Lateral eller medial epikondylit.

MR2500 – Svart

Size	XS	S	M	L	XL	
cm	21–24	24–25	26–27	28–29	30–33	



One Size · Tennisarmbåge

Detta bandage ger en avlastning och kan reducera smärta vid tennisarmbåge. Under spännet ligger en kudde som ger ett lätt tryck.

Indikationer: Smärttillstånd vid tennisarmbåge

SRX215 – Svart

Size	Universal	
cm	20–32	



Ulnaris Armbågsortos

Armbågsortos med flera användningsområden både under dagtid och nattetid. Tillverkad i ventilerande och andningsaktivt material. Kardborrestängningen är av omlott-typ och kan enkelt justeras. Över armbågsregionen finns en ficka med ett viskoelastiskt skum för en tryckavlastande effekt. I armvecket finns två möjligheter till att förhindra flexion av armbågsleden – dels finns en aluminiumska i en ficka, men vid behov av kraftigare stöd finns en thermoplastdel som formas individuellt med hjälp av varmvatten.

Indikationer: Ulnarisentrapment/Kubitaltunnelsyndrom, post-frakturbehandling

MR2250 – Beige

Size	Small / Medium	Large / X-Large	XX-Large	
cm	20–25	25–31	31–38	



One Size · Armbågsortos

Lätt stöd över armbågen, förhindrar flexion i leden

Indikationer: Smärta i armbågen, Lättare instabilitet, inflammation

MR8820 – Svart

Size	Universal	
cm	20–30	



ErixThree Neuro · Axelortos – komplett

Axelortos för patienter med sublaxationsproblem, vid exempelvis stroke eller neurologiska sjukdomar, som behöver hjälp att lyfta och hålla axelleden på plats.

Indikationer: Anterior sublaxation av axelleden efter stroke eller neurologisk sjukdom instabilitet av axelleden efter trauma eller vid behov av stabilitet och avlastning av axelleden.

NRX940 – Svart · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	
cm	22–24	24–28	28–32	32–35	35–38	38–42	

Ortoser för barn



Manex Rheuma Barn

Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar vid handleden och underlättar handfunktion för lek och aktivitet. Handledsstöd som kan underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp.

Indikationer: Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn

MR2920 – Svart · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	
cm	8,5–10	10–11	11–13	13–14	14–15	15–17	



Manex Rheuma Pollus-Kidz

Handledsortos för barn, med en tumdel i 0,8 mm plast. Manex Rheuma Pollus-Kidz har utvecklats för att underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsättning för grepp. Tumdelen håller tummen i funktionsställning och ger stöd åt tummen i abduktion.

Plastdelen formas för hand och håller sedan formen utan att man behöver använda varmt vatten.

Indikationer: Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och skona leder hos barn.

MR2921 – Svart · Höger / Vänster

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	
cm	8,5–10	10–11	11–13	13–14	14–15	15–17	



Thenax Rheuma Form AT-Kidz

En tumortos för barn med thermoplast. Thermoplasten kan formas direkt i fickan eller separat och sedan stoppas in i fickan. Ortosen ger ett bra individuellt stöd och hög komfort.

Indikationer: Ge stöd – främja öppningsgrepp i CMC-led1, stimulera svaga muskler, öka rörelseomfånget, vid träning i aktivitet-precision-opposition.

MR2922 – Svart · Höger / Vänster

Size	XS	S	M	L	
cm	8,5–10	10–11	11–13	13–14	



Thenax Opponent Kidz

En tumortos med thermoplast. Ger stöd för, och avlastning av, thenar/hypothenar-muskelaturen. Platen kan formas antingen direkt i fickan med varmt vatten eller så formas platen separat och stoppas in i fickan. Ortosen maximerar ledutrymmet, behåller rörligheten och undviker tryck på CMC 1-leden. Det påsydda extrabandet vid tumgreppet ger extra stabilitet kring MCP och CMC-1 leden. Bandet kan klippas bort om funktionen inte behövs.

Indikationer: Aktivitetsortos mot smärta, svaghet i muskulatur, inskränkt öppningsgrepp. Bättre förutsättning för aktiviteter dagtid. Håller CMC 1-led i palmarabduktion.

MR2923 – Svart · Höger / Vänster

Size	S	M	L	
cm	10–11	12–13	13–14	

NRX Strap

NRX® Strap utvecklades av Mediroyal som en ny möjlighet vid ortos-behandling. Vi såg behovet för ett flexibelt system som kan användas både som ett diagnostiskt verktyg men också som ett individuellt stöd under rehabilitering.

NRX® Strap kan också användas som en permanent ortoslösning på patienten. Den kontrollerade elasticiteten i banden ger möjlighet till att ge individuell kompression beroende på appliceringen.

Om mer stöd behövs utan att kompressionen ökas kan en förstärkning appliceras på bandet för att ge mer specifikt stöd. NRX® Strap kan klippas med en vanlig sax och textilytan fransar inte upp sig. Det gör att man kan klippa hål i materialet för att använda det som ett individuellt extensions/flexionsdrag.

– NRX® Strap ger dig obegränsade möjligheter!



Jämför material och egenskaper

NRX® Strap	NRX® Strap Colors	NRX® Strap Double	NRX® Strap PLUS	NRX® Strap SOFT
- Medium stabilitet - Hög elasticitet - Friktionsyta på insidan	- Medium stabilitet - Hög elasticitet - Friktionsyta på insidan	- Medium-hög stabilitet - Medium-kontrollerad elasticitet - Kardborretyg på båda sidorna	- Hög stabilitet - Ingen elasticitet - Friktionsyta på insidan	- Medium stabilitet - Begränsad elasticitet - Ventilerande - Självhäftande
Används för alla typer av basapplikationer, där man önskar god friktionseffekt mot huden.	Används för alla typer av basapplikationer, där man önskar god friktionseffekt mot huden.	Används som ankare över bäcken eller som rotatorrem. Kan också användas runt bälten om ingen hudfriktion behövs.	Används som stabilisering över NRX® Strap och NRX® Strap Double för mer lokal stabilitet eller korrigering	Kan användas på alla extremiteter för lätt stöd och skydd.

NRX® Strap kan maskintvättas i 60 grader C för att kunna upprätthålla en säker hygien.



NRX Strap

NRX

Detta är vårt mest använda band med mediumstabilitet och hög-elasticitet. Insidan på materialet är microperforerat och har en friktionseffekt mot huden vilket ger stimulans till hudens mekanoreceptorer. Ovasidan har ett mjukt kardborretyg som NRX® lågprofilkardborren fäster mot för en säker applicering.

NRX® Strap kan användas för de flesta basapplikationer och kan förstärkas eller kombineras med NRX® Strap PLUS eller NRX® Double för individuellt stöd och korrigering.

30 mm och 50 mm bredderna inkluderar 10 st kardborrestängningar i förpackningen.
110 mm bredden inkluderar 5 st kardborrestängningar.

- EU446030 NRX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Svart
- EU446050 NRX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Svart
- EU446110 NRX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Svart



NRX Strap Colors

NRX

NRX® Strap Colors har samma egenskaper som NRX Strap (se ovan) med alternativa färgvarianter.

30 mm och 50 mm bredderna inkluderar 10 st kardborrestängningar i förpackningen.
110 mm bredden inkluderar 5 st kardborrestängningar.

- EU446230 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Blå
- EU446330 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Vinröd
- EU446250 NRX® Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Blå
- EU446350 NRX® Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Vinröd
- EU446210 NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Blå
- EU446310 NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Vinröd



NRX Strap Double

NRX

NRX® Strap Double används mest vid applicering över höft eller bål när det inte behövs ett grepp på insidan mot huden. Stabiliteten är högre än i NRX® Strap med en mer kontrollerad stretch. Insidan och utsidan har samma elastiska kardborretyg. NRX® Strap Double kan också användas som ett rotationsband över exempelvis höften eller som ett lättare ankare när friktion inte behövs mot huden.

30 mm och 50 mm bredderna inkluderar 10 st kardborrestängningar i förpackningen. 110 mm bredden inkluderar 5 st kardborrestängningar. – Observera att 300 mm bredd inte inkluderar kardborredelar!

- EU447030 NRX® Double · 30 mm x 3,1 m · Svart
- EU447050 NRX® Strap Double · 50 mm x 3,1 m · Svart
- EU447110 NRX® Strap Double · 110 mm x 3,1 m · Svart
- EU447300 NRX® Strap Double · 300 mm x 3,1 m · Svart



NRX Strap PLUS

NRX

NRX® Strap PLUS har en hög stabilitet och ingen elasticitet. Den har en friktionsyta på insidan. NRX® Strap PLUS används ofta som stabilisering över NRX® Strap och NRX® Strap Double för att ge mer lokal stabilitet eller korrigering. NRX® Strap PLUS kan också användas som ankare ovanför leder för att ge en säker infästning eller applicering.

30 mm, 50 mm och 80 mm bredderna inkluderar 10 st kardborrestängningar i förpackningen.
110 mm bredden inkluderar 5 st kardborrestängningar.

- EU449030 NRX® Strap PLUS · 30 mm x 3,1 m · Svart
- EU449050 NRX® Strap PLUS · 50 mm x 3,1 m · Svart
- EU449080 NRX® Strap PLUS · 80 mm x 3,1 m · Svart
- EU449110 NRX® Strap PLUS · 110 mm x 3,1 m · Svart



ARX Strap Soft

ARX

ARX® Strap Soft är ett band som fäster i sig själv utan att man behöver använda hakdelar. ARX® använder två olika typer av microfibr som hakar i sig självt. Materialet är patenterat. Ju mindre radien på applikationen är desto mer stabil blir appliceringen. Används med fördel för fingrar, tummar och handbaserade applikationer men fungerar även för armbåge. ARX® materialet är laserskuret i olika bredder för att minska risken för att det fransar upp sig. Det finns ingen hudfriktion på insidan utan bandet är mjukt och komfortabelt. ARX® materialet är helt andningsaktivt och kan tvättas i maskin i 40 grader C. Använd inte mjukmedel vid tvätt eftersom det skadar materialet och den självhäftande funktionen går förlorad.

- EU448030 ARX® Strap Soft · 30 mm x 3,1 m · Svart/Grå
- EU448050 ARX® Strap Soft · 50 mm x 3,1 m · Svart/Grå
- EU448110 ARX® Strap Soft · 110 mm x 3,1 m · Svart/Grå



NRX Lågprofilhake färdigstansade, förpackningar

NRX

De färdigstansade förpackningarna är samma som är inkluderade i NRX® Strap förpackningarna. De är förpackade i små påsar för direktapplicering.

- EU446001 NRX® Hake · Svart färdigstansad · 10 st/pack
– passar 30 mm bredd
- EU446002 NRX® Hake · Svart färdigstansad · 10 st/pack
– passar 50 mm och 80 mm bredd
- EU446003 NRX® Hake · Svart färdigstansad · 5 st/pack
– passar 110 mm och 300 mm bredd

Band och kardborre




NRX Double Soft Elastic _____ NRX

NRX® Double Soft Elastic är en hybrid mellan ett elastiskt band och ett statiskt band. Vid leverans är bandet statiskt men elasticitet kan arbetas upp genom att töja på bandet med handkraft. Det har en dubbelsidig mjuk yta för infästning med lågprofil kardborrband och kan klippas utan att fransa. Produkten är framtagen som ett ortosband vid tillverkning av ortoser i exempelvis thermoplast.

NRX® Double Soft Elastic har en god stabilitet men samtidigt följsamt över ortos- och anatomiska strukturer.


- ☒ EU450080 NRX® Double Soft Elastic · 80 mm x 3,1 m
- ☒ EU450110 NRX® Double Soft Elastic · 110 mm x 3,1 m

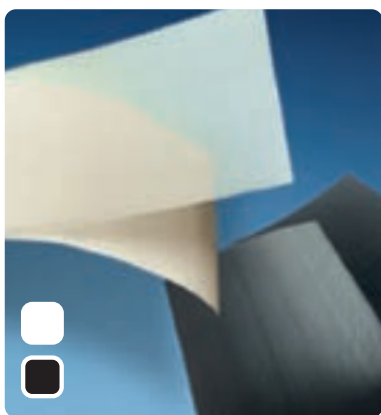

NRX Low Profile Hook _____ NRX

NRX® Low Profile Hook finns nu tillgänglig på rulle, både som självhäftande liksom med en mjuk textilyta som fäster bra mot kardborre.

- ☐ EU445060 NRX® Low Profile Hook, Självhäftande, Transparent, 50 mm x 25 m rulle
- ☒ EU445061 NRX® Low Profile Hook med mjuk toppyta, Svart, 50 mm x 25 m rulle

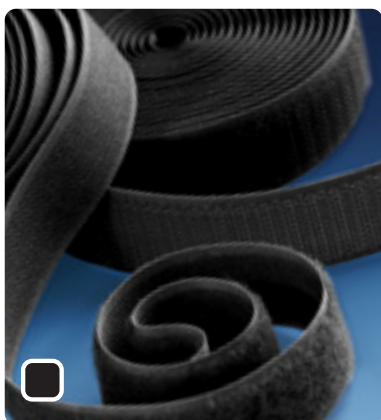

Kardborre · Svart, standard _____

Kardborre hak och mjuk, utan klister. Svart, oelastisk i flera bredder. Levereras i 25 meters rulle.

- ☒ EU445001 Kardborre Hak 16mm Svart, 25m
- ☒ EU445002 Kardborre Mjuk 16mm Svart, 25m
- ☒ EU445003 Kardborre Hak 20mm Svart, 25m
- ☒ EU445004 Kardborre Mjuk 20mm Svart, 25m
- ☒ EU445005 Kardborre Hak 25mm Svart, 25m
- ☒ EU445006 Kardborre Mjuk 25mm Svart, 25m
- ☒ EU445007 Kardborre Hak 30mm Svart, 25m
- ☒ EU445008 Kardborre Mjuk 30mm Svart, 25m
- ☒ EU445009 Kardborre Hak 38mm Svart, 25m
- ☒ EU445010 Kardborre Mjuk 38mm Svart, 25m
- ☒ EU445011 Kardborre Hak 50mm Svart, 25m
- ☒ EU445012 Kardborre Mjuk 50mm Svart, 25m



Kardborre · Vit, standard _____

Kardborre hak och mjuk, utan klister. Vit, oelastisk i flera bredder. Levereras i 25 meters rulle.

- ☒ EU445058 Kardborre Hak 20mm Vit, 25m
- ☒ EU445059 Kardborre Mjuk 20mm Vit, 25m
- ☒ EU445056 Kardborre Hak 30mm Vit, 25m
- ☒ EU445057 Kardborre Mjuk 30mm Vit, 25m
- ☒ EU445054 Kardborre Hak 50mm Vit, 25m
- ☒ EU445055 Kardborre Mjuk 50mm Vit, 25m



Kardborre · Beige, standard

Kardborre hak och mjuk, utan klister. Beige, oelastisk i flera bredder. Levereras i 25 meters rulle.

-  EU445016 Kardborre Mjuk 16mm Beige, 25m
-  EU445017 Kardborre Hak 16mm Beige, 25m
-  EU445018 Kardborre Mjuk 20mm Beige, 25m
-  EU445019 Kardborre Hak 20mm Beige, 25m
-  EU445020 Kardborre Mjuk 30mm Beige, 25m
-  EU445022 Kardborre Mjuk 50mm Beige, 25m
-  EU445023 Kardborre Hak 50mm Beige, 25m



Kardborre · Elastisk Mjuk

Kardborre elastisk och mjuk, utan klister. Svart och beige i två bredder. Levereras i 25 meters rulle.

-  EU445026 Kardborre Elastisk Mjuk 30mm Svart, 25m
-  EU445027 Kardborre Elastisk Mjuk 30mm Beige, 25m
-  EU445028 Kardborre Elastisk Mjuk 50mm Svart, 25m
-  EU445029 Kardborre Elastisk Mjuk 50mm Beige, 25m



Kardborre · Självhäftande Hak

Kardborre självhäftande hak. Svart, beige och vit i två bredder. Levereras i 25 meters rulle.


-  EU445050 Kardborre Självhäftande Hak 30mm Beige, 25m
-  EU445051 Kardborre Självhäftande Hak 30mm Svart, 25m
-  EU445049 Kardborre Självhäftande Hak 30mm Vit, 25m
-  EU445052 Kardborre Självhäftande Hak 50mm Beige, 25m
-  EU445053 Kardborre Självhäftande Hak 50mm Svart, 25m
-  EU445048 Kardborre Självhäftande Hak 50mm Vit, 25m



Kardborre · Lågprofil

Kardborre lågprofil mjuk, utan klister. Svart och marinblå i 50 mm. Levereras i 25 meters rulle.

-  EU445062 Lågprofil Mjuk 50 mm Svart, 25 m
-  EU445063 Lågprofil Mjuk 50 mm Marinblå, 25 m
-  EU445064 Lågprofil Mjuk 50 mm Beige, 25 m
-  EU445065 Lågprofil Mjuk 30 mm Svart, 25 m
-  EU445066 Lågprofil Mjuk 30 mm Marinblå, 25 m
-  EU445067 Lågprofil Mjuk 30 mm Beige, 25 m

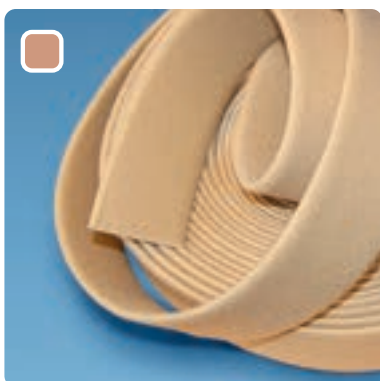

Velfoam · Ortosband

Ett skumband med öppna kanter för optimal tryckavlastning. Lämplig som tryckavlastande för större ortoser. Finns i beige kulör. Levereras i 9 meters rulle.

-  AC3006 Foam-Band, Beige, Semi-elastisk, 50 mm x 9 meter
-  AC3000-BG Foam-Band, Beige, 25 mm x 9 meter

Polstring



Mollskinn

Självhäftande mollskinn tillverkad av bomull. Latexfri.

 **AC3002** Mollskinn, bredd 30 cm, pris per meter



Ventus Fleece

VENTUS


Nu finns vår populära Ventus™ Fleece som självhäftande kantband och polstring. Materialet är tillverkad av spunnen polyester som ger en mjuk och komfortabel yta som dessutom släpper igenom fukt. Den självhäftande ytan har ett allergitestat och vattenbaserat lim som fäster mot de flesta textilier och plastmaterial.

-  **EU451300** Ark 30 cm x 1 m
-  **EU451020** Kantband 2 cm x 5 m

Thermoplaster



Lågtemperaturplaster ger en möjlighet till att individuellt tillverka och anpassa ortoser till patientens specifika behov. T-Tape Company är en av världens största tillverkare av termoplaster och Mediroyal är exklusiv distributör i Skandinavien.

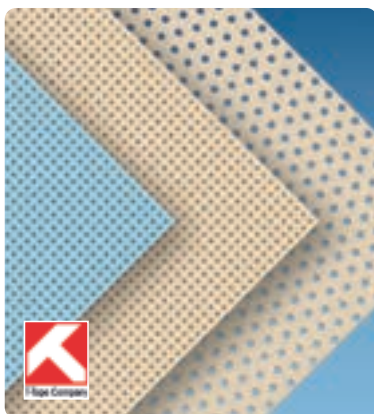

Turbocast®

Den klassiska termoplasten Turbocast som gör ortostillverkningen enklare. Plastens yta har ett tunt skumskikt som gör att den inte kladdar oavsiktligt. Vill du ha en infästning trycker du bara ihop ytorna och plasten laminerar. Enkelt att forma och med ett medelhögt minne. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och halvcirkulära ortoser.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
 T0810	0,8 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
 T1610	1,6 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
 T1612	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
 T2010	2,0 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
 T2012	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
 T2530	2,5 mm	Beige	Multi	45 x 60 cm



Turbocast® Comfort

Denna kvalitet är fodrad med en komfortabel flock-yta som ger en överlägsen komfort. Den ena sidan på materialet fäster och flocksidan är non-sticky. Vi rekommenderar att du använder mallar som kräver överlappsinfästning för bästa resultat. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för tumortoser och halvcirkulära ortoser.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
 TRC1610	1,6 mm	Beige	Micro	45 x 60 cm
 TRC2530	2,5 mm	Beige	Multi	45 x 60 cm



Immo Plus® Classic

Är ett lättarbetat material med hög formbarhet och som fäster i sig självt. Om materialet har lite vätska kvar blir det mer lättarbetat. Vid punktvärmning eller torrsvetsning blir lamineringen permanent. Rekommenderad temperatur 65–70° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och tum- och halvcirkulära ortoser.


Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
■ IB161	1,6 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
■ IRB161	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
■ IR161	1,6 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
■ IB201	2,0 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
■ IRB201	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
■ IR201	2,0 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
■ IB256	2,5 mm	Svart	Opti	45 x 60 cm
■ IRB256	2,5 mm	Blå	Opti	45 x 60 cm
■ IR256	2,5 mm	Röd	Opti	45 x 60 cm



Immo Plus® NS

Samma lättarbetade kvalitet som Immo Plus men detta material har en ytbeläggning på båda sidorna som gör att den inte fäster lika lätt som Classic-kvaliteten. Det gör att materialet kan bearbetas mer aggressivt vid mer komplicerade modeller och är mer motståndskraftig för fingeravtryck. Vid punktvärmning eller torrsvetsning blir lamineringen permanent. Rekommenderad temperatur 70–75° C. Lämplig för fingerortoser, tumortoser och tum- och halvcirkulära ortoser.


Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
■ IB161NS	1,6 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
■ IRB161NS	1,6 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
■ IR161NS	1,6 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
■ IB201NS	2,0 mm	Svart	Micro	45 x 60 cm
■ IRB201NS	2,0 mm	Blå	Micro	45 x 60 cm
■ IR201NS	2,0 mm	Röd	Micro	45 x 60 cm
■ IB256NS	2,5 mm	Svart	Opti	45 x 60 cm
■ IRB256NS	2,5 mm	Blå	Opti	45 x 60 cm
■ IR256NS	2,5 mm	Röd	Opti	45 x 60 cm

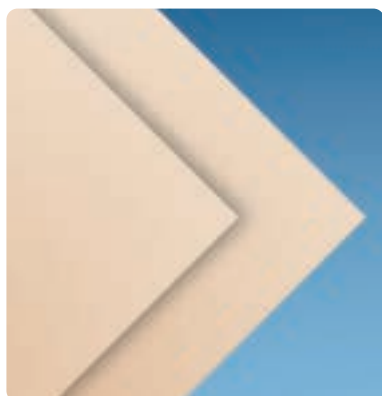

Drape

Drape har formgivits för att ge en mycket hög formbarhet och samtidigt en kontrollerad stretch. DeRoyal Drape får mjuka runda kanter efter uppvärmning. Hantera plasten efter uppvärmning med blöta fingrar för att minimera risken för fingeravtryck. Utmärkt för postoperativa ortoser eftersom plasten formar sig lätt. Värm i vatten 70–75° C i ca 1 minut. För maximal vidhäftning, skrapa ytan och värm med varmluft. Plasten kan kavlas för en tunnare tjocklek.

Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
■ TH3050-18	3,2 mm	Beige	Operforerad	30 x 45 cm
■ TH3035-18	1,6 mm	Beige	Operforerad	30 x 45 cm

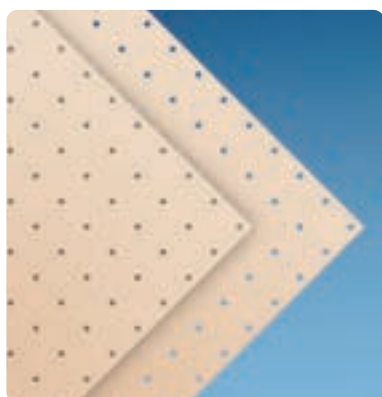

Blend

Ett mycket lättarbetat material som påminner om DeRoyal Drape men med ett högre minne och mer kontrollerad stretch. Materialet är dessutom ytbehandlat vilket innebär att ytan är mindre självhäftande och mindre känslig för fingeravtryck. DeRoyal Blend krymper inte och får mjuka och runda kanter efter uppvärmning. Värm i vatten 70–75° C i ca 1 minut. För maximal vidhäftning, skrapa ytan och värm med varmluft. Pressa ihop.


Art.	Tjocklek	Färg	Perforering	Arkstorlek
■ TH1050-18	3,2 mm	Beige	Mini	30 x 45 cm
■ TH1030-18	2,4 mm	Beige	Mini	30 x 45 cm



Pre-cut Tumortos Gauntlet

Förformad plast för tillverkning av tumortos Gauntlet. Formas med vattenbad och/eller värmepistol.

- PRE111 Turbocast, 1.6 mm, Micro perfo, Beige
- PRE113 IMMO Plus Classic, 1.6 mm, Micro perfo, Marinblå
- PRE114 IMMO Plus Classic, 1.6 mm, Micro perfo, Svart
- PRE115 IMMO Plus NS, 1.6 mm, Micro perfo, Svart

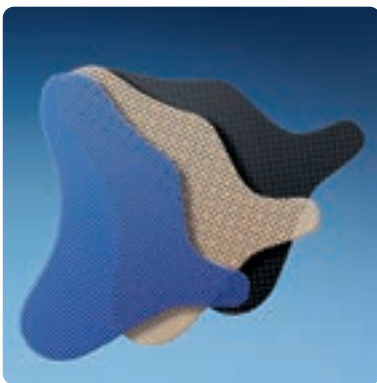

Pre-cut Tumortos Christine

Förformad plast för tillverkning av tumortos Christine. Formas med vattenbad och/eller värmepistol.

- PRE102 Turbocast Comfort, 1.6 mm, Micro perfo, Beige – Vänster
- PRE102 Turbocast Comfort, 1.6 mm, Micro perfo, Beige – Höger

Universal

- PRE101 Turbocast, 1.6 mm, Micro perfo, Beige
- PRE103 IMMO Plus Classic, 1.6 mm, Micro perfo, Marinblå
- PRE104 IMMO Plus Classic, 1.6 mm, Micro perfo, Svart

Hydrokollator



Hydrokollator 22 liter

Mediroyal's Hydrokollator är tillverkad i rostfritt stål och har ett tättslutande lock som enkelt kan öppnas. Badet är mycket välisolerat vilket gör att det håller värmen bra och minskar energiåtgången. Hanterar hela ark. Den här hydrokollatorn har genomgått tester enligt EMC 89/336 EEG och är CE-märkt i enlighet med 93/42/EEC.

- Levereras komplett med tättslutande lock
- Levereras med ett bottennät vilket förhindrar att plast bränner fast
- Avtappningskran på framsidan för enkel tömning och rengöring av badet
- Digital termostat som kan ställas in mellan 30–95°C
- 22 liter

Tekniska data: 220V/50Hz/1,8kW, Temperatur: 30–95 °C. Tillverkad i rostfritt stål.
Yttermått: 570 x 420 x 280 mm. Innermått: 485 x 350 x 130 mm.

WDB 2/4 Hydrokollator



Bedömning



EVA Brädan

EVA-brädan är ett pedagogiskt bedömnings- och handträningshjälpmedel för patient och behandlare. Brädan lockar fram handens naturliga rörelsemönster. Tränar rätt redan vid första behandlingstillfället. Ett enkelt sätt att identifiera och klargöra svårighet av funktionsnedsättning vad avser handens öppningsgrepp, helhandsgrepp, krokgrepp samt fingrarnas ledrörlighet.

MR2800 EVA Brädan



mediroyal 

AlfaCare AS
Heddalsveien 11, Bygg 140, 3674 Notodden
post@alfacare.no www.alfacare.no
Tel +47 35 02 95 95