

mediroyal 



**TULI'S**

  
**formthotics**<sup>TM</sup>

# MEDIROYAL SKOINLÄGG

  
**SPRINGER**



# SPRINGER




## B176423 • Comfort Springer med & utan pelott

Ett smidigt inlägg med thermoplastbotten överdragen med perforerat microskinn. Extra förstärkning över valvet ger ett mycket bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst. Går att beställa med eller utan pelott.



## B173423 • Comfort ¾-inlägg i microskinn

Ett smidigt inlägg med pelott och thermoplastbotten överdragen med ett perforerat microskinn. Extra förstärkning över valvet ger ett bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.

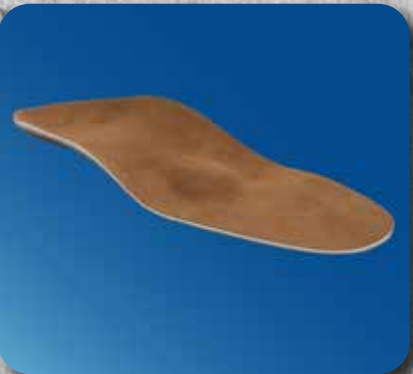

## B176487 • Comfort Springer med pelott, Beige

Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2 mm tryckavlastande PPT, överdragen med microfiber. Extra förstärkt över valvet vilket ger ett mycket bra stöd.



## B1763487 • City Springer ¾-inlägg med pelott, Beige

Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2 mm tryckavlastande PPT, överdragen med microfiber. Extra förstärkt över valvet vilket ger ett mycket bra stöd.

Skostorlekar: 35-48 Omformningsbara vid 110 ° C

### B5221 • Sarek ¾-inlägg

Sarek är en smidig trekvartslång sula med stöd för fotens längsgående valv, hålfoten. Den har en mjuk välbyggd gummipelott för varsam höjning och avlastning av det främre fotvalvet. Den här modellen är en tunn och smidig variant som passar i de allra flesta skor.

Dubbelstorlekar: 34/35-44/45



### B1000 • Sport

En sportsula i helfabrikat som kan värmas och justeras individuellt. Har en kärna av termoplast som ger bra stabilitet, överdragen med 1,5 mm PPT och 1 mm microperforerad EVA. Ger stöd över fotvalvet och avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster.



### B1730 • Fotbolls-inlägg ProPrio

ProPrio fotbolls-inlägg är speciellt framtaget för att ge en proprioceptisk effekt med hjälp av stödpunkter för foten. Dessa stödpunkter hjälper till att öka receptiviteten från foten och ger ett individuellt stöd. Inlägget är speciellt anpassat för fotbollsskor. Kommer med pelott. Tillverkad av en termoplastkärna som är överdragen med 1 mm EVA och slitstarkt microfiber. Skostorlek: 36-46.



Obs! Ej lagervara!

### B1003 • TOV Microfiber Beige

Inlägg med pelott som ger stöd över fotvalvet och avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster. Indikationer: vid plattfot, spretfot, pes valgus, posttraumatiska fotdeformiteter, hälsenebesvär och knä- och ryggsmärtor



Skostorlekar: 35-48 Omformningsbara vid 110 ° C

### B126292 • Pumpsinlägg med pelott

Pumpsinlägg är ett tunt inlägg som passar särskilt bra i skor med litet utrymme. Det är bekvämt och kan användas till klackar som är mellan 3-8 cm höga. Ger stöd för fotvalvet. Avlastar trycket på lederna. Lindrar knä- och ryggsmärta och ger ett korrekt gångmönster. Storlek: 35-46



### B1004 • Komfort

Komfort har ett 2 mm tryckavlastande PU-skikt över hela ytan som ger en behaglig dämpning av steget, vilket är utmärkt för trötta fötter. Skoinlägget har även ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden. Indikationer: plattfot, spretfot, pes valgus, posttraumatiska fotdeformiteter, hälsenebesvär och knä- samt ryggsmärtor. Storlek: 35-47/48



### B1002 • Lange Inlägg, vuxen

En tunn och smidig Lange-modell med högre kanter och pelott. En formfast termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Överdraget med mjuk och behaglig microfiber. Justeringar eller omformning kan göras över individuell läst. Storlek: 35-47/48



### B1005 • Komfort Hög

Komfort Hög har ett 2 mm tryckavlastande PU-skikt över hela ytan som ger en behaglig dämpning av steget, vilket är utmärkt för trötta fötter. Skoinlägget har även ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden. Storlek 35-47/48  
Indikationer: se under B1004 Komfort.



Omformningsbara vid 110 ° C

### B2464 • Hälsporreinlägg med avlastning

Ett inlägg som designats för att avlasta området medialt om calcaneus i kombination med området över flexor hallucis longus. Thermoplastkärnan har en utskärning över hälen med PU-skum. Inne i materialet (2 mm EVA) ligger sedan Poron över flexor hallucis longus-området. Inlägget är överdraget med microläder. Inlägget har pelott. Storlek: 35-48



### B136600 • Skalinlägg Hallux Carbon

Skoinlägget har ett styvt lager kolfiber som löper från hålfoten fram under stortån (hallux), vilket minskar böjning av stortåleden och därmed belastningen av den vid gång. Indikationer: Hallux limitus/rigidus/valgus, artros och artit i stortåleden. Storlek 35-48




### B136687 • Hallux Carbon med pelott

Ett skoinlägg tillverkat av ett starkt och flexibelt kolfiber med ett vadderat PU-tylager (2 mm) samt ett ytskikt i microfiber som ger en skön känsla mot huden. Konstruerad för att begränsa smärtsamma rörelser i stortåns grundled. Indikationer: Hallux limitus/rigidus/valgus, artros och artit i stortåleden. Storlek 35-46



### B663018 • Carboninlägg

Plana termoplastiska carbon-inlägg (1,9 mm). Inläggen kan slipas till efter önskad form och formas om vid en temperatur på minst 90° – max 240° C. Storlek: 35-48

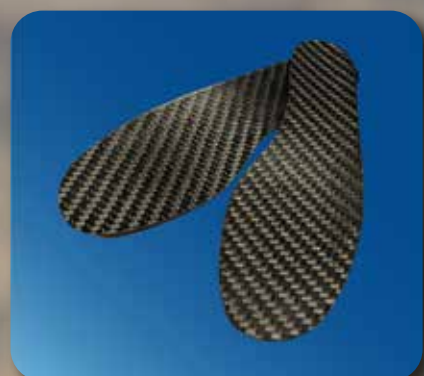

Omformningsbara vid 110 ° C



#### B2231 • Wide HK Special 5 mm TOV Blå

En EVA-sula med 2 skikt EVA, blå 35 och vit bas 50 shore, med metatarsalpelott i framfoten. De två materialen är speciellaminerat i produktion vilket innebär att de inte kan delaminera vid uppvärmning. Sulan ska modifieras över läst eller slipas in.



#### B2232 • Wide HK Special 6 mm TOV Beige

En EVA-sula med 2 skikt EVA, Beige 30 och vit bas 50 shore, med metatarsalpelott i framfoten. De två materialen är speciellaminerade i produktion vilket innebär att de inte kan delaminera vid uppvärmning. Sulan ska modifieras över läst eller slipas in.



#### B51456 • Soft inlägg Röd

Inlägg med hel bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av röd Springolon Plus 10 shore. Bindsula som en komfortsko. Pelott finns bifogad.



#### B41456 • Diasoft inlägg Röd $\frac{3}{4}$ -bas

Inlägg med  $\frac{3}{4}$  -bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå plastazote 20 shore och toppskikt av röd Springolon Plus 10 shore. Bindsula som en komfortsko. Pelott finns bifogad.

Skstorlekar: 35-48 Omformningsbara vid 110 ° C



### B71456 • Diapedica EVA utan pelott

Basen på denna sula är EVA 45 shore och toppskiktet består av 3 mm Luna EVA. Eftersom EVA har slutna celler går det bra att tvätta ytan med tvällösning eller antibakteriella medel. Indikationer: För diabetiker och patienter med sår.



### B5238 • Lange Svart

Ett Lange-inlägg med bred läst som är klätt med svart microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Dubbelstorlek: 19/20-47/48



Obs! Ej lagervara!

### B130 • ProPrio Sensorimotor

De utmärkande egenskaperna hos dessa fotortoser är de stimulerande elementen som är unikt arrangerade över ytan. Nervsystemet bearbetar de riktade sensstimuli och reagerar genom att anpassa sin muskeltonus. Trycket från stimuli kan avlasta muskler och leder och därigenom korrigera gångmönster eller positivt påverka rörelsevanor. Dubbelstorlek: 19/20-35/36



### B5036 • Orthosoft Barn

Ett mjukt EVA-inlägg med höga kanter. Ca. 15 mm materialtjocklek och kan enkelt formas över läst. Dubbelstorlek: 19/20-41/42

Omformningsbara vid 110 ° C



### B5138 • Lange med bred läst

Ett Lange-inlägg med 3 mm EVA som är klätt med microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka.

Dubbelstorlek: 19/20-47/48



### B5137 • Lange med smal läst

Samma utformning som sulan Lage med bred läst.

Dubbelstorlek: 19/20-41/42



### B5138 • Lange i multifärgat EVA

Utformningen är densamma som sulorna B5138 och B5137.

Dubbelstorlek: 19/20-39/40

Omformningsbara vid 110 ° C

# TULI'S®



## Tuli's Classic Hälkopp

Tulis patenterade "våffeldesign" absorberar stötvågen och returnerar dess energi precis på samma sätt som man sett i fotens konstruktion. Våffeldesignen komprimeras och roterar vid normal fotrörelse för att absorbera stötvågen som bildas vid gång och löpning. Precis som en fjäder returnerar Tuli's hälkopp energin för maximal prestation. Säljs i par. Indikationer: Promenader eller löpning, extra stötdämpning för hälen och avlastning eller prevention av plantarfasciit.

TU10010 Medium < 80 kg • TU10020 Large > 80kg



## Tuli's Heavy Duty Hälkopp

Dubbelt så tjock som Tuli's Classic. Erbjuder maximal prestation och maximalt skydd när du behöver det som bäst. Säljs i par. Indikationer: Avlastning eller prevention av plantarfasciit, hälseneinflammation, Apofysit, Severs skada, sportaktiviteter och löpning samt avlastning vid benhinneinflammation.

TU10211 Small < 40 kg • TU10212 Medium < 80 kg • TU10214 Large > 80kg



## Tuli's SoSoft Hälkopp

Utformade för att vara lättare, mjukare och mer motståndskraftig än andra hälkoppar. Mjukt tygmateriale kombinerat med gelkonstruktion ger ökad komfort med eller utan strumpor. Indikationer: Hälsmärta, Plantarfasciitis, hälseneinflammation, benhinneinflammation

TU10207 Medium < 80 kg • TU10208 Large > 80kg



### Tuli's Polar Bears Dual Density Hälkopp

Denna hälkopp är designad speciellt för den som lider av hälsporre. Det "våffelmönstrade" blå fältet, omgivet av en ring av bekväm TuliGel, gör att detta inlägg fördelar trycket på hälen så att det smärtsamma området får lindring.

TU10300 Medium < 80 kg • TU10310 Large > 80kg



### Tuli's RoadRunners

En högkvalitativ ersättningssula för att öka fysisk prestation och minska trötthet med stabiliserande stöd. Kombinationen av Tulis unika våffelmönster och ett material av polyuretan och poron både lagrar och frigör energi från stötar. Ett bra hjälpmedel mot skada som ger bra avlastning för trötta ben, vader och rygg

Skostorlekar

TU1041 36-38 • TU1042 39-40 • TU1043 41-43 • TU1044 44-46



### Tuli's Plantar Fasciitis Insole

En ersättningssula i full längd designad speciellt för plantarfasciit och liknande fotbesvär. Stödet under det långsgående valvet fördelar kroppsvikten jämt över fötterna för att bidra till ökad stabilitet, balans och bättre hållning.

TU10091 S 36-38 • TU10092 M 39-41 • TU10093 L 42-44 • TU10094 XL 45-47



### Tuli's Cheetah

En dynamisk kombination av Tulis Heel Cups stötdämpande teknologi och komforten och stödet från ett lätt neoprenankelstöd. Ger en "barfotakänsla", ett skydd och idealisk komfort för många idrottare inklusive gymnaster och dansare. Ger stöd för trötta och svullna fotleder.

Mät omkretsen runt fotens valv och fotrygg

TU20220 XS 19 cm • TU20225 S 19-21,5 cm • TU20230 M 21,5-24 cm • TU20240 L 24-26,5 cm



### Tuli's X-Brace

Denna enkla men mycket effektiva elastiska fotortos kan lindra smärta i samband med flantarfasciit, hälinflammation och överpronation. Genialiteten med X-Brace är hur lätt den är att använda samtidigt som den kan lösa komplicerade problem.



Artikelnr.	XB900	XB9001	XB9002	XB9003	XB9004	XB9005
Storlek	XXS	XS	S	M	L	XL
Skostorlek	27-31	31,5-36	36,5-40	40,5-43	43,5-45	45,5-47



### MR1500 Mediroyal MOW

Medial Orthotic Wedge är tillverkad av EVA i två densiteter och Poron i hälen för ökad stötdämpning. Stödjer medialt för att kompensera del av pronation.

Dubbelstorlekar: 34/35-46/47



### MR1700 Mediroyal LOW

Lateral Orthotic Wedge stödjer lateralt för att kompensera supination på framfoten. Användbart inom rehabiliteringen för att minska smärta, stödja och öka ledpositionssinnet. Patienter med knäledsartros kan använda LOW sulan för att ändra belastningen i knäleden vilket kan leda till minskad smärta vid aktivitet och vila. Patienter med laterala fotledsskador och kroniska laterala instabiliteter kan också använda LOW sulan för att minska risken för att trampa snett.

Dubbelstorlekar: 34/35-46/47



B9002

### Självklistrande pelletter

Läderklädda pelletter med självhäftande adhesiv. Skumkärnan är tillverkad av latexskum och överdragen med svart skinn. Enkelt att klistra på plats i de flesta skor. Pelotten lyfter och avlastar främre trampdynan effektivt. Bra mot problem med mortons neurom, nedsjunkna främre fotvalv, hallux valgus samt generell belastningssmärta.

Säljs styckvis samt 10 par/fp.



B9021

Storlek	S	M	L	XL
Skostorl.	35-37	38-40	40-43	44-46




B4111

### B4111 Pelottsula

Information som ovan.

Skostorlek 35-45

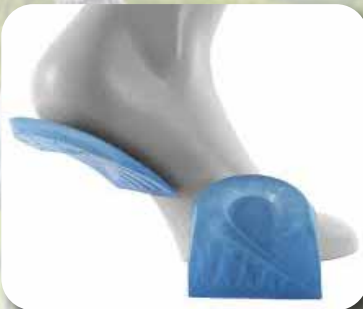

### MR1400 Hälsporrekil

Kilen är utvedklad för att avlasta för hälsporre och plantarfasciit. Designad som höger och vänster för att kunna ge en effektiv avlastning medialt.

Skostorlek: Small (35-39), Medium (40-42) och Large (43-46)



### MR1401 Hälkil

Designad för att ge avlastning och stötdämpning. Modellen är något längre än vanliga hälkilar för att ge en effektivare avlastning. Används för achilleshondit, allmän hälsmärta och vid behov av avlastning och extra stötupptagning.

Skostorlek: Small (35-39), Medium (40-42) och Large (43-46)

### MR1402 Hälskil

Utvecklad för att ge stöd vid problem med hälsens fettkudde. Kilen har en högre sarg vilket ger ett effektivt stöd åt fettkudden. Används vid begynnande hälsproblem och kollapsad fettkudde.

Skostorlek: Small (35-39), Medium (40-42) och Large (43-46)



### MR1403 Valvstöd

Ett smidigt valvstöd som ger ett bra stöd för hälften. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Används för höga eller låga fotvalv, smärta över längsgående fotvlavet.


Skostorlek: Small (35-39), Medium (40-42) och Large (43-46)



### MR1411 Helsula Tunn

Helsula med tunnare framfot och tjockare häls. Ger mer plats i skon och bra avlastning och stötupptagning för hela foten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par. Används vid överbelastningsskador i nedre extremitet, benhinneproblem orsakade av låg stötupptagning, post-op efter knä- eller höftplastik.

Skostorlek: A (35-37), B (37-40), C (40-43), D (44-45), E (46+)

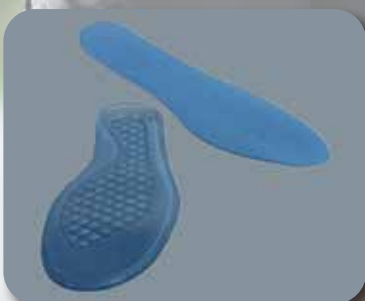



**GaitTec Standard Duo** er en allroundsåle som passer til de fleste sko og fottyper. Tolagssåle med en forholdsvis myk base og en behagelig myk overflate som gir god stabilitet og funksjonell kontroll. Den har en dyp hælkappe som gir god støtte til calcaneus, samler fettputen for optimal støtdemping og en form som gir mulighet for god støtte til fotens lengdebue.

Denne sålen kan brukes i joggesko, skisko, fjellsko, fritidssko etc.



**GaitTec Standard Single** er en meget komfortabel allroundsåle som passer til de fleste sko og fottyper. En ettlagssåle med en myk base som gir god stabilitet og funksjonell kontroll.

Standard Singel har en dyp hælkappe som gir god støtte til calcaneus og samler fettputen for optimal støtdemping og en form som gir god støtte i lengdebuen.



**GaitTec Sport Duo** er en såle med litt lavere profil som gir mulighet for plass i smalere sko eller pasienter som ønsker litt mindre støtte under lengdebuen. Tolagssåle med en medium hardt base og myk overflate for best mulig komfort.

Den har samme dype hælkappe som GaitTec Standard Duo for god støtte til calcaneus og samler fettputen for optimal støtdemping.



**GaitTec Sport Single** er en såle med lav profil som passer bra i smale sko eller til pasienter som ønsker litt mindre støtte under lengdebuen. En ettlagssåle laget i medium hardt materiale.

Sport Singel har samme dype hælkappe som GaitTec Standard Duo og gir god støtte til calcaneus og samler fettputen for å gi optimal støttabsorbering.



**GaitTec Slim Fit** er en ettlagssåle som er laget av forholdsvis hardt materiale for maksimal støtte.

Denne sålen har en lav profil og passer godt også i smalere skotyper.



**GaitTec 3/4** er en slankere og kortere såle for smale sko der det ikke er plass til en helsåle. Dresssko, pumps etc. Den gir god støtte til hælen og lengdebuen på samme måte som de vanlige sålene, og en har muligheter for ytterligere korrigerende med kiler og pelotter alt etter pasientens behov.

Består av ett lag med hardt skummateriale som gir god støtte og holdbarhet.



**GaitTec Kids** er designet for å passe en rekke skotyper for voksende føtter.

Ettlagssåle i mykt materiale som gir utmerket demping og komfort.

#### Størrelsesoversikt

Strl.	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Sko strl.	34,5-36	36-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5	47-50

#### Størrelsesoversikt barn

Strl.	K1	K2	K3	K4	K5
Sko strl.	25-26,5	27-29	29,5-31,5	32-34	34,5-36

# ALFAcare



www.alfacare.no  
post@alfacare.no  
+47 35 02 95 95



www.alfacare.dk  
info@alfacare.dk  
+45 34 11 88 88



www.alfacare.se  
info@alfacare.se  
+46 8 564 85 030



### MR1600 XFW extra framfotskil


XFX står för Extra Forefoot Wedge och kan användas tillsammans med Mediroyal MOW/LOW sulorna för att öka korrigeringsgraden. Kilen är tillverkad i EVA med högre densitet (6 mm) och kan användas antingen lateralt eller medialt på framfoten. Den monteras med självhäftande tejp eller limmas på plats permanent med kontaktlim. 1 par/fp. Universal storlek.



### EU5300 Hälkopp

Tillverkad i DeRon och PE-skum (2 mm). Används för att öka stötdämpningen i hälregionen på individuellt tillverkade fotbäddar och inlägg av EVA.

1 par/fp. Universal storlek.

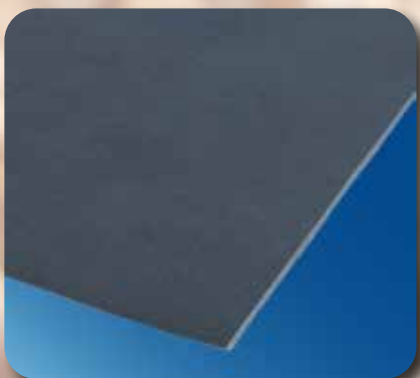

### DeRon


Ett PU-skum som finns i 3 och 5 mm tjocklek. Materialet används för att ge extra dämpning och tryckavlastning. Säljs per kvadratmeter.

AC3100 = 140 cm x 3 mm

AC3101 = 140 cm x 5 mm



mediroyal

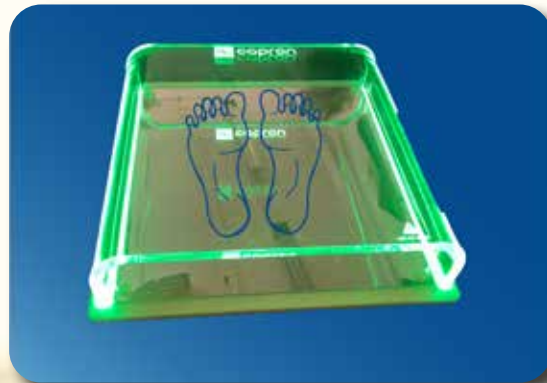

### B6066 Spegellåda

En lättanvänd stabil spegellåda av hög kvalitet som tydligt synliggör fotens belastningsytor med grönt (m fl.) LED ljus.

Maxbelastning: 135 kg

Mått: 47 x 47 x 11 cm.

CE-märkt enligt det medicinska direktivet MDR 2017/745 klass 1.



Scanna QR-koden för att komma till hemsidan