

MEDIROYAL INLÄGG



mediroyal.se



BESTÄLL-
NINGSVARA

DIASOFT BEIGE INLÄGG MED $\frac{3}{4}$ -BAS

B41454
DiaSoft Beige inlägg
med $\frac{3}{4}$ -bas
Färg: Beige/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B41454 Inlägg med $\frac{3}{4}$ bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av röd Diapower 22 shore och toppskikt av hudfärgad PPT 18 shore.



BESTÄLL-
NINGSVARA

SOFT INLÄGG BEIGE

B51454
Soft inlägg Beige
Färg: Beige/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B51454 Inlägg med hel bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av röd Diapower 22 shore och toppskikt av hudfärgad PPT 18 shore.



DIASOFT BLÅ INLÄGG MED $\frac{3}{4}$ -BAS

B41455
DiaSoft Blå
inlägg med $\frac{3}{4}$ -bas
Färg: Blå/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B41455 Inlägg med $\frac{3}{4}$ bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av blå Springolon Plus 10 shore.



SOFT INLÄGG BLÅ

B51455
Soft inlägg Blå
Färg: Blå/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B51455 Inlägg med hel bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av blå Springolon Plus 10 shore.



LAGERVARA



DIASOFT RÖD INLÄGG MED $\frac{3}{4}$ -BAS

B41456
DiaSoft Röd inlägg
med $\frac{3}{4}$ -bas
Färg: Röd/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B41456 Inlägg med $\frac{3}{4}$ bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av Röd Springolon Plus 10 shore.



BESTÄLL-
NINGSVARA



SOFT INLÄGG RÖD

B51456
Soft inlägg Röd
Färg: Röd/Vit
Pelott: Ja, finns bifogad
Omformningsbar: Ja, vid 110° C
Storlekar: 35-47/48

B51456 Inlägg med hel bas av vit EVA 45 shore, mellanskikt av grå Plastazote 20 shore och toppskikt av Röd Springolon Plus 10 shore.

BESTÄLL-
NINGSVARA



EVA INLÄGG 45 SHORE

B136S1
EVA Inlägg 45 shore

Färg: Vit

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

Storlekar: 35-47/48

B136S1 Ett stabilt inlägg i 45 shore EVA med pelott. Har förhöjda kanter runt hälpartiet och valv och ca 15 mm materialtjocklek undertill.

Alla produkter på
mediroyal.se



LAGERVARA

LANGE-INLÄGG MED BRED LÄST, BARN

B5138
Lange-inlägg
med bred läst, barn

Färg: Blå

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

Storlekar: Dubbelstorlekar

19/20 21/22 23/24 25/26

27/28 29/30 31/32 33/34

35/36 37/38 39/40

B5138 Ett lange-inlägg med 3 mm EVA som är klätt med microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Materialet är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

LAGERVARA

LANGE-INLÄGG MED SMAL LÄST, BARN

B5137
Lange-inlägg
med smal läst, barn

Färg: Blå

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid 110° C


Storlekar: Dubbelstorlekar

19/20 21/22 23/24 25/26

27/28 29/30 31/32 33/34

35/36 37/38 39/40

B5137 Ett lange-inlägg med 3 mm EVA som är klätt med microfiber. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Materialet är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

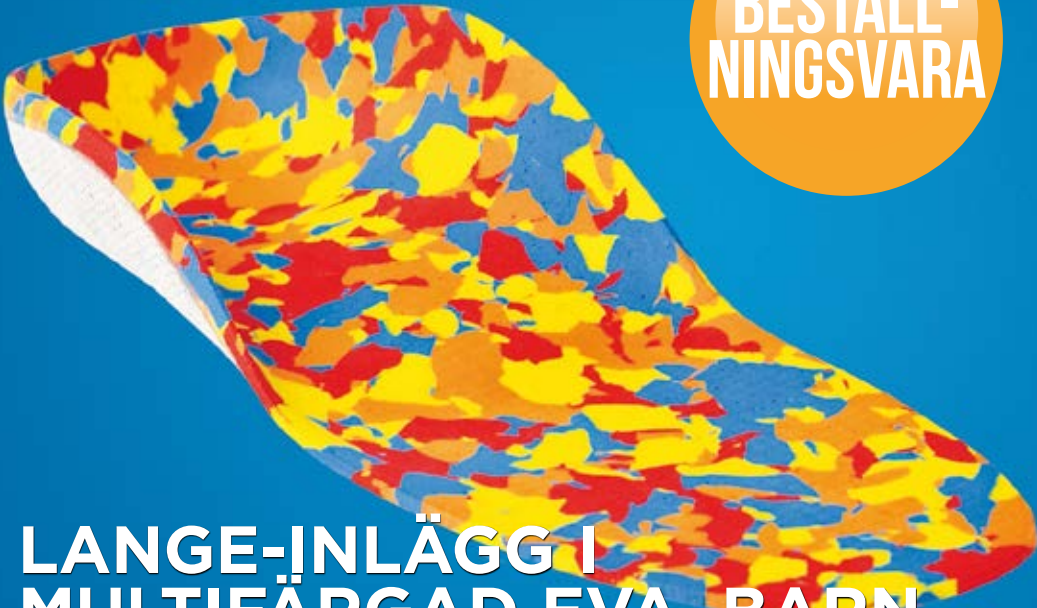

BESTÄLL-
NINGSVARA

LANGE-INLÄGG I MULTIFÄRGAD EVA, BARN

B5038
Lange-inlägg i
multifärgad EVA, barn

Färg: Multifärgad

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

Storlekar: Dubbelstorlekar

19/20 21/22 23/24 25/26

27/28 29/30 31/32 33/34

35/36 37/38 39/40

B5038 Ett lange-inlägg med 3 mm multifärgad EVA. Flexibla och mjuka kanter gör inlägget bekvämt och lätt att anpassa individuellt. Den formfasta termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Materialet möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.



BESTÄLL-
NINGSVARA

LANGE-INLÄGG VINTER, BARN

B5338
Lange-inlägg Vinter,
barn

Färg: Blå med mönster

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

Storlekar: Dubbelstorlekar

19/20 21/22 23/24 25/26

27/28 29/30 31/32 33/34

35/36 37/38 39/40

B5338 Ett Lange-inlägg speciellt framtaget för vinterbruk. Tillverkad av 2 mm EVA som är belagd med aluminiumfilm undertill för värmereflektion. Thermoplastbotten som ger bra stabilitet och styrka och kan justeras och formas individuellt över läst.

LAGERVARA



MEDIROYAL SPORT

B1000
Mediroyal Sport
 Färg: Blå
 Pelott: Ja
 Omformningsbar: Ja, vid
 110° C
 Storlekar: 35-48

B1000 En sportsula i helfabrikat som kan värmas och justeras individuellt. Har en kärna av thermoplast som ger bra stabilitet, överdragen med 1,5 mm PPT och 1 mm microperforerad EVA.

LAGERVARA



MEDIROYAL COMFORT PLUS

B1001
Mediroyal Comfort Plus
 Färg: Svart
 Pelott: Ja
 Omformningsbar: Ja, vid
 110° C
 Storlekar: 35-48

B1001 Ett mycket tunt och smidigt inlägg som ger ett skönt stöd över både häl och hålfot. Tillverkad av en tunn och stabil thermoplastkärna med 1,5 mm PPT som är överdraget med microfiber.

LAGERVARA



MEDIROYAL LANGE-INLÄGG, VUXEN

B1002
Mediroyal Lange,
vuxen
Färg: Svart
Pelott: Ja
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B1002 En tunn och smidig Lange-modell med högre kanter. En formfast termoplastbotten ger inlägget stabilitet och styrka. Överdraget med mjuk och behaglig microfiber. Justeringar eller omformning kan göras över individuell läst.

LAGERVARA



CITY SPRINGER UTAN PELOTT

B176483
City Springer utan
pelott
Färg: Blå
Pelott: Nej
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B176483 Ett tunt och smidigt inlägg med 1,5 mm PU skum och klätt med microfiber ger en hög komfort. Som förstärkning ligger en supertunn kärna i termoplast, med extra förstärkning över valvet. Inlägget är formbart vid 110°C, vilket möjliggör justeringar eller omformning över individuell läst.

LAGERVARA

CITY SPRINGER ¾-INLÄGG MED PELOTT

B173487
City Springer
 ¾-inlägg med pelott
 Färg: Blå
 Pelott: Ja
 Omformningsbar: Ja, vid
 110° C
 Storlekar: 35-48

B173487 Ett tunt ¾-inlägg med pelott. Har en stabil thermoplastkärna med extra förstärkning över valvet, överdraget med 2 mm PU-skum och microfiber. Kan justeras och formas individuellt över läst.


LAGERVARA

COMFORT SPRINGER BEIGE MED PELOTT

B176487
Comfort Springer
 Beige med pelott
 Färg: Beige
 Pelott: Ja
 Omformningsbar: Ja, vid
 110° C
 Storlekar: 35-48

B176487 Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2 mm tryckavlastande PPT överdragen med microfiber. Extra förstärkt över valvet ger ett mycket bra stöd. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.

LAGERVARA

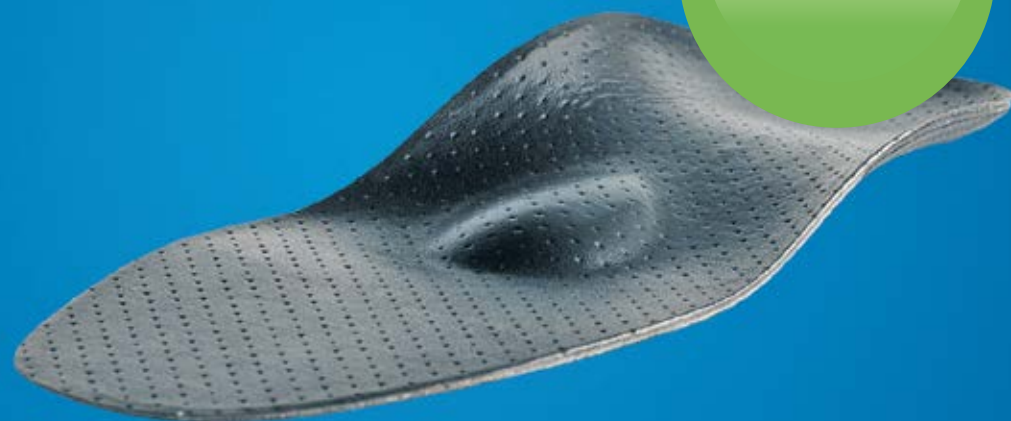

COMFORT SPRINGER MED PELOTT MICROSKINN

B176423
Comfort Springer
med pelott,
microskinn

Färg: Svart

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B176423 Ett tunt och mycket smidigt inlägg med pelott och stöd för längsgående valvet. Lämplig för skor som är trånga. Tillverkad av en stabil och mycket tunn thermoplastbotten med extra förstärkning över valvet. Överdragen med ett perforerat microskinn. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.

LAGERVARA



COMFORT ¾-SULA I MICROSKINN

B173423
Comfort ¾-sula i
microskinn

Färg: Svart

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B173423 Ett smidigt inlägg med pelott, thermoplastbotten och 2 mm tryckavlastande PPT överdragen med microfiber. Extra förstärkning över valvet ger ett bra stöd. Överdragen med ett perforerat microskinn. Kan enkelt justeras eller omformas på individuell läst.

BESTÄLL-
NINGSVARAEVA-INLÄGG ORTHOSOFT
PLUS 15 MM**B123WS**
EVA-inlägg Orthosoft
Plus 15 mm

Färg: Vit

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B123WS Ett mjukt EVA-inlägg i halvfabrikat med pelott. Har ca 15 mm materialtjocklek och kan enkelt formas över läst och slipas.

LAGERVARA

EVA INLÄGGSSULA
50/30 SHORE**B133DP**
EVA inläggssula
50/30 shore

Färg: Svart/orange

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlek: 35-48

B133DP Ett EVA inlägg med pelott i två densiteter 52/30 shore. De två materialen är speciallaminerat i produktion vilket innebär att de inte kan delaminera vid uppvärmning. Materialet är formbart vid 110°-130°C.



**BESTÄLL-
NINGSVARA**

FOTBOLLSINLÄGG PROPRIO

B1730
Fotbollsinnlägg
ProPrio

Artikelnummer: B1730

Färg: Svart

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid 110° C

Storlekar: 35-48

B1730 ProPrio Fotbollsinnlägg är speciellt framtaget för att ge en proprioceptisk effekt med hjälp av stödpunkter för foten. Dessa stödpunkter hjälper till att öka receptiviteten från foten och ger ett individuellt stöd. Innlägget är speciellt anpassat för fotbollsskor. Tillverkad av en thermoplastkärna som är överdragen med 1 mm EVA och slitstark microfiber.

**Alla produkter på
mediroyal.se**



BESTÄLL-
NINGSVARA

INLÄGG MED THERMOPLAST- KÄRNA, 3 MM EVA

B286333
Inlägg med
thermoplastkärna,
3 mm EVA, Smal läst
Färg: Blå
Pelott: Ja
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B286433
Inlägg med
thermoplastkärna,
3 mm EVA, Bred läst
Färg: Blå
Pelott: Ja
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B286333 Öppen thermoplastkärna med dubbelförstärkning över valv samt med gummipelott. Överdragen med 3 mm EVA. Kan justeras och formas individuellt över läst. Smal läst.

B286433 Öppen thermoplastkärna med dubbelförstärkning över valv samt med gummipelott. Överdragen med 3 mm EVA. Kan justeras och formas individuellt över läst. Bred läst.

BESTÄLL-
NINGSVARA

INLÄGG MED THERMOPLAST- KÄRNA, 3 MM PPT

B286380
Inlägg med
thermoplastkärna,
3 mm PPT, Smal läst
Färg: Beige
Pelott: Ja
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B286480
Inlägg med
thermoplastkärna,
3 mm PPT, Bred läst
Färg: Beige
Pelott: Ja
Omformningsbar: Ja, vid
110° C
Storlekar: 35-48

B286380 Öppen thermoplastkärna med dubbelförstärkning över valv samt med gummipelott. Överdragen med 3 mm PPT. Kan justeras och formas individuellt över läst. Smal läst.

B286480 Öppen thermoplastkärna med dubbelförstärkning över valv samt med gummipelott. Överdragen med 3 mm PPT. Kan justeras och formas individuellt över läst. Bred läst.

BESTÄLL-
NINGSVARA

HÄLSPORRE INLÄGG MED AVLASTNINGSZON

B276335**Hälsporre inlägg med
avlastningszon**

Färg: Svart

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B276335 Ett inlägg som designats för att avlasta området medial om calcaneus i kombination med området över flexor hallucis longus. Thermoplastkärnan har en utskärning över hälen med PU-skum. Inne i materialet (2 mm EVA) ligger sedan Poron över flexor hallucis longus-området. Inlägget är överdraget med microläder. Kan justeras och formas individuellt över läst.

LAGERVARA

SKALINLÄGG CARBON HALLUX

B136600**Skalinlägg Carbon
Hallux**

Färg: Svart

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja upp till
5 gånger, vid 110-130°C med
varmluftspistol eller i ugn.

Storlekar: 35-48

B136600 Ett skalinlägg med kolfiberförstärkning över valv och över 1:a metatarsalledshuvudet som avlastar vid avveckling av steget. Lämplig för exempelvis hallux limitus eller rigidus. Kolfiberzonen säkerställer att metatarsalleden inte belastas. Kan formas individuellt upp till 5 gånger med hjälp av varmluftspistol eller ugn vid 110-130°C.



**BESTÄLL-
NINGSVARA**



SKALINLÄGG FÖR PUMPS, HÖGKLACKAT OCH HERRSKOR

SB126200
Skalinlägg för
högklackade skor

Färg: Gråvit

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-43

B126300
Skalinlägg för pumps-
& herrskor

Färg: Gråvit

Pelott: Nej

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B126200 Öppen thermoplastkärna med dubbelförstärkning över valv samt med gummipelott. Kan justeras och formas individuellt över läst.

B126300 Ett skalinlägg för pumps- & herrskor. Tar mycket lite plats i skon och thermoplastkärnan gör att det enkelt kan anpassas individuellt över läst.

LAGERVARA



PUMPSINLÄGG MED DÄMPNING I FRAMFOTEN

B126292
Pumpsinlägg med
dämpning i framfoten

Färg: Brun

Pelott: Ja

Omformningsbar: Ja, vid
110° C

Storlekar: 35-48

B126292 Ett specialanpassat inlägg för pumps och skor med klack. Den kraftiga sprängningen och den låga profilen gör att det fungerar utmärkt i skor med klack. Tillverkad av en thermoplastkärna samt extra stötdämpning över framfoten, överdragen med microläder.


LAGERVARA

EVA-MATERIAL FÄRDIGSTANSAD

B110040
B110055
EVA
B110040
EVA 40A Svart
B110055
EVA 55A Svart

B110040 B110055 EVA-material i färdigstansad form för tillverkning av individuella inlägg och fotbäddar. 14 mm tjocklek och 40 eller 55 Shore hårdhet. Materialets komposition och plasticitet har tagits fram för att fungera optimalt efter uppvärmning 120-150 grader C och därefter vakuum-formning. Formstabilt, enkelt att slipa och skära.

LAGERVARA

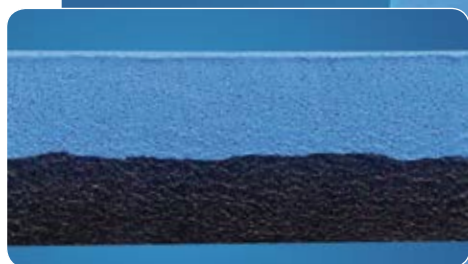

EVA DUAL BLÅ/SVART

B114055
EVA Dual Blå/Svart
Dubbel-densitet: 40 Shore
Blått och 50 Shore Svart.
14 mm tjock

B114055 EVA kombinerat i dubbel-densitet; 40 ShoreA Blått och 50 ShoreA Svart. 14 mm tjocklek och optimalt för tillverkning av individuella inlägg och fotbäddar. Rekommenderad temperatur är 120-150 grader C. Enkelt att slipa och vakuumforma.

LAGERVARA



B9002 Droppformad pelott, svart

10 par/förpackning
Storlek (skostorlek)
1 Small (35-38)
2 Medium (38-40)
3 Large (40-43)
4 X-Large (43-48)

B9021 T-formad pelott, svart

10 par/förpackning
Storlek (skostorlek)
1 Small (35-38)
2 Medium (38-40)
3 Large (40-43)
4 X-Large (43-48)

B9002 B9021 Läderklädda pelotter med självhäftande adhesiv. Skumkärnan är tillverkad av latexskum och överdragen med svart skinn. Enkelt att klistra på plats i de flesta skor.

BESTÄLL- NINGSVARA




B200330 EVA ANTI-STATIC 30

Tjocklek: 35 mm
Shore A: 30°
Storlek: 1 kvm
Färg: Svart
Temperatur: 120-140°C

B200440 EVA ANTI-STATIC 40

Tjocklek: 30 mm
Shore A: 40°
Storlek: 1 kvm
Färg: Svart
Temperatur: 120-140°C

B200330 B200440 Ett EVA-material med anti-statfunktion, används precis som vanligt EVA. Om fotbädden skall kläs måste en anti-stat klädsel (B2002 X-static) användas för att bibehålla ESD-effekten.

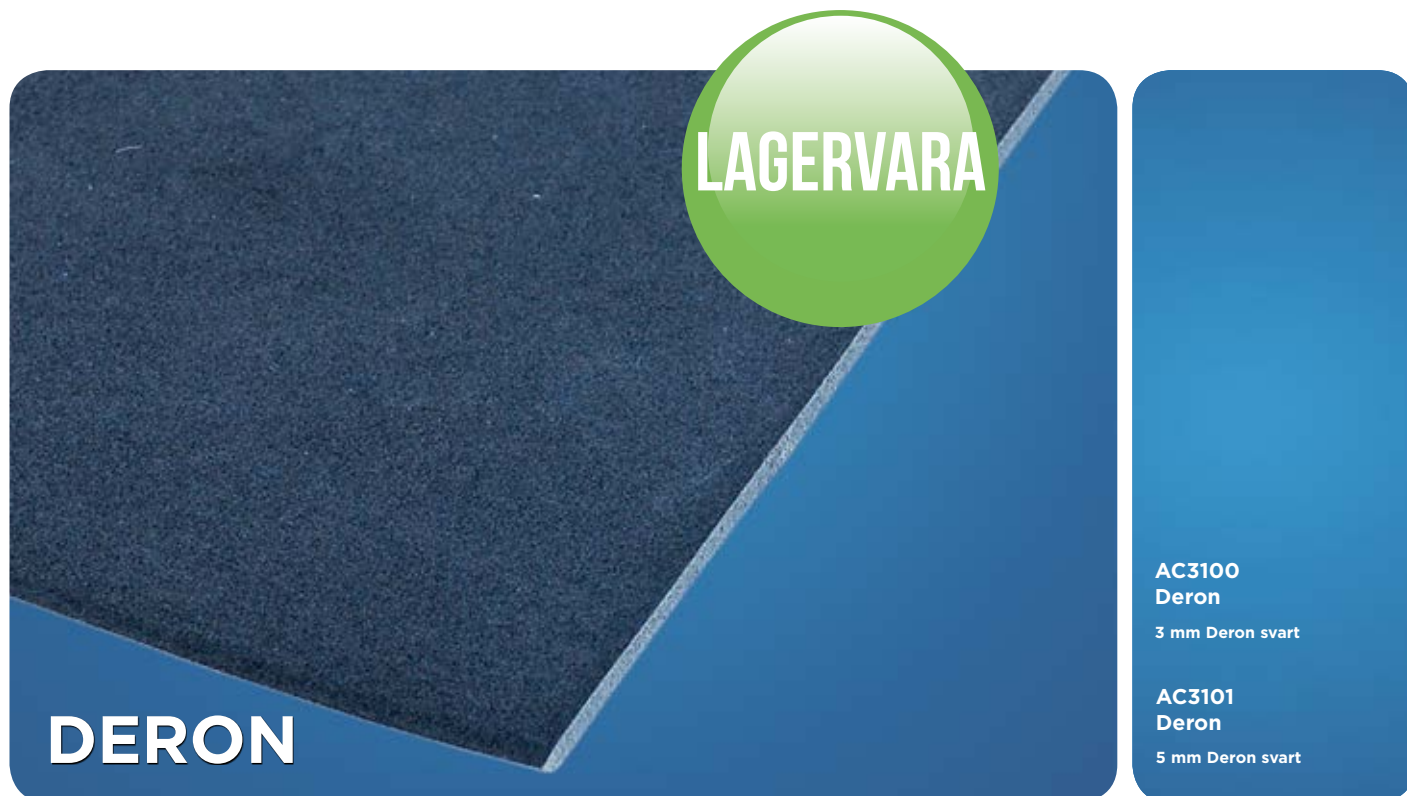

AC3100 AC3101 PU-skum i 3 och 5 mm. Används för att ge extra dämpning och tryckavlastning.



EU5300 Tillverkade i DeRon och PE-skum. Används för att öka stötdämpning i hälregionen på individuellt tillverkade fotbäddar & inlägg av EVA.

**BESTÄLL-
NINGSVARA**



**B2001
Microfiberklädsel**

Bredd: 12cm
Längd: 50 meter
Färger:
B20012 Grön
B20013 Beige
B20016 Brun
B20017 Blå
B20018 Orange
B20019 Svart

MICROFIBER- KLÄDSEL RULLE, FÖR INLÄGG

Microfiberklädsel av konstlädertyp för klädsel av inlägg eller ortoser.

**BESTÄLL-
NINGSVARA**



**B2002
X-static klädsel
ESD**

Bredd: 12cm
Längd: 10 meter
Färg: Svart

B2002 X-STATIC KLÄDSEL ESD

Klädsel med ESD-funktion för att bibehålla anti-stateffekten på EVA Anti-Static 30 och 40.

**BESTÄLL-
NINGSVARA**



**B2000
Avtryckslåda**

25 par/förpackning
Längd: 33,5 cm
Bredd: 14,5
Höjd: 6 cm

B2000 AVTRYCKSLÅDA

Kommer med 25 par/förpackning.



mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic